

97050644
rev.003
06/2015

CE
0051



SMART TOUCH

A7 Plus

IT

INDICE

1. Avvertenze generali	4	5.5.1.	Modalità di funzionamento RESTORATIVE	40
1.1. Simbologia	4	5.5.2.	Modalità di funzionamento ENDODONTIC	40
1.2. Uso previsto e modalità di impiego	4	5.5.3.	Modalità di funzionamento IMPLANT	42
1.2.1. Classificazione e normative di riferimento	4	5.5.4.	Menu impostazione rapporto di riduzione	43
1.2.2. Condizioni ambientali	5	5.6.	Detartaratore	44
1.2.2.1. Condizioni di trasporto ed imballaggio	5	5.7.	Lampada polimerizzante T-LED	47
1.2.3. Garanzia	5	5.8.	Telecamera endorale C-U2	50
1.2.4. Smaltimento a fine vita	5	5.9.	Sensore integrato ZEN-Xi	54
1.3. Avvertenze di sicurezza	6	5.10.	Pompa peristaltica	55
1.4. Pulizia e disinfezione	7	5.11.	Localizzatore apicale elettronico (APEX LOCATOR)	56
2. Descrizione degli apparecchi	8	6. Funzionamento tavoletta assistente	57	
2.1. Targhette di identificazione	8	6.1.	Consolle tavoletta assistente	57
2.2. Riuniti	8	6.2.	Siringa a tavoletta assistente	58
2.3. Poltrona dentistica	9	6.3.	Lampada polimerizzante a tavoletta assistente	58
3. Accensione unità operatoria	9	6.4.	Telecamera endorale a tavoletta assistente	58
4. Funzionamento poltrona dentistica	10	6.5.	Tubi di aspirazione	59
4.1. Dispositivi di sicurezza	10	6.6.	Vassoio portatray a tavoletta assistente	60
4.2. Dispositivi di emergenza	10	6.7.	Aspirasaliva idraulico	60
4.3. Appoggiatesta regolabile	11	7. Funzionamento gruppo idrico	61	
4.4. Bracciolo mobile (Optional)	11	7.1.	Bacinella e riempimento bicchiere	61
5. Funzionamento tavoletta medico	12	7.2.	Sistema S.H.S.	63
5.1. Consolle medico	14	7.3.	Sistema W.H.E. (Water Hygienisation Equipment)	64
5.1.1. Interfaccia utente	16	7.4.	Sistema automatico di disinfezione BIOSTER	65
5.1.1.1. Selezione operatore	17	7.5.	Ciclo automatico di lavaggio strumenti (Flushing)	67
5.1.1.2. Impostazioni generali	17	7.6.	Sistema A.C.V.S.	
5.1.1.2.1. Impostazioni sistemi di igiene	18		(Automatic Cleaning Vacuum Sistem)	68
5.1.1.2.1.1. Impostazione ciclo di disinfezione BIOSTER	18	7.7.	Apertura/chiusura carter laterale idrico	69
5.1.1.2.1.2. Impostazione ciclo Flushing	19	8. Accessori	70	
5.1.1.2.1.3. Svuotamento serbatoio sistema W.H.E.	19	8.1.	Lampada operatoria	70
5.1.1.2.2. Impostazioni gruppo idrico	20	8.1.1.	Lampada operatoria modello VENUS PLUS -L	70
5.1.1.2.2.1. Impostazione acqua alla bacinella	20	8.2.	Monitor a palo lampada	72
5.1.1.2.2.2. Impostazione acqua al bicchiere	21	8.3.	Negatoscopio per panoramiche	72
5.1.1.2.2.3. Impostazione movimentazioni automatiche bacinella	21	8.4.	Attacchi rapidi aria/acqua/230V	72
5.1.1.2.3. Impostazione comando a piede	22	9. Manutenzione	73	
5.1.1.2.4. Impostazione lampada operatoria	22	9.1.	Manutenzione degli strumenti	73
5.1.1.2.5. Altre impostazioni	23	9.2.	Scarico della condensa	73
5.1.1.2.6. Regolazione ora e data	23	9.3.	Pulizia filtri aspirazione chirurgica	73
5.1.1.2.7. Cronometro	24	9.4.	Aspirazione chirurgica	74
5.1.1.2.8. Personalizzazione pulsanti preferiti	24	9.5.	Separatore chirurgico CATTANI	75
5.1.1.2.9. Inserimento anagrafica operatore	25	9.6.	Pulizia filtro aria di ritorno turbina	76
5.1.1.2.10. Selezione lingua	25	9.7.	Separatore di amalgama CATTANI a gravità	76
5.1.1.2.11. Impostazione APEX LOCATOR	25	9.8.	Separatore di amalgama METASYS	76
5.1.2. Programmazione della "Posizione risciacquo"		9.9.	Separatore di amalgama DÜRR	76
5.1.2. e "Posizione di azzeramento" della poltrona	26	9.10.	Poltrona dentistica	76
5.1.3. Programmazione delle posizioni A, B, C e D		10. Messaggi di avvertimento	77	
5.1.3. della poltrona	26	11. Dati tecnici	78	
5.1.4. Pulsante di emergenza	26	11.1.	Caratteristiche dimensionali modello	
5.1.5. Pulsante blocco schermo SMART TOUCH	26		A7 Plus CONTINENTAL	79
5.2. Comando a piede	27	11.2.	Caratteristiche dimensionali modello	
5.2.1. Comando a piede "multifunzione"	27		A7 Plus INTERNATIONAL	80
5.2.2. Comando a piede "a pressione"	28	12. Schema generale di manutenzione del	81	
5.2.3. Comando a piede "Power Pedal"	30		complesso odontoiatrico	
5.2.4. Comando a piede versione WIRELESS	32			
5.3. Siringa	34			
5.4. Turbina	35			
5.5. Micromotore elettrico	37			

1. Avvertenze generali

- Queste istruzioni descrivono come utilizzare correttamente i complessi odontoiatrici serie A7 PLUS. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchiatura.
- Queste istruzioni descrivono tutte le versioni delle unità operatorie con il massimo degli accessori possibili, pertanto non tutti i paragrafi potranno trovare pratica applicazione nell'apparecchio acquistato.
- È vietata la riproduzione, la memorizzazione e la trasmissione in qualsiasi forma (elettronica, meccanica, mediante fotocopia, traduzione oppure altri mezzi) di questa pubblicazione senza autorizzazione scritta da parte di Cefla sc - Cefla Dental Group.
- Le informazioni, le specifiche tecniche, le illustrazioni, contenute in questa pubblicazione non sono vincolanti.
- Cefla sc - Cefla Dental Group si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti tecnici senza modificare le presenti istruzioni.
- Il fabbricante persegue una politica di costante miglioramento dei propri prodotti, quindi è possibile che alcune istruzioni, specifiche e immagini contenute in questo manuale possano differire leggermente dal prodotto acquistato. Il fabbricante inoltre si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a questo manuale senza preavviso.
- Il testo originale del presente manuale è in lingua italiana.
- Questa apparecchiatura è dotata di dispositivo anti-retrazione dei liquidi.

1.1. Simbologia

Significato dei simboli utilizzati:

1) Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Classe I . Grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Tipo B .	1		9		17	
2) ATTENZIONE! Indica una situazione in cui la mancata osservanza delle istruzioni potrebbe provocare un guasto all'apparecchio o danni all'utilizzatore e/o al paziente.	2		10		18	SN
3) "Consultare il libretto istruzioni" Indica che è consigliato consultare il libretto di istruzioni prima di utilizzare quella parte di apparecchiatura.	3		11		19	 NW-0402BQ0101
4) NOTA: Indica delle informazioni importanti per l'utilizzatore e/o per il personale di assistenza tecnica.	4		12	 0051	20	REF
5) Contatto di messa a terra di protezione.	5		13		21	
6) Corrente alternata.	6		14		22	
7) Parte sterilizzabile in autoclave a vapore 135 °C.	7	 135°C	15		23	
8) Comando ON / OFF.	8		16			
9) "Fare riferimento al libretto istruzioni" Indica che, per ragioni di sicurezza, è necessario consultare il libretto di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchiatura.						
10) Acceso (una parte dell'apparecchiatura).						
11) Spento (una parte dell'apparecchiatura).						
12) Apparecchiatura conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva CE 93/42 e successive modifiche introdotte (Dispositivo Medico in Classe IIa).						
13) Apparecchiatura conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva CE 93/42 successive modifiche introdotte (Dispositivo Medico in Classe I).						
14) Simbolo per lo smaltimento ai sensi delle Direttive 2002/95/ EC, 2002/96/ EC e 2003/108/ EC (valido solamente nella comunità europea).						
15) "Attenzione pericolo biologico". Fornisce l'indicazione di possibili rischi di contaminazione da contatto con fluidi, depositi biologici infetti.						
16) Fabbricante.						
17) Mese e anno di fabbricazione dell'apparecchiatura.						
18) Numero di matricola dell'apparecchiatura.						
19) Marchio DVGW (Marchio di Qualità relativo alla fornitura dell'acqua potabile).						
20) Codice identificativo prodotto/apparecchiatura.						
21) Vietato spingere.						
22) Pericolo di schiacciamento piede.						
23) Apparecchiatura equivalente a sorgente luminosa di Classe 2.						

1.2. Uso previsto e modalità di impiego

- I complessi odontoiatrici serie A7 PLUS sono Dispositivi Medici destinati al trattamento odontoiatrico.
- La tavoletta medico può essere equipaggiata con un massimo di 6 strumenti.
- La tavoletta assistente può essere equipaggiata con 2 cannule di aspirazione e 3 strumenti.
- Questa apparecchiatura deve essere utilizzata solo da personale medico e paramedico adeguatamente addestrato.
- Apparecchio previsto per **funzionamento non continuo** (si vedano i tempi delle singole parti nelle sezioni dedicate).
- Apparecchio a cui è associato un grado di inquinamento 2
- Categoria di sovratensione: II

1.2.1. Classificazione e normative di riferimento

- Classificazione DISPOSITIVI MEDICI: classificazione del complesso odontoiatrico secondo le regole indicate nell'allegato IX della Direttiva 93/42/ CE e successive modifiche intervenute: **Classe IIa**.
- Classificazione DISPOSITIVI Elettromedicali: classificazione dell'apparecchiatura secondo la norma I.E.C. 60601-1 per la sicurezza di apparecchiature mediche: **Classe I - Tipo B**.
- Normative di riferimento: le unità operatorie della serie A7 PLUS sono apparecchiature progettate in conformità alle norme IEC 60601-1 3.a Ed. - 2007, IEC 60601-1-6 3.a Ed. - 2010, IEC 62366 1.a Ed. - 2007, IEC 60601-2-60 1.a Ed. - 2012, IEC 60601-1-2 3.a Ed., ISO 6875 3.a Ed. - 2011, ISO 7494-1 2.a Ed. - 2011 e EN 1717 (tipo AA e AB) per quanto riguarda i dispositivi per la sicurezza della rete idrica.
- Classificazione DISPOSITIVI RADIO E TERMINALI DI COMUNICAZIONE (solo in presenza di comando a piede versione WIRELESS)
Classificazione dell'apparecchiatura secondo la direttiva 99/05/CE art. 12: **Classe I**.

1.2.2. Condizioni ambientali

L'apparecchiatura deve essere installata in ambienti con le seguenti condizioni:

- temperatura da 10 a 40°C;
- umidità relativa da 30 al 75%;
- pressione atmosferica da 700 a 1060 hPa;
- altitudine ≤ 3000 m;
- pressione dell'aria all'entrata nella apparecchiatura compresa tra 6-8 Bar;
- durezza dell'acqua all'entrata nella apparecchiatura non superiore a 60 mg/l;
- durezza dell'acqua all'entrata nella apparecchiatura non superiore a 25 °f (gradi francesi) o a 14 °d (gradi tedeschi) per acqua potabile non trattata, per acque con durezza più elevata è consigliato l'addolcimento fino a durezza compresa fra 15 e 25 °f (gradi francesi) o fra 8,4 e 14 °d (gradi tedeschi);
- pressione dell'acqua all'entrata nella apparecchiatura compresa tra 3-5 Bar;
- temperatura dell'acqua all'entrata nella apparecchiatura non superiore ai 25°C.

1.2.2.1. Condizioni di trasporto ed imballaggio

- Temperatura: da -10 a 70°C
- Umidità relativa: da 10 a 90%
- Pressione atmosferica: da 500 a 1060hPa

1.2.3. Garanzia

Cefla sc - Cefla Dental Group garantisce per la sicurezza l'affidabilità e le prestazioni degli apparecchi.

La garanzia è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Osservanza delle condizioni riportate sul certificato di garanzia.
- L'apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente secondo le istruzioni riportate nel presente libretto.
- L'impianto elettrico dell'ambiente in cui viene installata l'apparecchiatura deve essere conforme alle norme I.E.C. 60364-7-710 (Norme relative agli impianti elettrici di locali adibiti ad uso medico).
- L'apparecchio deve essere alimentato con una linea 3x1,5 mm² protetta da un interruttore magnetotermico bipolare conforme alle relative normative (10 A, 250 V, distanza fra i contatti almeno 3 mm).



ATTENZIONE!

Il colore dei tre conduttori (LINEA, NEUTRO e TERRA) deve corrispondere a quanto prescritto dalle Norme.

- Il montaggio, le riparazioni, l'ampliamento dell'apparecchio, le tarature e in generale tutte le operazioni che comportano l'apertura dei cofani dell'apparecchiatura devono essere effettuate esclusivamente da tecnici autorizzati da ANTHOS.

1.2.4. Smaltimento a fine vita

Ai sensi delle Direttive 2002/95/ EC, 2002/96/ EC e 2003/108/ EC, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti è fatto obbligo di non smaltire questi ultimi come rifiuti urbani, effettuandone la raccolta separata. Al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, l'apparecchiatura giunta a fine vita dovrà essere riconsegnata al rivenditore per lo smaltimento. Con riguardo al reimpiego, riciclaggio e alle altre forme di recupero dei rifiuti di cui sopra, il produttore svolge le funzioni definite dalle singole Legislazioni Nazionali. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.



ATTENZIONE!

Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione delle sanzioni definite dalle singole Legislazioni Nazionali.


1.3. Avvertenze di sicurezza

ATTENZIONE!

- **L'installazione di tutti gli apparecchi è sempre di tipo permanente.**
In base al tipo di poltrona cui il riunito è abbinato riferirsi all'apposita DIMA di installazione indicata al paragrafo "Dati Tecnici".
Cefla sc - Cefla Dental Group declina ogni responsabilità per danni a cose e persone qualora non venga rispettata la presente clausola.
- **Condizione del pavimento.**
Le condizioni del pavimento (di tipo continuo), devono essere conformi alle norme di portata secondo DIN 1055 foglio 3.
Il peso del complesso dentale compreso di paziente da 190 Kg, è uguale c.a 350Kg/mq.
Per maggiori dettagli sulle caratteristiche di fissaggio, vedi il Manuale d'Installazione.
- Non è ammessa alcuna modifica di questo apparecchio senza l'autorizzazione del fabbricante.
In caso di modifica dell'apparecchio, si devono effettuare esami e prove adeguati ad assicurare il suo uso continuo in sicurezza.
Cefla sc - Cefla Dental Group declina ogni responsabilità per danni a cose e persone qualora non venga rispettata la presente clausola.
- **Poltrona.**
Il carico massimo ammesso sulla poltrona è di 190 Kg. Questo valore non deve essere superato.
- **Superficie di appoggio dei trays.**
Non devono essere superati i valori di carico massimo di seguito indicati:
- portatray applicato alla tavoletta medico, carico massimo ammesso sul vassoio 2 Kg. distribuito.
- portatray applicato alla tavoletta assistente, carico massimo ammesso sul vassoio 1 Kg. distribuito.
- **Collegamenti a strumenti esterni.**
L'apparecchio può essere collegato elettricamente solo ad altri strumenti provvisti di marchio CE.
- **Interferenze elettromagnetiche.**
L'utilizzo nello studio o nelle immediate vicinanze di apparecchi elettrici non conformi alla normativa IEC 60601-1 3.a Ed. - 2007, potrebbe causare interferenze elettromagnetiche o di altra natura, provocando malfunzionamenti del complesso odontoiatrico.
In questi casi **si raccomanda** di togliere preventivamente l'alimentazione del complesso odontoiatrico prima di utilizzare tali apparecchiature.
- **Sostituzione delle frese.**
Azionare i dispositivi di sbloccaggio delle turbine e dei contrangoli soltanto quando la fresa è completamente ferma. In caso contrario il sistema di bloccaggio si deteriora e le frese possono sganciarsi provocando ferimenti. Usare esclusivamente frese di qualità con lo stelo di attacco di diametro calibrato. Per verificare lo stato del dispositivo di bloccaggio, controllare ogni giorno, all'inizio del lavoro, che la fresa sia bloccata saldamente allo strumento. I difetti al sistema di bloccaggio dovuti ad uso non corretto sono facilmente riconoscibili e non sono coperti da garanzia.
- **Pazienti portatori di cardiostimolatore e/o protesi acustiche.**
Nel trattamento dei pazienti portatori di cardiostimolatore e/o protesi acustiche occorre considerare i possibili effetti degli strumenti utilizzati sul cardiostimolatore e/o sulla protesi acustica. A questo scopo si rimanda alla letteratura tecnico-scientifica sull'argomento.
- **Implantologia.**
Nel caso che il complesso odontoiatrico venga impiegato per interventi di implantologia utilizzando apparecchiature autonome e finalizzate a questo intervento **si raccomanda** di togliere l'alimentazione della poltrona onde evitare possibili movimenti indesiderati causati da guasti e/o attivazioni accidentali dei comandi di movimentazione.
Prima di lasciare l'ambulatorio disinserire l'alimentazione idrica dello studio e l'interruttore generale dell'apparecchiatura.
L'apparecchio non è protetto contro la penetrazione di liquidi (IPX 0).
L'apparecchio non è adatto ad un uso in presenza di una miscela di gas anestetico infiammabile con ossigeno o protossido d'azoto.
L'apparecchiatura dovrà essere custodita e conservata in perfetta efficienza. Il costruttore declina ogni responsabilità (civile e penale) per qualsiasi abuso, trascuratezza nell'uso o uso improprio dell'apparecchiatura.
L'apparecchiatura dovrà essere utilizzata esclusivamente da personale autorizzato (medico e paramedico) adeguatamente addestrato.
L'apparecchiatura dovrà essere sempre presidiata quando accesa o predisposta all'avviamento, in particolare non dovrà mai essere lasciata incustodita in presenza di minori / incapaci o in genere di personale non autorizzato all'utilizzo.
Eventuale personale accompagnatore deve rimaner fuori dell'area in cui viene effettuato il trattamento e comunque sotto la responsabilità dell'operatore. Per area in cui viene effettuato il trattamento si intende lo spazio circostante il complesso odontoiatrico aumentato di 1,5 mt.
- **Qualità dell'acqua erogata dal complesso odontoiatrico.**
L'utente è responsabile della qualità dell'acqua erogata dal complesso odontoiatrico e deve adottare provvedimenti per il suo mantenimento.
Per assicurare i requisiti di qualità dell'acqua erogata, Cefla sc - Cefla Dental Group consiglia di dotare il complesso odontoiatrico di un sistema di disinfezione interno o esterno.
Il complesso odontoiatrico, una volta installato, è esposto a eventuali contaminanti provenienti dalla rete idrica, per questo si raccomanda di installarlo e metterlo in funzione solo quando comincia il suo reale utilizzo quotidiano, e di eseguire fin dal primo giorno di installazione le procedure di decontaminazione con le modalità indicate nelle istruzioni ai capitoli relativi.
Se il riunito è equipaggiato con il dispositivo per la separazione in aria dalla rete idrica (EN 1717), accertarsi che svolga anche il previsto dosaggio continuo di disinfettante controllando che il relativo serbatoio ne contenga una adeguata quantità (vedere paragrafo relativo).
- **NOTA:** contattare il proprio rivenditore o la propria Associazione Dentisti competente per informazioni sui requisiti e provvedimenti nazionali.
- **Parti applicate.**
Le parti dell'apparecchiatura che durante l'uso normale vengono necessariamente in contatto con il paziente affinché l'apparecchio svolga le proprie funzioni sono le seguenti: tappezzerie della poltrona, appoggio bracciolo, fibra ottica della lampada polimerizzante, parte terminale della siringa, protezione monouso della telecamera, punte del detartatore, frese manipoli, terminali aspirazioni cannule.
Le parti non applicate che possono venire a contatto con il paziente sono: supporto bracciolo poltrona, cofano inferiore poltrona, cofano idrico lato paziente, erogatore acqua bicchiere, bacinella, tubi aspirazione, corpo manipoli.

ATTENZIONE! Movimentazione poltrona.

Accertarsi che il paziente sia collaborativo: invitarlo ad accostare mani e piedi evitando posizioni scomposte.
Controllare che il paziente sia nella corretta postura durante le movimentazione (vedere figura).

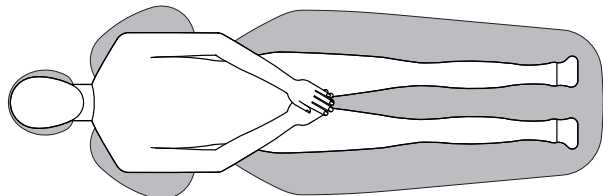

1.4. Pulizia e disinfezione

Pulire è il primo passo necessario per qualunque processo di disinfezione.

L'azione fisica di sfregare con detergenti e tensioattivi e di sciacquare con acqua rimuove un numero consistente di microrganismi. Se una superficie non è prima pulita, il processo di disinfezione non può avere successo.

Quando una superficie non può essere adeguatamente pulita, dovrebbe essere protetta con le barriere.

Le parti esterne dell'apparecchiatura devono essere pulite e disinfettate utilizzando un prodotto per uso ospedaliero con indicazioni per HIV, HBV e tubercolocida (disinfettante di livello intermedio) specifico per piccole superfici.

I diversi farmaci e prodotti chimici utilizzati nello studio odontoiatrico possono danneggiare le superfici verniciate e le parti in materiale plastico. Le prove e le ricerche effettuate hanno dimostrato che le superfici non possono essere completamente protette dall'aggressione di tutti i prodotti reperibili sul mercato. Si raccomanda quindi di utilizzare protezioni a barriera ogni qual volta possibile.

Gli effetti aggressivi dei prodotti chimici dipendono anche dal tempo di permanenza sulle superfici.

È pertanto importante non lasciare il prodotto prescelto sulle superfici dell'apparecchio oltre il tempo prescritto dal fabbricante.

Si raccomanda l'uso di un disinfettante specifico di livello intermedio, **STER 1 PLUS** (CEFLA S.C.), che è compatibile con:

- Superfici verniciate e le parti in materiale plastico.
- Tappezzerie.



ATTENZIONE!

La tappezzeria **MEMORY FOAM** si macchia con gli schizzi di acido per mordenzare. Si raccomanda, qualora ci dovessero essere degli schizzi di acido, di sciacquare subito con abbondante acqua.

- Superfici metalliche non verniciate.

Nel caso non si impieghi il prodotto **STER 1 PLUS**, si raccomanda l'uso di prodotti che contengano come massimo:

- **Etanolo al 96%**. Concentrazione: massimo 30 g. per ogni 100 g. di disinfettante.
- **1-Propanolo (n-propanolo, alcool propilico, alcool n-propilico)**. Concentrazione: massimo 20 g. per ogni 100 g. di disinfettante.
- **Combinazione di etanolo e propanolo**. Concentrazione: la combinazione dei due deve essere come massimo 40 g. per ogni 100 g. di disinfettante.



ATTENZIONE!

- Non utilizzare prodotti contenenti alcool isopropilico (2-propanolo, iso-propanolo).
- Non utilizzare prodotti contenenti ipoclorito di sodio (candeggina).
- Non utilizzare prodotti contenenti fenoli.
- Non vaporizzare il prodotto scelto direttamente sulle superfici dell'apparecchio.
- L'uso di qualsiasi prodotto deve essere fatto nel rispetto delle disposizioni date dal fabbricante.
- Non combinare il disinfettante **STER 1 PLUS** con altri prodotti.

Istruzioni per la pulizia e la disinfezione.



Per la pulizia e la disinfezione utilizzare carta monouso morbida, non abrasiva (evitare di utilizzare carta riciclata), oppure garza sterile.

Si sconsiglia l'uso di panni spugna e comunque di qualunque materiale riutilizzabile.



ATTENZIONE!

- Si raccomanda di spegnere il complesso odontoiatrico prima di eseguire le operazioni di pulizia e disinfezione delle parti esterne.
- Ciò che viene utilizzato per la pulizia e la disinfezione deve essere gettato via al termine dell'operazione.

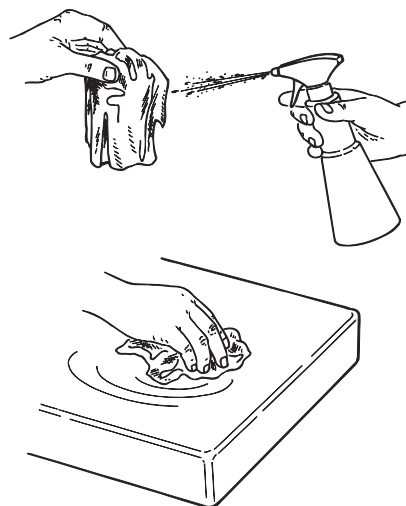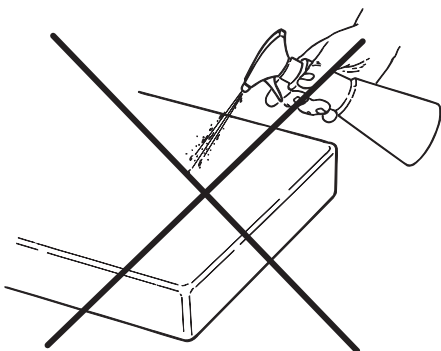

2. Descrizione degli apparecchi

2.1. Targhette di identificazione


Complessi odontoiatrici modello:

A7 Plus CONTINENTAL, A7 Plus INTERNATIONAL.

La targhetta si trova sul braccio di collegamento tra poltrona e gruppo idrico.

Dati riportati sulla targhetta:

- Nome del costruttore.
- Nome dell'apparecchiatura.
- Tensione nominale.
- Tipo di corrente.
- Frequenza nominale.
- Potenza massima assorbita.
- Numero di serie.
- Mese e anno di fabbricazione

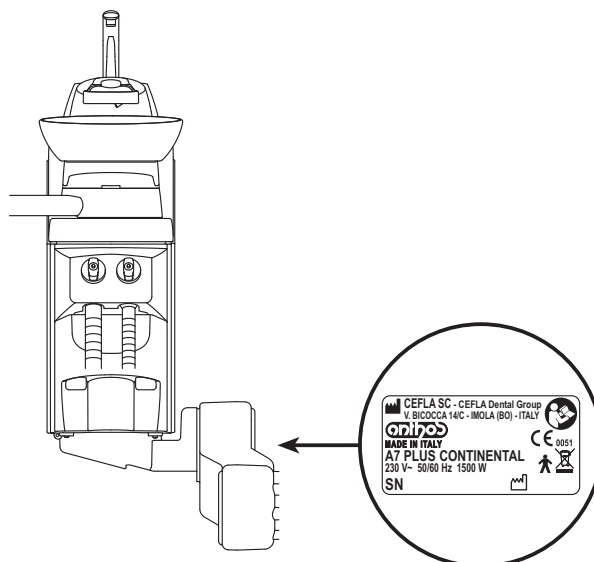

2.2. Riuniti


I complessi odontoiatrici serie **A7 Plus** sono previsti nei seguenti modelli:

Modello A7 Plus CONTINENTAL.

Tavoletta medico in versione CONTINENTAL (gli strumenti sono recuperati mediante un sistema di braccetti a molla) applicata su doppio braccio di cui uno articolato ed autobilanciato.

Descrizione delle varie parti:

- a Gruppo idrico.
- b Braccio orientabile.
- c Tavoletta medico.
- d Consolle comandi medico.
- e Tavoletta porta tray.
- f Tavoletta assistente.
- g Consolle di comando tavoletta assistente.
- h Contenitore allacciamenti.
- i Comando a piede multifunzionale.
- l Erogatore acqua al bicchiere.
- m Bacinella.
- n Braccio autobilanciato.
- q Tavoletta porta tray su tavoletta assistente (optional).
- z Poltrona dentistica ANTHOS A2.7.

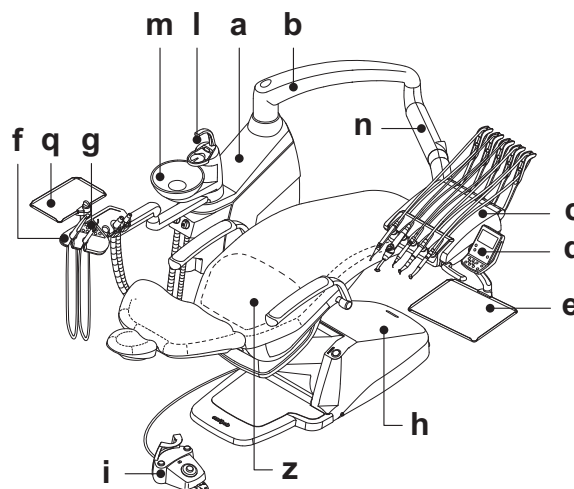


Modello A7 Plus INTERNATIONAL.

Tavoletta medico versione INTERNATIONAL (gli strumenti sono inseriti verticalmente in apposite sedi) applicata su doppio braccio di cui uno articolato ed autobilanciato.

Descrizione delle varie parti:


- a Gruppo idrico.
- b Braccio orientabile.
- c Tavoletta medico.
- d Consolle comandi medico.
- e Tavoletta porta tray (optional).
- f Tavoletta assistente.
- g Consolle di comando tavoletta assistente.
- h Contenitore allacciamenti.
- i Comando a piede multifunzionale.
- l Erogatore acqua al bicchiere.
- m Bacinella.
- n Braccio autobilanciato.
- q Tavoletta porta tray su tavoletta assistente (optional).
- z Poltrona dentistica ANTHOS A2.7.

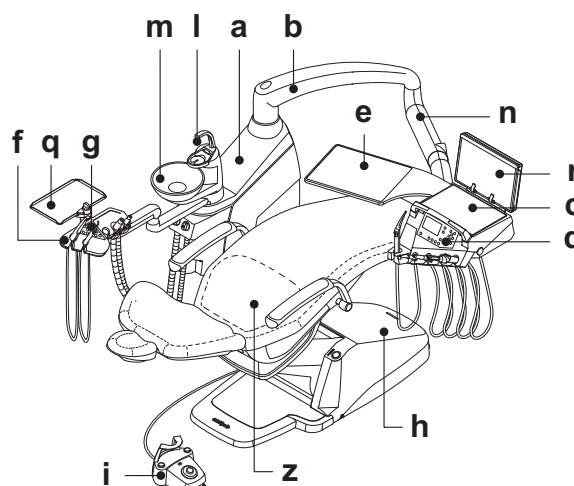

2.3. Poltrona dentistica

Descrizione delle varie parti.

- a Poggiatesta.
- b Schienale
- c Bracciolo fisso.
- d Bracciolo mobile (optional).
- e Pedana di sicurezza.

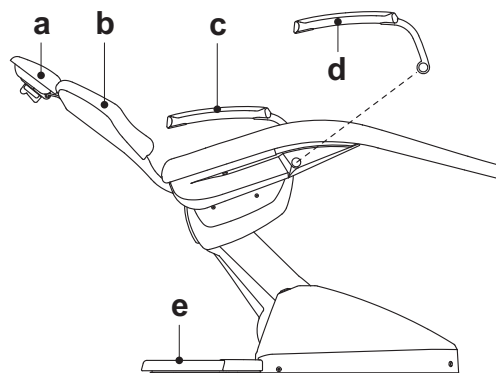

Tempi di funzionamento.

I tempi di funzionamento e riposo prescritti sono i seguenti:
lavoro 25 sec. - riposo 10 min.

Carico massimo ammesso.

Il carico massimo ammesso sulla poltrona è di 190 Kg.



ATTENZIONE!


Questo valore non deve essere superato.

Avvertenze di utilizzo.



ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO PIEDE.

Prestare attenzione a paziente e personale dello studio durante la discesa della poltrona.

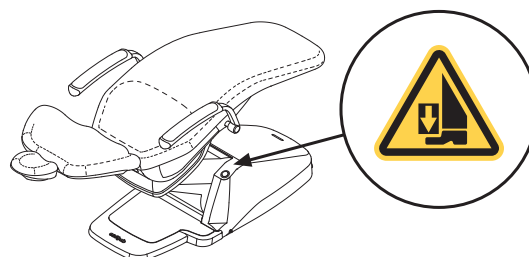

3. Accensione unità operatoria

Complessi odontoiatrici modello:

A7 Plus CONTINENTAL,
A7 Plus INTERNATIONAL.



Premere l'interruttore generale (f1) posto sul cofano poltrona e verificare sulla consolle di comando:

- **Display (g) illuminato:**
 - apparecchiatura accesa;
 - impianto elettrico alimentato;
 - impianto idrico e pneumatico collegato.
- **Display (g) spento:**
 - apparecchiatura spenta;
 - impianto elettrico non alimentato;
 - impianto idrico e pneumatico non collegato.



ATTENZIONE!

L'interruttore generale deve essere premuto con le mani.

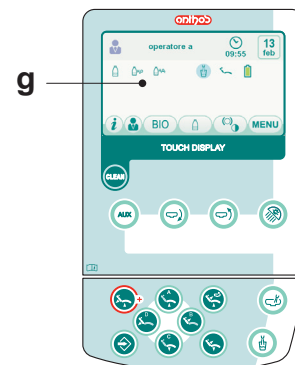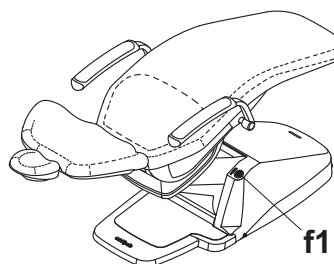

4. Funzionamento poltrona dentistica

La poltrona esegue i seguenti movimenti:

- Salita/discesa del sedile
- Salita/discesa dello schienale con inclinazione del sedile (Trendelenburg compensato)


La poltrona può essere comandata dai seguenti punti:

- Tavolettina medico (**a**) (vedi par. 5.).
- Comando a piede multifunzione (**b**) (vedi par. 5.2.).
- Tavolettina assistente (**c**) (vedi par. 6.).

Blocco movimenti poltrona.

Con gli strumenti a riposo, è possibile disabilitare i movimenti della poltrona (vedi paragrafo 5.1.1.2.5.).


L'avvenuta disabilitazione viene evidenziata sul display consolle dall'apposita icona (**A**).

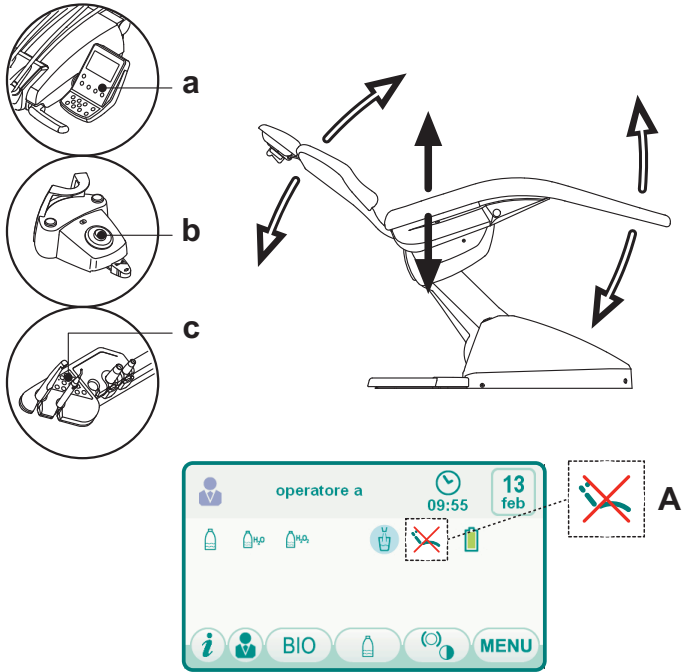

4.1. Dispositivi di sicurezza

Complessi odontoiatrici serie A7 Plus.

- La pedana della poltrona è dotata di un dispositivo (**l**) che, in presenza di un ostacolo, blocca immediatamente il movimento di discesa della poltrona ed esegue un movimento automatico di risalita per liberare l'ostacolo.
- Lo schienale della poltrona è dotato di un dispositivo (**m**) che, in presenza di un ostacolo, blocca immediatamente il movimento di discesa dello schienale ed esegue un movimento automatico di risalita per liberare l'ostacolo.
- I bracci della tavoletta assistente sono dotati di un dispositivo di sicurezza (**n**) che, in presenza di un ostacolo, blocca immediatamente il movimento di discesa della poltrona ed esegue un movimento automatico di risalita per liberare l'ostacolo.

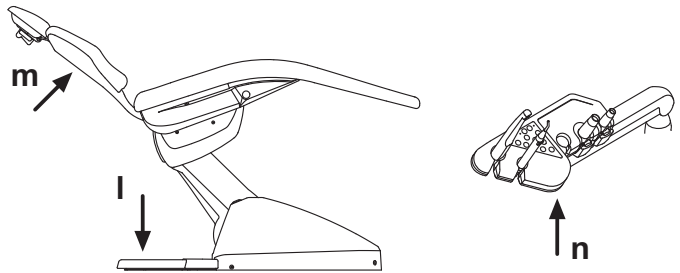


4.2. Dispositivi di emergenza



ATTENZIONE!

Nel caso si debba bloccare il movimento dell'apparecchiatura agire sui seguenti dispositivi:

- **Pulsanti di movimentazioni poltrona (a) o (c).**
Azionando un qualsiasi pulsante di movimentazione poltrona ogni tipo di movimento dell'apparecchiatura verrà bloccato.
- **Comando a piede (b).**
Azionando il comando a piede ogni tipo di movimento dell'apparecchiatura verrà bloccato.
- **Pedana della poltrona (i).**
Azionando la pedana della poltrona: ogni tipo di movimento dell'apparecchiatura verrà bloccato.

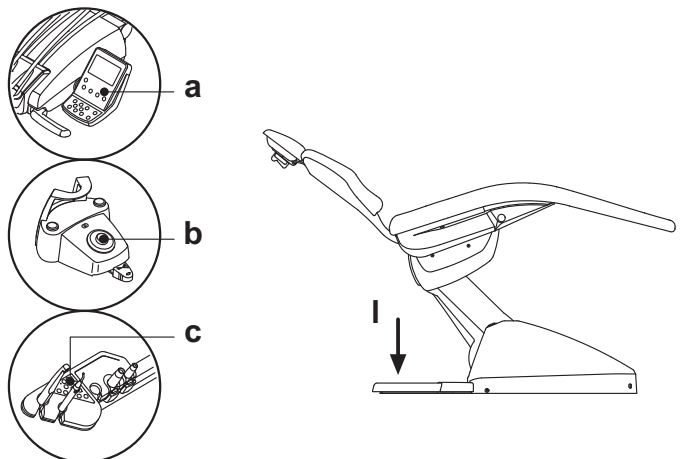

4.3. Appoggiatesta regolabile

L'appoggiatesta può essere di 2 tipi:


- ① con bloccaggio cuscino di tipo manuale
- ② con bloccaggio cuscino di tipo pneumatico

Regolazione altezza poggiatesta.

- con bloccaggio di tipo manuale (1): Il posizionamento dell'asta del poggiatesta è ottenuto per mezzo di una frizione magnetica. L'operatore deve sollevare e/o spingere in basso il poggiatesta fino al raggiungimento della posizione desiderata.
- con bloccaggio di tipo pneumatico (2): Agire sul pulsante di blocco (u) e, mantenendolo premuto, posizionare il poggiatesta come desiderato. Una volta trovato la posizione corretta è sufficiente rilasciare il pulsante (u) per bloccare nuovamente il poggiatesta.

Regolazione orientamento del cuscino.

- con bloccaggio di tipo manuale (1): Ruotare in senso antiorario il pomello di blocco (k), posizionare il cuscino come desiderato e poi avvitare nuovamente il pomello di blocco.
- con bloccaggio di tipo pneumatico (2): Agire sul pulsante di blocco (u) e, mantenendolo premuto, posizionare il cuscino come desiderato. Una volta trovato la posizione corretta è sufficiente rilasciare il pulsante (u) per bloccare nuovamente il cuscino.

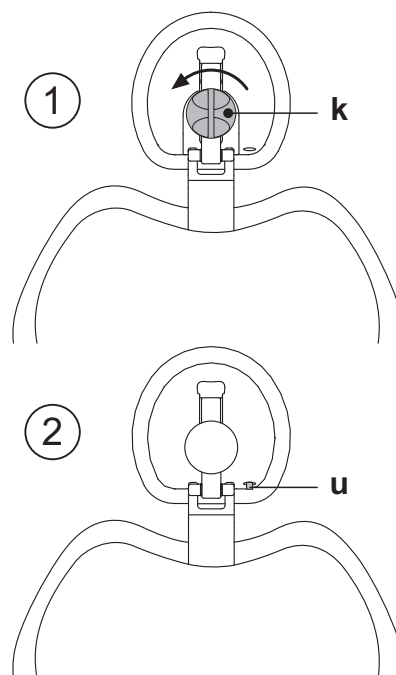

Corretto posizionamento del poggiatesta.



ATTENZIONE!


Per un corretto utilizzo del poggiatesta posizionare la testa del paziente come da figura.

Avvertenze di utilizzo.



ATTENZIONE!

- Carico massimo applicabile sull'appoggiatesta: 30 Kg.
- Non effettuare movimenti dell'appoggiatesta con il paziente appoggiato.
- Non modificare l'orientamento del cuscino senza aver disattivato il dispositivo di bloccaggio.
- Il dispositivo di bloccaggio di tipo pneumatico è attivo solo quando il circuito dell'aria è in pressione con complesso odontoiatrico acceso.

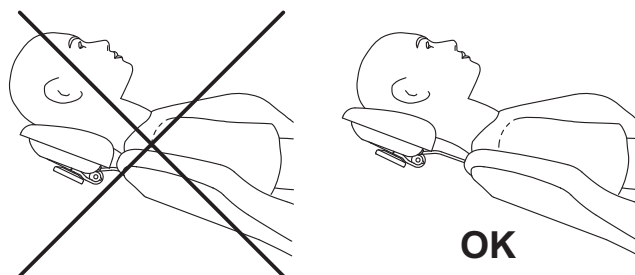

4.4. Bracciolo mobile (Optional)

Ribaltamento del bracciolo mobile.

Ruotare in senso orario il bracciolo mobile fino a portarlo verso il basso onde facilitare l'accesso e l'uscita del paziente.


Rimozione del bracciolo mobile.

Portare il bracciolo in posizione verticale e sfilarlo dal sedile.



ATTENZIONE!

Carico massimo applicabile sul bracciolo della poltrona: 68 Kg.

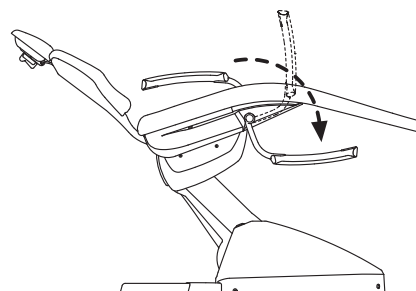

5. Funzionamento tavoletta medico

Disposizione degli strumenti.

La disposizione degli strumenti sulla tavoletta è definita dal cliente in fase di ordine.

Attivazione degli strumenti.

- La siringa è sempre attiva (vedere paragrafo 5.3.).
- La lampada polimerizzante si attiva con l'apposito tasto a strumento estratto (vedere paragrafo 5.7.).
- La telecamera endorale si attiva a strumento estratto (vedere paragrafo 5.8.).
- Il sensore integrato ZEN-Xi, se collegato a PC esterno, è sempre attivo (vedere paragrafo 5.9.).
- Tutti gli altri strumenti, una volta estratti, vengono azionati tramite il comando a piede (vedere paragrafo 5.2.).

Interdipendenza degli strumenti.

L'uso simultaneo degli strumenti è impedito da un dispositivo di interdipendenza.

Il primo strumento estratto è operativo mentre quelli estratti successivamente sono disattivati dal dispositivo di interdipendenza.

Il dispositivo di interdipendenza permette di sostituire la fresa su uno strumento mentre un altro viene impiegato sul paziente.


Posizionamento della tavoletta medico.

La tavoletta medico è mobile in tutte le direzioni.

Per regolare l'altezza della tavoletta e/o il suo orientamento sul piano orizzontale è sufficiente impugnare la maniglia (**a**).

NOTA versione CONTINENTAL: per sbloccare il freno pneumatico del braccio a pantografo occorre impugnare la maniglia appoggiando il pollice sul punto (**A**).

NOTA versione INTERNATIONAL: per regolare l'altezza è necessario prima premere l'apposito pulsante di sblocco (vedere paragrafo 5.1.).

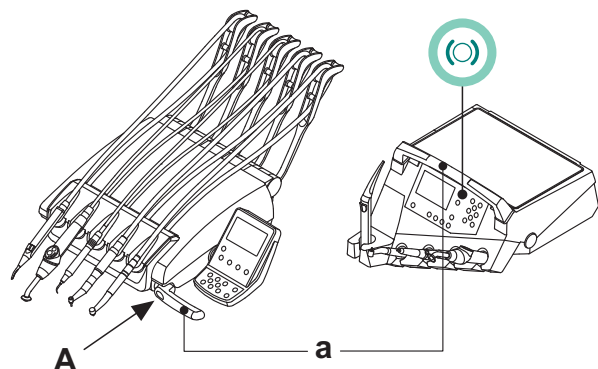


Dispositivo di arresto braccetti richiamo strumenti (solo tavolette versione CONTINENTAL).

Qualora sia previsto tale dispositivo è possibile bloccare il braccetto di richiamo strumento nella posizione di strumento estratto.

L'inserimento del dispositivo è evidenziato da uno scatto meccanico che avviene a circa 2/3 della corsa totale del braccetto.

Per ripristinare la condizione originaria è sufficiente portare il braccetto a fine corsa (**B**).

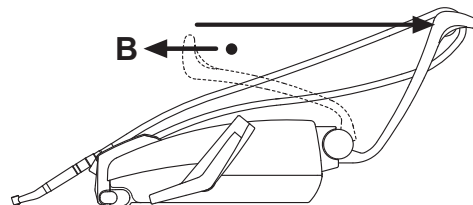

Vassoio portatray per tavoletta versione CONTINENTAL.

Il vassoio portatray (**f**) è in acciaio inox e può essere agevolmente tolto dal relativo supporto.


ATTENZIONE!

Carico massimo ammesso sul vassoio portatray (**f**): 2 Kg distribuito.

Vassoio portatray per tavoletta versione INTERNATIONAL.

ATTENZIONE!


Carico massimo ammesso sul vassoio portatray (**e**): 2 Kg distribuito.

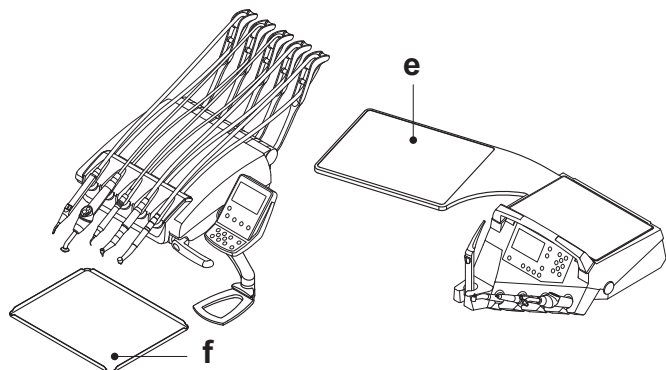

Pulizia tavoletta medico.

Pulire la tavoletta medico utilizzando un prodotto idoneo (vedere paragrafo 1.4).

NOTA per tavolette versione CONTINENTAL: il supporto strumenti (*x*) è asportabile per agevolare le operazioni di pulizia, per toglierlo è sufficiente estrarlo dalla sua sede perchè fissato tramite magneti. Il supporto strumenti (*u*) in silicone è anche sterilizzabile in autoclave a 121° (ciclo gomma).

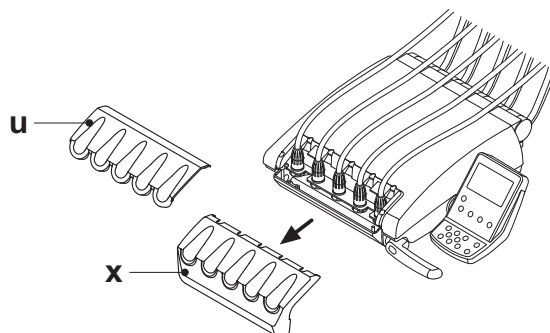

Cordoni strumento removibili.

Tutti gli strumenti sono dotati di cordoni removibili per agevolare la loro pulizia.

NOTA per tavolette versione CONTINENTAL: per togliere i cordoni occorre prima togliere il supporto degli strumenti e poi svitare le relative ghiera di fissaggio in plastica.

NOTA per tavolette versione INTERNATIONAL: per togliere i cordoni è sufficiente svitare le relative ghiera di fissaggio in plastica poste inferiormente alla tavoletta.


ATTENZIONE!

- Spegnere l'unità operatoria prima di eseguire l'operazione di rimozione dei cordoni strumento.
- Dopo avere spento l'unità operatoria, svuotare le condotte della siringa premendo i relativi pulsanti aria e acqua direttamente sulla bacinella fino al termine della fuoriuscita di acqua spray.
- I cordoni degli strumenti TURBINA, MICROMOTORE e DETARTARATORE contengono acqua, di conseguenza si consiglia di eseguire l'operazione di smontaggio del cordone tenendo l'estremità lato manipolo posizionata sulla bacinella.
- Quando si rimonta un cordone occorre assicurarsi che i contatti elettrici siano asciutti e che la ghiera di fissaggio in plastica sia stretta bene.
- Ogni cordone deve essere rimontato solo ed esclusivamente nella sede dello strumento corrispondente.

Pulire il cordone strumento utilizzando un prodotto idoneo (vedere paragrafo 1.4).

ATTENZIONE!

I cordoni degli strumenti **NON** sono idonei ad essere messi in autoclave o ad essere sterilizzati a freddo per immersione.

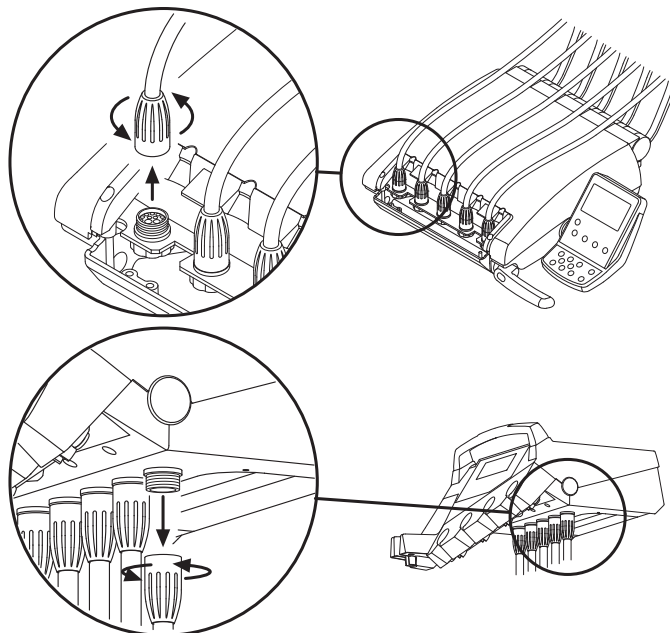

5.1. Consolle medico

I complessi odontoiatrici serie A7 Plus dispongono di una consolle medico "ibrida" SMART TOUCH composta da pulsantiera con tasti a membrana e display touch-screen resistivo. Display TFT a colori da 4,3 pollici "Wide", retroilluminato a LED, risoluzione 480x272 pixel e immagine a 262K colori.


- 1 Pulsantiera per i seguenti modelli:
A7 Plus CONTINENTAL
- 2 Pulsantiera per i seguenti modelli:
A7 Plus INTERNATIONAL

Descrizione pulsanti:

- Pulsante sblocco freno tavoletta medico (modelli INTERNATIONAL)
- Pulsante blocco schermo SMART TOUCH
- Pulsante di accensione/spengimento lampada operatoria.
- Pulsante comando di erogazione acqua al bicchiere.
- Pulsante per funzioni ausiliarie (libero).
- Pulsante comando movimentazione bacinella in senso antiorario. (attivo solo con bacinella motorizzata)
- Pulsante comando movimentazione bacinella in senso orario. (attivo solo con bacinella motorizzata)
- Pulsante comando erogazione acqua alla bacinella.
- Pulsante memorizzazione posizioni della poltrona.
- Pulsante richiamo posizione di emergenza.
- Pulsante richiamo posizione di azzeramento.
- Pulsante richiamo posizione risciacquo.
- Pulsante salita sedile e richiamo posizione programmata A.
- Pulsante salita schienale e richiamo posizione programmata B.
- Pulsante discesa sedile e richiamo posizione programmata C.
- Pulsante discesa schienale e richiamo posizione programmata D.



1

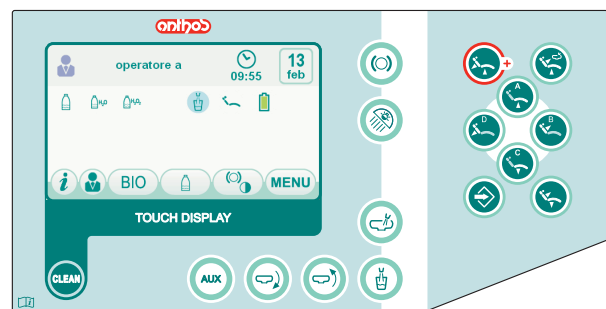


2



NOTA: funzionamento dei pulsanti di movimentazione poltrona:

- Breve pressione: attivazione movimento automatico di richiamo della posizione programmata.
- Pressione prolungata: attivazione movimento di posizionamento manuale.

Icone di segnalazione.

Toccando il tasto icona  sul touch display è possibile in ogni momento visualizzare delle icone di segnalazione che mostrano lo stato di funzionamento del complesso odontoiatrico.

Le icone di segnalazione visibili sono le seguenti:

WHE

Sistema W.H.E. in funzione.



Alimentazione con acqua distillata attiva.



Alimentazione con acqua di rete attiva.



Pompa peristaltica inserita con quantità di soluzione fisiologica erogata pari a 1.



Serbatoio acqua distillata in riserva.



Serbatoio liquido disinfettante condotte in riserva.



Ciclo BIOSTER in corso



Lavaggio cannule in corso.



Aspirazione interrotta per vaso pieno.



Colore verde: batteria comando a piede wireless carica.



Colore arancio: batteria comando a piede wireless carica al 50%.



Colore rosso: batteria comando a piede wireless scarica.



Colore verde: comando a piede wireless collegato e attivo.



Colore arancio: comando a piede wireless collegato ma non attivo.



Colore rosso: ricerca di collegamento con comando a piede wireless.



Freno braccio a pantografo bloccato.



Colore azzurro: acqua al bicchiere FREDDA.



Colore arancio: acqua al bicchiere TIEPIDA.



Colore rosso: acqua al bicchiere CALDA.



Posizione poltrona programma automatico A.



Posizione poltrona programma automatico B.



Posizione poltrona programma automatico C.



Posizione poltrona programma automatico D.



Movimenti poltrona bloccati.



Posizione poltrona programma automatico risciacquo.



Posizione poltrona programma automatico di azzeramento.




Posizione poltrona programma automatico di emergenza.



Memorizzazione poltrona attivata.



Posizione poltrona impostata manualmente.

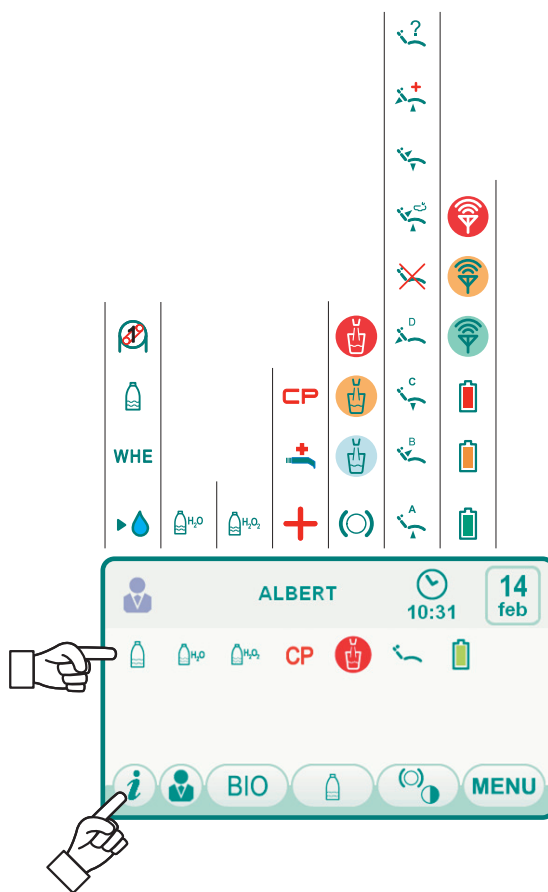

5.1.1. Interfaccia utente

All'accensione, il complesso odontoiatrico esegue un breve ciclo di autodiagnosi che termina quando sul display compare la videata principale riportante il nome dell'ultimo operatore impostato.

Da questo momento è possibile variare alcune impostazioni dell'unità operatoria utilizzando un semplice sistema di menu (vedi schema a lato).

Comandi di navigazione.

- Per entrare nei menu di impostazione toccare il tasto icona **MENU**.
- Per entrare nei vari sottomenu è sufficiente toccare il relativo tasto icona.
- All'interno di un menu, per variare una impostazione è sufficiente toccare il relativo tasto icona.
- All'interno di un menu, per variare un valore numerico impostabile è sufficiente toccare i tasti icona **-** o **+**.
- Per uscire da un menu è sufficiente toccare il tasto icona **ESC**.

Struttura del menu di interfaccia utente.

Il menu di interfaccia utente è strutturato come da schema a lato ed è composto dai seguenti menu:

- 5.1.1.1. Selezione operatore.
- 5.1.1.2. IMPOSTAZIONI GENERALI.
 - 5.1.1.2.1. IMPOSTAZIONE SISTEMI DI IGIENE.
 - 5.1.1.2.1.1. Impostazione ciclo di disinfezione BIOSTER.
 - 5.1.1.2.1.2. Impostazione ciclo FLUSHING.
 - 5.1.1.2.1.3. Svuotamento serbatoio sistema W.H.E.
 - 5.1.1.2.2. IMPOSTAZIONI GRUPPO IDRICO.
 - 5.1.1.2.2.1. Impostazione erogazione acqua alla bacinella.
 - 5.1.1.2.2.2. Impostazione erogazione acqua al bicchiere.
 - 5.1.1.2.2.3. Gestione movimentazioni bacinella.
 - 5.1.1.2.3. IMPOSTAZIONE COMANDO A PIEDE.
 - 5.1.1.2.4. IMPOSTAZIONE LAMPADA OPERATORIA.
- 5.1.1.2.5. ALTRE IMPOSTAZIONI.
- 5.1.1.2.6. REGOLAZIONE ORA E DATA.
- 5.1.1.2.7. CRONOMETRO.
- 5.1.1.2.8. PERSONALIZZAZIONE PULSANTI PREFERITI.
- 5.1.1.2.9. INSERIMENTO ANAGRAFICA OPERATORE.
- 5.1.1.2.10. SELEZIONE LINGUA.
- 5.1.1.2.11. IMPOSTAZIONE APEX LOCATOR.

Messaggi di errore.

Durante il ciclo iniziale di autodiagnosi, il complesso odontoiatrico potrebbe rilevare dei malfunzionamenti nell'impiantistica interna.



In tal caso sul display viene mostrato un messaggio di errore (vedere paragrafo 10.) che resta visibile sino a che l'operatore non tocca il TOUCH DISPLAY.

Se il malfunzionamento non è pericoloso il complesso odontoiatrico rimane comunque funzionante.

Condizione di stand-by.

Dopo 10 minuti circa di inutilizzo il complesso odontoiatrico entra in uno stato di risparmio energetico (stand-by); tale stato viene evidenziato dalla comparsa del logo ANTHOS sul display consolle.

L'esecuzione di una qualsiasi operazione riporta l'apparecchiatura nella condizione operativa.

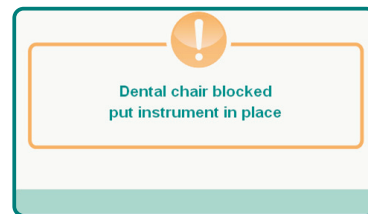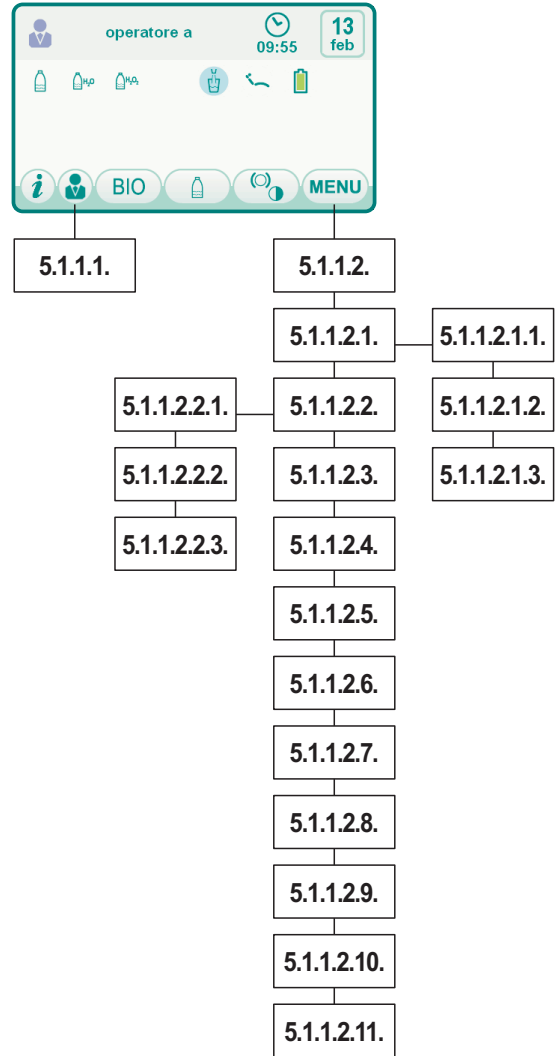

5.1.1.1. Selezione operatore

La consolle SMART TOUCH dei complessi odontoiatrici serie A7 Plus consente di gestire 3 diversi operatori.

I dati impostabili per ogni operatore sono i seguenti:

- Nome dell'operatore.
- Regolazione della potenza della turbina e del detartatore.
- 3 modalità operative per il micromotore elettrico.
- 4 modalità operative per il detartatore.
- Accensione e regolazione delle fibre ottiche di ogni strumento.
- Controllo incrementale o ON/OFF della potenza della turbina e del detartatore.
- I programmi automatici di movimentazione della poltrona.
- I parametri di configurazione dell'idrico.

Selezione dell'operatore.

Dalla videata principale toccare ripetutamente il tasto icona fino al raggiungimento dell'operatore desiderato.

NOTA: la variazione dell'operatore avviene in maniera ciclica.




5.1.1.2. Impostazioni generali

Dalla videata principale eseguire le seguenti operazioni:

- Toccare il tasto icona per entrare nel menu IMPOSTAZIONI GENERALI dove sono presenti i seguenti tasti icona:

- IMPOSTAZIONI SISTEMI DI IGIENE
(solo se si dispone di almeno un sistema di igiene)
- IMPOSTAZIONI GRUPPO IDRICO
- IMPOSTAZIONE COMANDO A PIEDE
- IMPOSTAZIONE LAMPADA OPERATORIA
- ALTRE IMPOSTAZIONI
- REGOLAZIONE ORA E DATA
- CRONOMETRO
- PERSONALIZZAZIONE PULSANTI PREFERITI
- INSERIMENTO ANAGRAFICA OPERATORE
- SELEZIONE LINGUA
- IMPOSTAZIONI APEX LOCATOR
(solo se presente l'APEX LOCATOR)
- Accesso al menu di servizio
(solo per Assistenza Tecnica)

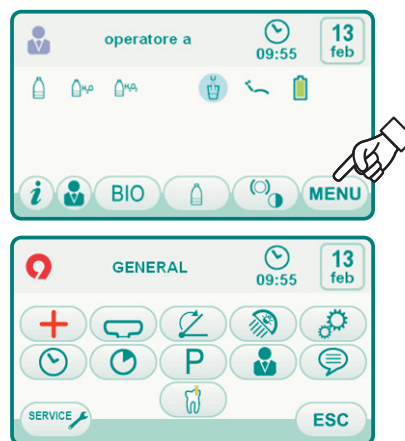

5.1.1.2.1. Impostazioni sistemi di igiene

NOTA: menu disponibile solo se presente almeno un sistema di igiene.

Dal menu IMPOSTAZIONI GENERALI toccare il tasto icona per entrare nel sottomenu IMPOSTAZIONI SISTEMI DI IGIENE dove sono presenti i seguenti tasti icona:

BIO



Impostazione ciclo di disinfezione BIOSTER (solo se presente il sistema BIOSTER)

FLU

Impostazione ciclo FLUSHING (solo se presente il sistema FLUSHING)

WHE

Svuotamento serbatoio sistema W.H.E. (solo se presente il sistema W.H.E.)

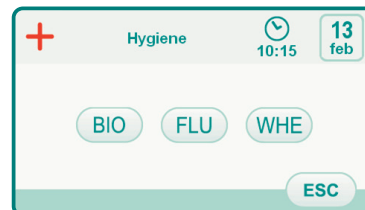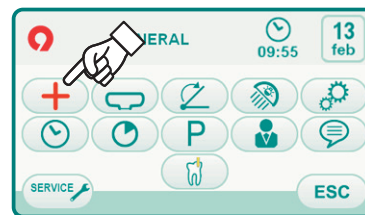

5.1.1.2.1.1. Impostazione ciclo di disinfezione BIOSTER

Questa impostazione è unica per tutti gli operatori.

Dal menu IMPOSTAZIONI SISTEMI DI IGIENE eseguire le seguenti operazioni:

- Toccare il tasto icona per entrare nel sottomenu "Impostazione ciclo di disinfezione BIOSTER".

NOTA: è possibile accedere a questo sottomenu anche premendo per almeno 2 secondi il pulsante **BIO** posto sulla tavoletta assistente.

NOTA: Non è possibile accedere a questo sottomenu se il serbatoio del liquido disinfettante è in riserva (vedi paragrafo 7.4.), se è presente uno strumento estratto o se il sistema W.H.E. si trova in uno stato di errore. Un segnale acustico (BEEP) segnerà l'impossibilità di accedere al sottomenu.

- Impostare il tempo di permanenza del liquido disinfettante toccando i tasti icona o .

NOTA: il tempo impostabile varia da un minimo di 5 minuti ad un massimo di 30 minuti con intervalli di 30 secondi.

ATTENZIONE!

Tempo di permanenza consigliato con PEROXY Ag+: 10 minuti.
Tempo di permanenza consigliato con acqua ossigenata 3% (10 volumi): 10 minuti.

E' assolutamente sconsigliato lasciare permanere entro le condotte l'acqua ossigenata per un tempo di contatto superiore ai 30 minuti.

- Estrarre gli strumenti che si desidera trattare (la corrispondente icona verrà visualizzata sul display):

S1: siringa su tavoletta medico.

A: strumento in posizione A

B: strumento in posizione B

C: strumento in posizione C

D: strumento in posizione D

S2: siringa su tavoletta assistente.

F: strumento su tavoletta assistente.

CA: cannule di aspirazione.




BC: condotta acqua bicchiere.

NOTA: premendo il pulsante **EROGAZIONE ACQUA AL BICCHIERE** è possibile selezionare/deselezionare la disinfezione della condotta acqua bicchiere.

NOTA: se si dispone del sistema di lavaggio delle cannule di aspirazione, è possibile selezionare il lavaggio di quest'ultime semplicemente inserendole negli appositi attacchi (vedi paragrafo 7.5.).

- Per avviare il ciclo di disinfezione toccare il tasto icona (vedere paragrafo 7.4.).

NOTA: il ciclo di disinfezione può essere avviato anche tramite una breve pressione del pulsante **BIO** posto sulla tavoletta assistente.

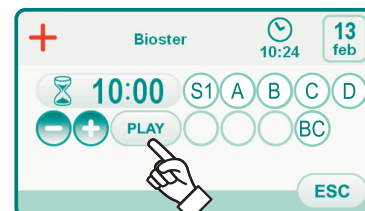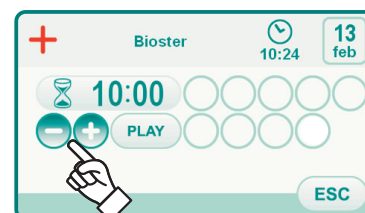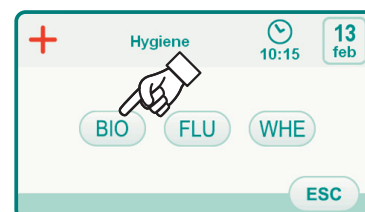

5.1.1.2.1.2. Impostazione ciclo Flushing

Questa impostazione è unica per tutti gli operatori.
Dal menu IMPOSTAZIONI SISTEMI DI IGIENE eseguire le seguenti operazioni:

- Toccare il tasto icona **FLU** per entrare nel sottomenu "Impostazione ciclo FLUSHING".

NOTA: non è possibile accedere a questo sottomenu se il serbatoio dell'acqua distillata è in riserva (vedi paragrafo 7.2.). Un messaggio sul display console abbinato ad un segnale acustico (BEEP) segneranno l'impossibilità di accedere al sottomenu.

- Impostare il tempo di durata del lavaggio toccando i tasti icona **-** o **+**.

NOTA: il tempo impostabile varia da un minimo di 1 minuto ad un massimo di 5 minuti con intervalli di 1 minuto.

NOTA: con il serbatoio dell'acqua distillata si consiglia di non impostare un tempo superiore ai 2 minuti.

- Estrarre gli strumenti che si desidera trattare (la corrispondente icona verrà visualizzata sul display):

S1: siringa su tavoletta medico.

A: strumento in posizione A

B: strumento in posizione B

C: strumento in posizione C




D: strumento in posizione D

S2: siringa su tavoletta assistente.

F: strumento su tavoletta assistente.

NOTA: il ciclo FLUSHING non parte se non è selezionato almeno uno strumento.

- Per avviare il ciclo FLUSHING toccare il tasto icona **PLAY** (vedere paragrafo 7.6.).

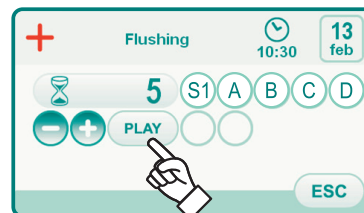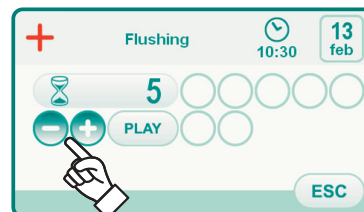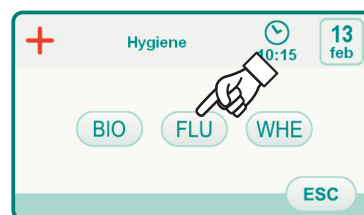

5.1.1.2.1.3. Svuotamento serbatoio sistema W.H.E.

Questa funzione permette di svuotare il circuito idrico del sistema W.H.E. (vedi paragrafo 7.3.) qualora il complesso odontoiatrico debba rimanere spento per molti giorni o qualora si desiderasse svuotare l'acqua presente nel sistema stesso.




Dal menu IMPOSTAZIONI SISTEMI DI IGIENE eseguire le seguenti operazioni:

- Toccare il tasto icona **WHE** per entrare nel sottomenu "Svuotamento serbatoio sistema WHE".
- Inserire sotto la fontanella bicchiere l'apposito bicchiere (**e**) dato in dotazione.
- Toccare il tasto icona **PLAY** per avviare il ciclo di svuotamento.

NOTA: il ciclo di svuotamento non si avvia se è attivo il sistema

S.H.S. o se il sistema W.H.E. si trova in uno stato di errore.

- Una volta terminato il ciclo di svuotamento è possibile spegnere il complesso odontoiatrico o per ripristinare il sistema qualora si volesse tornare a lavorare.

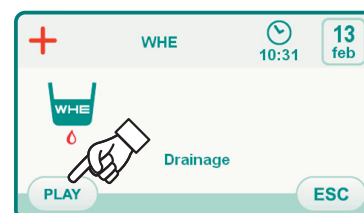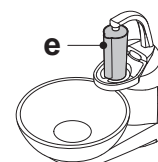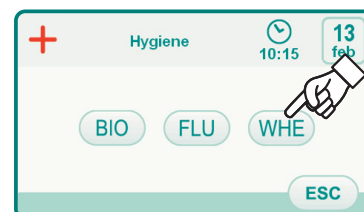

5.1.1.2.2. Impostazioni gruppo idrico

Dal menu IMPOSTAZIONI GENERALI toccare il tasto icona per entrare nel sottomenu IMPOSTAZIONI GRUPPO IDRICO dove sono presenti presenti i seguenti tasti icona:




Impostazione acqua alla bacinella



Impostazione acqua al bicchiere



Impostazione movimentazioni automatiche bacinella
(solo con bacinella motorizzata)

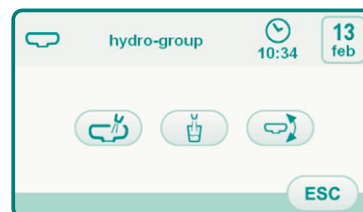

5.1.1.2.2.1. Impostazione acqua alla bacinella

Dal menu IMPOSTAZIONI GRUPPO IDRICO toccare il tasto icona per entrare nel sottomenu "Impostazione acqua alla bacinella" dove sono presenti presenti i seguenti tasti icona:



Automatismo lavaggio bacinella
con chiamata posizione di risciacquo per la poltrona



Automatismo lavaggio bacinella
con chiamata posizione di azzeramento per la poltrona



Automatismo lavaggio bacinella
con ritorno da posizione di risciacquo per la poltrona




Automatismo lavaggio bacinella
con chiamata bicchiere



Impostazione lavaggio bacinella temporizzato o con funzionamento
ON/OFF



Tempo di lavaggio bacinella
(espresso in secondi)

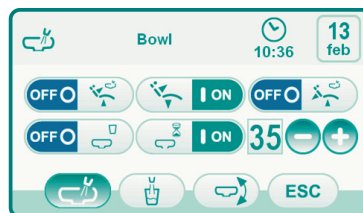

- Per selezionare/deselezionare una funzione toccare il relativo tasto icona.
- Per modificare il tempo di lavaggio della bacinella toccare i tasti icona o .
- Per confermare le impostazioni scelte è sufficiente uscire da questo sottomenu toccando il tasto icona .

5.1.1.2.2.2. Impostazione acqua al bicchiere


Dal menu IMPOSTAZIONI GRUPPO IDRICO toccare il tasto icona per entrare nel sottomenu "Impostazione acqua al bicchiere" dove sono presenti i seguenti tasti icona:

- Selezione acqua FREDDA al bicchiere
- Selezione acqua TIEPIDA al bicchiere
- Selezione acqua CALDA al bicchiere
- 5** Tempo di erogazione acqua al bicchiere (espresso in secondi)
- Automatismo erogazione acqua al bicchiere con chiamata posizione di risciacquo.
- Attivazione/disattivazione sensore presenza bicchiere
- Automatismo depressurizzazione serbatoio acqua distillata con chiamata posizione di azzeramento poltrona

- Per selezionare/deselezionare una funzione toccare il relativo tasto icona.
- Per modificare il tempo di erogazione acqua al bicchiere toccare i tasti icona o .

NOTA: il tempo di riempimento del bicchiere è impostabile da un minimo di 1 secondo ad un massimo di 10 secondi con intervalli di 0,1 secondo.

- Per confermare le impostazioni scelte è sufficiente uscire da questo sottomenu toccando il tasto icona .

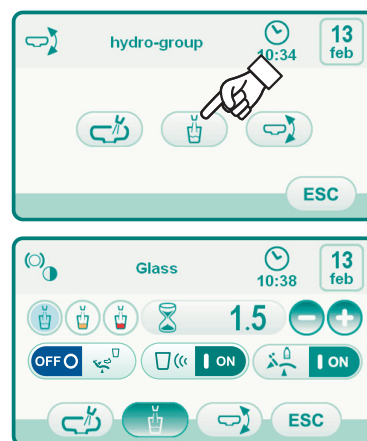

5.1.1.2.2.3. Impostazione movimentazioni automatiche bacinella

Dal menu IMPOSTAZIONI GRUPPO IDRICO toccare il tasto icona per entrare nel sottomenu "Impostazione movimentazioni automatiche bacinella" dove sono presenti i seguenti tasti icona:

- Automatismo rotazione bacinella con chiamata posizione di risciacquo per la poltrona
- Automatismo rotazione bacinella con chiamata posizione di azzeramento per la poltrona
- Automatismo rotazione bacinella con chiamata programma automatico poltrona

- Per selezionare/deselezionare una funzione toccare il relativo tasto icona.
- Per confermare le impostazioni scelte è sufficiente uscire da questo sottomenu toccando il tasto icona .



5.1.1.2.3. Impostazione comando a piede

Dal menu IMPOSTAZIONI GENERALI toccare il tasto icona per entrare nel sottomenu IMPOSTAZIONE COMANDO A PIEDE dove sono presenti le seguenti icone:

- Icona segnalazione collegamento via cavo (solo con comando a piede wireless)
- Icona segnalazione stato del collegamento wireless (solo con comando a piede wireless)
- Percentuale di carica della batteria (solo con comando a piede wireless)
- Impostazione funzionamento joystick comando a piede con strumento estratto

NOTA: le prime 3 icone sono di sola segnalazione mentre la quarta permette di selezionare/deselezionare il tipo di funzionamento del joystick superiore del comando a piede.

Questa impostazione è unica per tutti gli operatori.



- Per selezionare/deselezionare il tipo di funzionamento del joystick comando a piede è sufficiente toccare il relativo tasto icona :

Il joystick aziona i movimenti manuali poltrona (default).

Il joystick comanda le seguenti funzioni:

- ➔ comando ON/OFF inversione senso di rotazione del micromotore, attivazione funzione ENDO del detartatore, attivazione funzione MIRROR della telecamera.
- ➔ comando ON/OFF attivazione pompa peristaltica.
- ➔ comando ON/OFF accensione lampada operatoria.
- ➔ cambio memoria strumento.

- Per confermare le impostazioni scelte è sufficiente uscire da questo sottomenu toccando il tasto icona .

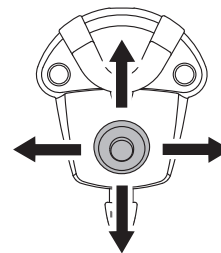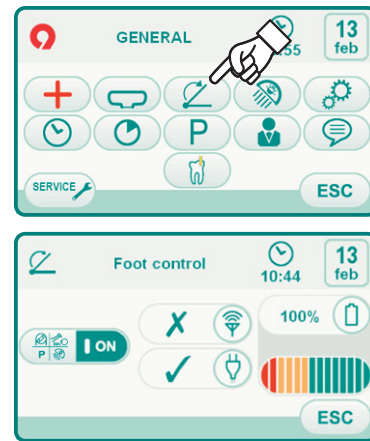

5.1.1.2.4. Impostazione lampada operatoria


Dal menu IMPOSTAZIONI GENERALI toccare il tasto icona per entrare nel sottomenu IMPOSTAZIONE LAMPADA OPERATORIA dove sono presenti i seguenti tasti icona:

- Automatismo spegnimento lampada con chiamata posizione di risciacquo per la poltrona
- Automatismo spegnimento lampada con chiamata posizione di azzeramento per la poltrona
- Automatismo riduzione dell'intensità luminosa della lampada con estrazione strumento lampada polimerizzante (solo con lampada a led VENUS PLUS -L)

NOTA: con l'automatismo di spegnimento attivato, è sufficiente richiamare qualsiasi movimento della poltrona per riaccendere la lampada operatoria.

NOTA: con l'automatismo di riduzione intensità luminosa attivato, è sufficiente riporre lo strumento lampada polimerizzante per riattivare l'intensità impostata.

- Per selezionare/deselezionare un automatismo toccare il relativo tasto icona.
- Per confermare le impostazioni scelte è sufficiente uscire da questo sottomenu toccando il tasto icona .

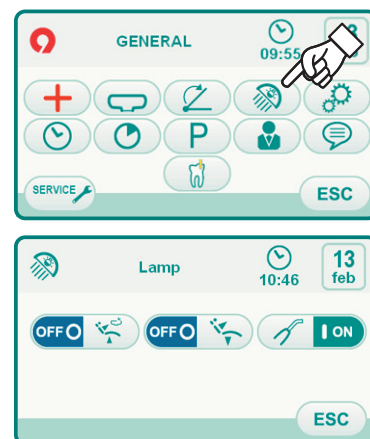

5.1.1.2.5. Altre impostazioni

Queste impostazioni sono uniche per tutti gli operatori.
Dal menu IMPOSTAZIONI GENERALI toccare il tasto icona per entrare nel sottomenu ALTRE IMPOSTAZIONI dove sono presenti i seguenti tasti icona:

- Attivazione/disattivazione sblocco freno braccio a pantografo
- Attivazione/disattivazione segnale acustico tocco display
- Attivazione/disattivazione movimenti poltrona
- Regolazione sensibilità freno
- Regolazione luminosità display

- Per attivare o disattivare lo sblocco del freno braccio a pantografo toccare il relativo tasto icona.

NOTA: lo stato di freno non sbloccabile è segnalato dall'apposita icona sul TOUCH DISPLAY (vedere paragrafo 5.1.).



ATTENZIONE!

Per una migliore sicurezza di lavoro, tale operazione è obbligatoria qualora si debba utilizzare un elettrobisturi esterno.

- Per attivare o disattivare un segnale acustico ad ogni tocco del TOUCH DISPLAY.
- Per attivare o disattivare i movimenti della poltrona toccare il relativo tasto icona.



NOTA: lo stato di poltrona bloccata è segnalato dall'apposita icona sul TOUCH DISPLAY (vedere paragrafo 5.1.).



ATTENZIONE!

Per una migliore sicurezza di lavoro, tale operazione è obbligatoria qualora si debba utilizzare un elettrobisturi esterno.

- Per regolare la sensibilità di attivazione del freno toccare i relativi tasti icona o .




NOTA: il valore impostabile varia da 1 a 5.

- Per regolare la luminosità del display toccare i relativi tasti icona o .



NOTA: il valore impostabile varia da 1 a 10.


- Per confermare le impostazioni scelte è sufficiente uscire da questo sottomenu toccando il tasto icona .

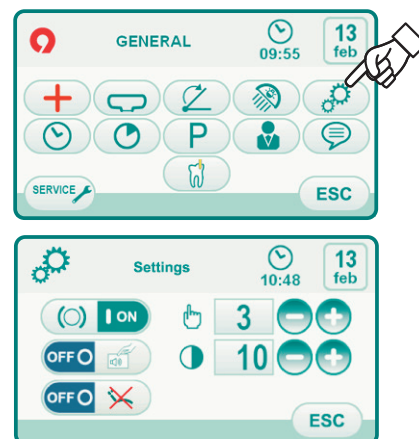

5.1.1.2.6. Regolazione ora e data

Questa impostazione è unica per tutti gli operatori.
Dal menu IMPOSTAZIONI GENERALI toccare il tasto icona per entrare nel sottomenu REGOLAZIONE ORA E DATA.

- Per variare i dati visibili toccare i relativi tasti icona o .
- Per confermare le impostazioni scelte è sufficiente uscire da questo sottomenu toccando il tasto icona .

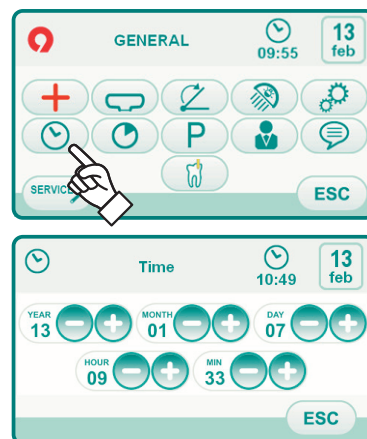

5.1.1.2.7. Cronometro

Questa impostazione è unica per tutti gli operatori.

Dal menu IMPOSTAZIONI GENERALI toccare il tasto icona per entrare nel sottomenu CRONOMETRO.

- Per variare i vari dati visibili toccare i relativi tasti icona o .

NOTA: il tempo impostabile varia da 00:00:00 a 10:59:59.

- Una volta impostato il tempo toccare il tasto icona per far partire il countdown.

NOTA: a questo punto è possibile uscire da questo menu toccando il tasto icona senza che il countdown venga interrotto.



- Per interrompere il countdown toccare il tasto icona .

NOTA: a questo punto toccando il tasto icona è possibile riportare il cronometro all'ultimo tempo impostato.

- Allo scadere del tempo impostato il complesso odontoiatrico emette un segnale intermittente e sul TOUCH DISPLAY viene visualizzato nuovamente il menu CRONOMETRO.

Per interrompere il segnale intermittente toccare il tasto icona o qualsiasi pulsante della consolle.

NOTA: l'ultimo tempo impostato rimane memorizzato.

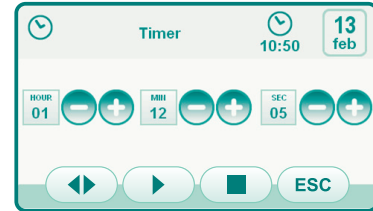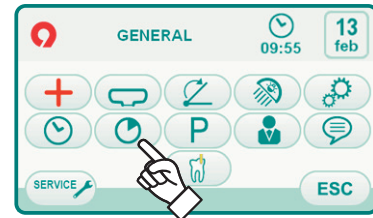

5.1.1.2.8. Personalizzazione pulsanti preferiti

Questo sottomenu permette di scegliere la funzione da attribuire alle 3 icone inferiori visibili nella videata principale.


Questa impostazione è unica per tutti gli operatori.

Dal menu IMPOSTAZIONI GENERALI toccare il tasto icona per entrare nel sottomenu PERSONALIZZAZIONE PULSANTI PREFERITI dove sono visibili le 3 posizioni modificabili con le icone delle funzioni attualmente impostate.

- Per variare la funzione a fronte di una specifica posizione è sufficiente toccare i relativi tasti icona o .
- Le funzioni impostabili sono le seguenti:

	Impostazione ciclo di disinfezione BIOSTER (solo posizione P1)
	Impostazione ciclo FLUSHING (solo posizione P1)
	Svuotamento serbatoio sistema W.H.E. (solo posizione P1)
	Impostazioni gruppo idrico
	Impostazione comando a piede
	Impostazione lampada operatoria
	Altre impostazioni
	Regolazione ora e data
	Cronometro
	Selezione lingua
	Selezione/deselezione alimentazione idrica indipendente

- Per confermare le impostazioni scelte è sufficiente uscire da questo sottomenu toccando il tasto icona .

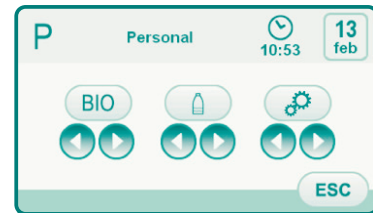

5.1.1.2.9. Inserimento anagrafica operatore

Dal menu IMPOSTAZIONI GENERALI toccare il tasto icona per entrare nel sottomenu INSERIMENTO ANAGRAFICA OPERATORE.

NOTA: l'anagrafica modificata è sempre riferita all'operatore impostato nella videata principale.

- Per inserire il testo desiderato toccare i tasti icona delle varie lettere (max. 20 caratteri).
- Per inserire caratteri maiuscoli toccare il tasto icona .
- Per inserire numeri o caratteri speciali toccare il tasto icona .
- Per cancellare eventuali errori toccare il tasto icona cancellando da sinistra a destra.
- Una volta inserito il testo, toccare il tasto icona per uscire dal sottomenu salvando automaticamente.




5.1.1.2.10. Selezione lingua

Questa impostazione è unica per tutti gli operatori.

Dal menu IMPOSTAZIONI GENERALI toccare il tasto icona per entrare nel sottomenu SELEZIONE LINGUA.

- Per variare la lingua toccare il tasto icona della relativa bandiera.
- Per confermare l'impostazione scelta è sufficiente uscire da questo sottomenu toccando il tasto icona .

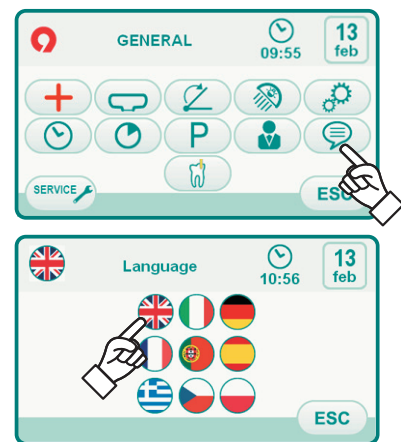

5.1.1.2.11. Impostazione APEX LOCATOR

Questo sottomenu permette di impostare la soglia di allarme del localizzatore apicale elettronico APEX LOCATOR (vedere paragrafo 5.11.).

Dal menu IMPOSTAZIONI GENERALI toccare il tasto icona per entrare nel sottomenu IMPOSTAZIONE APEX LOCATOR.

- Impostare la soglia di allarme utilizzando i tasti icona o . Un trattino arancione posto sulla bargraph di sinistra visualizzerà il valore scelto.


NOTA: il valore impostabile varia da 0 a +2.

- Toccando il tasto icona è possibile attivare/disattivare il segnale di allarme al raggiungimento della soglia impostata:

allarme attivo

allarme non attivo

- Per confermare il valore scelto è sufficiente uscire da questo sottomenu toccando il tasto icona .

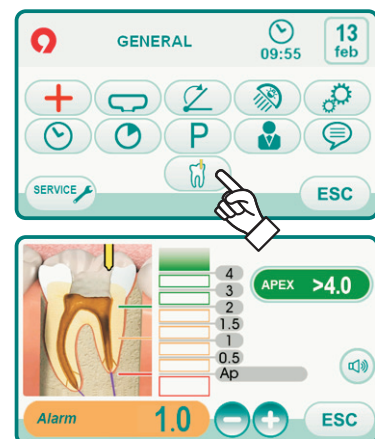

5.1.2. Programmazione della "Posizione risciacquo" e "Posizione di azzeramento" della poltrona

Questa impostazione è specifica per ogni operatore.

Dalla videata principale eseguire le seguenti operazioni:

- Regolare la poltrona nella posizione desiderata utilizzando i pulsanti di movimentazione manuale.

NOTA: se motorizzata è possibile memorizzare anche la posizione della bacinella.

- Attivare la modalità di memorizzazione premendo il pulsante MEMORIA per almeno 2 secondi.

L'avvenuta attivazione della modalità di memorizzazione viene segnalata da un breve segnale acustico (BEEP) e dall'apposita icona (**A**) sul TOUCH DISPLAY.

NOTA: per uscire dalla modalità di memorizzazione senza eseguire modifiche è sufficiente premere nuovamente il pulsante MEMORIA per almeno 2 secondi.


- Premere i pulsanti RITORNO AUTOMATICO o POSIZIONE RISCIAQUO per associare la posizione al pulsante.

La comparsa sul TOUCH DISPLAY dell'icona (**B**) riferita al programma scelto confermerà l'avvenuta memorizzazione.

NOTA: nella POSIZIONE RISCIAQUO l'altezza del sedile non è modificabile.

NOTA: il pulsante POSIZIONE RISCIAQUO porta lo schienale ed il sedile nella posizione di risciacquo.

Premendo nuovamente il pulsante POSIZIONE RISCIAQUO lo schienale ed il sedile torneranno alla posizione precedente.

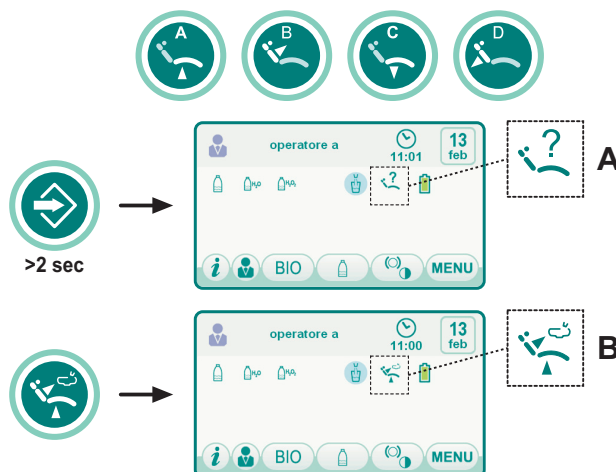

5.1.3. Programmazione delle posizioni A, B, C e D della poltrona

Questa impostazione è specifica per ogni operatore.

Dalla videata principale eseguire le seguenti operazioni:

- Regolare la poltrona nella posizione desiderata utilizzando i pulsanti di movimentazione manuale.

NOTA: è possibile memorizzare anche la posizione della bacinella se motorizzata.


- Attivare la modalità di memorizzazione premendo il pulsante MEMORIA per almeno 2 secondi.

NOTA: l'avvenuta attivazione della modalità di memorizzazione viene segnalata da un breve segnale acustico (BEEP) e da una apposita icona (**A**) sul TOUCH DISPLAY.

- Premere i pulsanti A o B o C o D per associare la posizione al pulsante (es. C).

NOTA: la comparsa sul TOUCH DISPLAY dell'icona (**B**) riferita al programma scelto (es. C) confermerà l'avvenuta memorizzazione.

NOTA: per richiamare una posizione programmata è sufficiente eseguire una breve pressione sul pulsante dove precedentemente tale posizione era stata memorizzata.

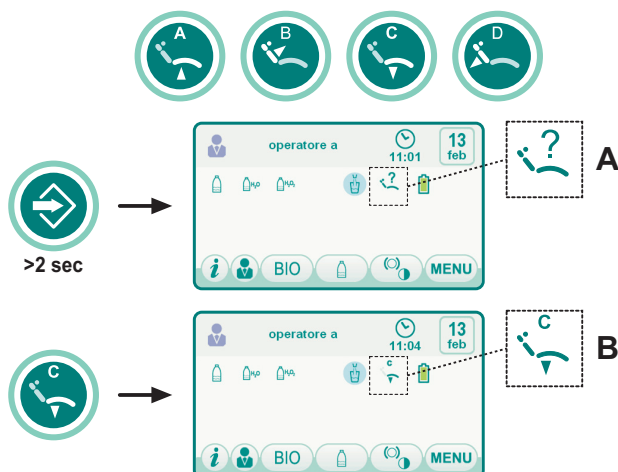

5.1.4. Pulsante di emergenza

Questo pulsante può essere utilizzato nei casi di emergenza per portare il paziente nella posizione di Trendelemburg.


NOTA: la posizione di Trendelemburg è già impostata e non è modificabile.



5.1.5. Pulsante blocco schermo SMART TOUCH

Questo pulsante permette di abilitare/disabilitare lo schermo del TOUCH DISPLAY per poter eseguire agevolmente le operazioni di pulizia della consolle.

NOTA: lo stato di schermo bloccato è segnalato da un evidente messaggio sul TOUCH DISPLAY.

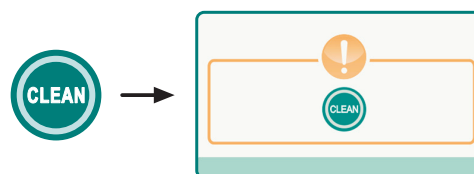


5.2. Comando a piede

Il comando a piede può essere di 3 tipi:

- ① Comando a piede "multifunzione".
- ② Comando a piede "a pressione".
- ③ Comando a piede "Power Pedal".


NOTA: i comandi a piede "multifunzione" e "a pressione" possono essere forniti anche nella versione WIRELESS.

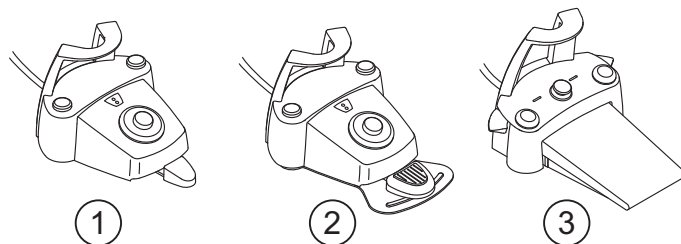

5.2.1. Comando a piede "multifunzione"

Descrizione delle parti.

- 1 Maniglia.
- 2 Leva di comando.
- 3 Comando movimenti poltrona.
- 4 Comando Chip-air/Richiamo posizione risciacquo paziente.
- 5 Comando Water Clean System /Ritorno automatico della poltrona.
- 6 LED (non attivo).
- 7 LED segnalazione stato di carica della batteria (solo versione WIRELESS).

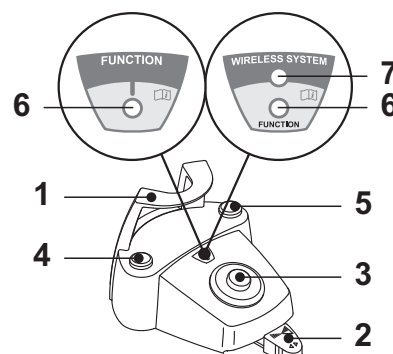

Funzionamento Joystick movimenti poltrona (3).

Con strumento estratto

- Avvia lo strumento.
- Regola il numero di giri degli strumenti rotanti.
- Verso destra: funzionamento con spray (se lo strumento selezionato ne è provvisto).

NOTA: a fine lavoro si attiva automaticamente un soffio di aria per eliminare l'eventuale goccia residua di liquido presente nelle condotte degli spray.

- Verso sinistra: funzionamento senza spray.


Con strumenti a riposo

- Fine-corsa verso destra: ritorno automatico della poltrona.
- Fine-corsa verso sinistra: richiamo posizione risciacquo paziente.

NOTA: un secondo posizionamento della leva nel fine-corsa sinistro riporta la poltrona nella posizione di lavoro.

ATTENZIONE!

Queste funzioni per la poltrona vengono attivate mantenendo la posizione di fine-corsa per almeno 2 secondi.

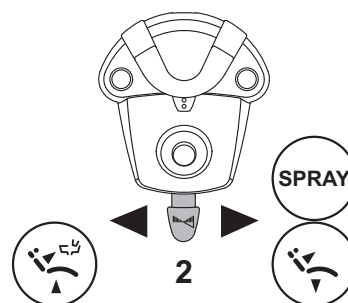

Joystick comando movimenti poltrona (3).


Controlla i seguenti movimenti:

- Salita sedile poltrona.
- Salita schienale poltrona.
- Discesa sedile poltrona.
- Discesa schienale poltrona.

Per interrompere il movimento rilasciare il joystick di comando.

NOTA: tutti i comandi di movimentazione della poltrona risultano bloccati quando uno strumento è estratto e la leva del comando a piede azionata.


NOTA: è possibile modificare il funzionamento del joystick con strumento estratto (vedere paragrafo 5.1.1.2.3.).

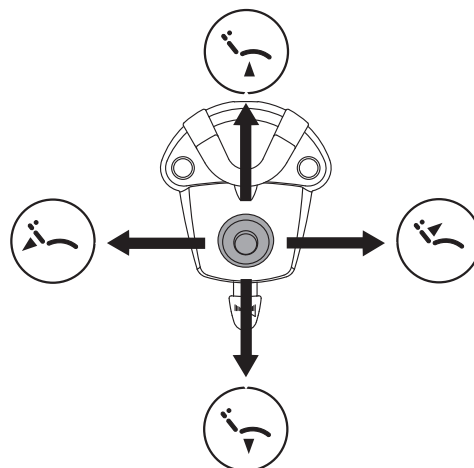

Funzionamento tasto sinistro (4).

- **Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumento estratto:** comando Chip-air: invia un getto di aria alla Turbina o al Micromotore. L'erogazione di aria avviene premendo il tasto; il getto di aria si interrompe quando il tasto viene rilasciato.
- **Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumenti a riposo:** Attivazione del programma "Posizione risciacquo paziente".

NOTA: una seconda pressione del tasto riporta la poltrona nella posizione di lavoro.

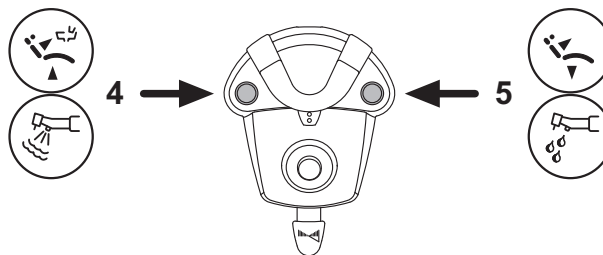

Funzionamento tasto destro (5).

- **Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumento estratto:** Comando Water Clean System: invia un getto di acqua corrente a strumenti quali la Turbina, il Micromotore e l'Ablatore per il risciacquo delle condotte degli spray. L'erogazione di acqua avviene premendo il tasto; quando il tasto viene rilasciato il getto di acqua si interrompe e viene attivato automaticamente un soffio di aria per eliminare l'eventuale goccia residua di liquido presente nelle condotte degli spray.
- **Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumenti a riposo:** Attivazione del programma "Ritorno automatico della poltrona".

Versione WIRELESS.

Questo comando a piede può essere fornito anche nella versione WIRELESS (vedere paragrafo 5.2.4).

Protezione contro la penetrazione di liquidi.

Il comando a piede è protetto contro la penetrazione di liquidi. Grado di protezione: IPX1.

Pulizia.


Pulire il comando a piede utilizzando un prodotto idoneo (vedere paragrafo 1.4).

NOTA: in caso il comando a piede scivoli sul pavimento pulire dalla polvere la gomma anti-scivolo posta sotto la base utilizzando un panno asciutto.

5.2.2. Comando a piede "a pressione"

Descrizione delle parti.

- 1 Maniglia.
- 2 Leva di comando.
- 3 Comando movimenti poltrona.
- 4 Comando Chip-air/Richiamo posizione risciacquo paziente.
- 5 Comando Water Clean System /Ritorno automatico della poltrona.
- 6 LED segnalazione funzionamento con spray.
- 7 LED segnalazione stato di carica della batteria (solo versione WIRELESS).

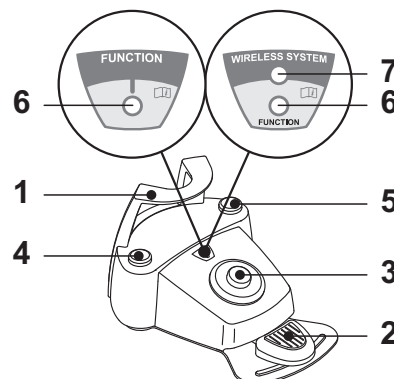

Leva di comando (2).

Funzionamento:

- Estrarre lo strumento .
- Avviare lo strumento premendo il pedalino (a).
- Regolare il numero di giri/ la potenza dello strumento agendo sulla leva di comando:
 - verso destra: aumenta;
 - verso sinistra: diminuisci.

NOTA: la leva di comando regola la velocità/potenza dello strumento dal minimo fino al massimo impostato dalla tavoletta medico.

- Per interrompere il funzionamento dello strumento è sufficiente rilasciare il pedalino (a).

NOTA: con spray attivo, a fine lavoro viene emesso automaticamente un soffio di aria per eliminare l'eventuale goccia residua di liquido presente nelle condotte.




ATTENZIONE!

L'attivazione e la disattivazione dello spray agli strumenti avviene premendo i tasti (4) o (5).

Un breve segnale acustico avverte dell'avvenuta commutazione.

Il LED (6) acceso segnala il funzionamento con spray.

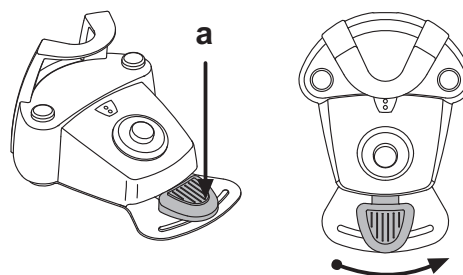

Funzionamento Joystick movimenti poltrona (3).

Controlla i seguenti movimenti:



Salita sedile poltrona.



Salita schienale poltrona.



Discesa sedile poltrona.




Discesa schienale poltrona.

Per interrompere il movimento rilasciare il joystick di comando.

NOTA: tutti i comandi di movimentazione della poltrona risultano bloccati quando uno strumento è estratto e la leva del comando a piede azionata.

NOTA: è possibile modificare il funzionamento del joystick con strumento estratto (vedere paragrafo 5.1.1.2.3.).

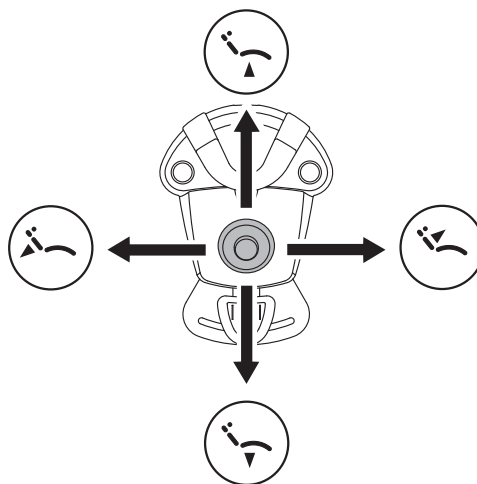

Funzionamento tasto sinistro (4).

Funzionamento:

- Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumenti a riposo: Attivazione del programma "Posizione risciacquo paziente".

NOTA: una seconda pressione del tasto riporta la poltrona nella posizione di lavoro.

- Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumento estratto: Comando Chip-air: invia un getto di aria alla Turbina o al Micromotore. L'erogazione di aria avviene premendo il tasto; il getto di aria si interrompe quando il tasto viene rilasciato.

NOTA: il comando funziona solo con Turbina e Micromotore quando sono in posizione di lavoro.


- Breve pressione del tasto con strumento estratto: Attivazione o disattivazione dello spray agli strumenti.



ATTENZIONE!

Un breve segnale acustico avverte dell'avvenuta commutazione.

Il LED (6) acceso segnala il funzionamento con spray.

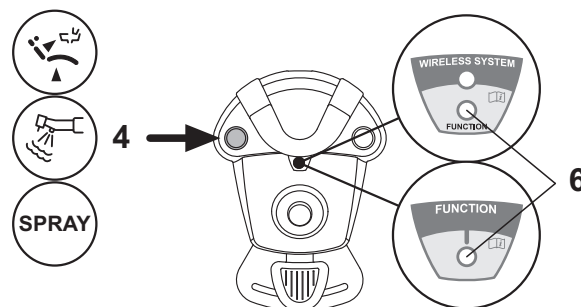

Funzionamento tasto destro (5).

Funzionamento:

- Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumenti a riposo: Attivazione del programma "Ritorno automatico della poltrona".

- Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumento estratto: Comando Water Clean System: invia un getto di acqua corrente a strumenti quali la Turbina, il Micromotore e l'Ablatore per il risciacquo delle condotte degli spray.

L'erogazione di acqua avviene premendo il tasto (4); quando il tasto viene rilasciato il getto di acqua si interrompe e viene attivato automaticamente un soffio di aria per eliminare l'eventuale goccia residua di liquido presente nelle condotte degli spray.


- Breve pressione del tasto con strumento estratto: Attivazione o disattivazione degli spray agli strumenti.



ATTENZIONE!

Un breve segnale acustico avverte dell'avvenuta commutazione.

Il LED (6) acceso segnala il funzionamento con spray.

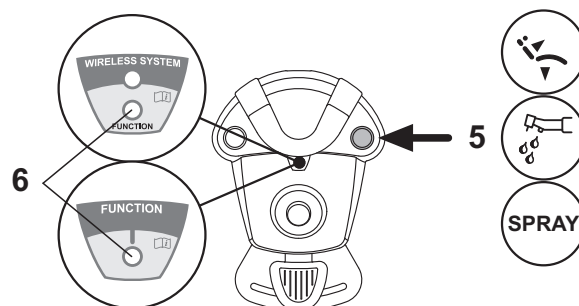

Versione WIRELESS.

Questo comando a piede può essere fornito anche nella versione WIRELESS (vedere paragrafo 5.2.4).

Protezione contro la penetrazione di liquidi.

Il comando a piede è protetto contro la penetrazione di liquidi. Grado di protezione: IPX1.

Pulizia.

Pulire il comando a piede utilizzando un prodotto idoneo (vedere paragrafo 1.4).




NOTA: in caso il comando a piede scivoli sul pavimento pulire dalla polvere la gomma anti-scivolo posta sotto la base utilizzando un panno umido.

5.2.3. Comando a piede "Power Pedal"

Descrizione delle parti.

- 1 Maniglia.
- 2 Pedalino di comando.
- 3 Comando movimenti poltrona.
- 4 Comando Chip-air o attivazione/disattivazione funzione spray agli strumenti.
- 5 Comando Water Clean System o attivazione/disattivazione funzione spray agli strumenti.
- 6 Attivazione posizione risciacquo paziente o richiamo programma "B".
- 7 Attivazione ritorno automatico della poltrona o richiamo programma "A".
- 8 LED segnalazione funzionamento con spray.

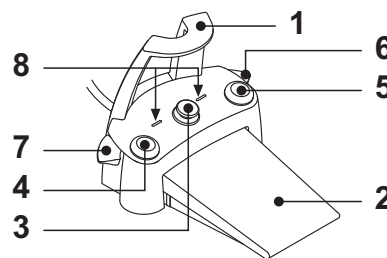

Funzionamento pedalino di comando (2).

• Con strumento estratto

- Premendo il pedalino (a) si avvia lo strumento.
- E' possibile regolare il numero di giri (o la potenza) dello strumento modulando la pressione sul pedalino.


NOTA: il pedalino regola la velocità/potenza dello strumento dal minimo fino al massimo impostato dalla tavoletta medico.

- Per interrompere il funzionamento dello strumento è sufficiente rilasciare il pedalino.

NOTA: con spray attivo, a fine lavoro viene emesso automaticamente un soffio di aria per eliminare l'eventuale goccia residua di liquido presente nelle condotte.

• Con strumenti a riposo

- La pressione del pedalino di comando blocca immediatamente qualsiasi movimento automatico della poltrona.

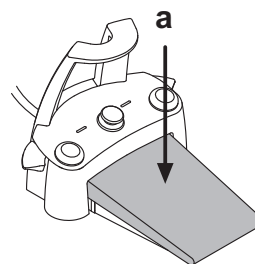

Funzionamento Joystick movimenti poltrona (3).

Controlla i seguenti movimenti:



Salita sedile poltrona.




Salita schienale poltrona.



Discesa sedile poltrona.



Discesa schienale poltrona.

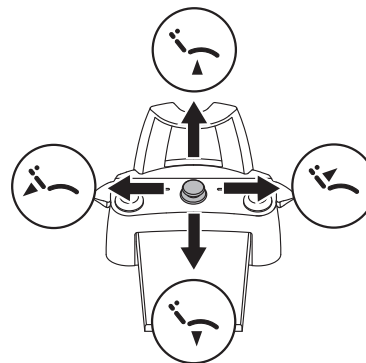

Per interrompere il movimento rilasciare il comando.

NOTA: tutti i comandi di movimentazione della poltrona risultano bloccati quando uno strumento è attivo o è in funzione il sistema BIOSTER.

NOTA: è possibile modificare il funzionamento del joystick con strumento estratto (vedere paragrafo 5.1.1.2.3.).


Funzionamento tasto sinistro (4).

- Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumento estratto: Comando Chip-air: invia un getto di aria alla Turbina o al Micromotore. L'erogazione di aria avviene premendo il tasto; il getto di aria si interrompe quando il tasto viene rilasciato.
- Breve pressione del tasto con strumento estratto: Attivazione o disattivazione spray allo strumento.



ATTENZIONE!

Un breve segnale acustico avverte dell'avvenuta commutazione. Il LED (8) acceso segnala il funzionamento con spray.

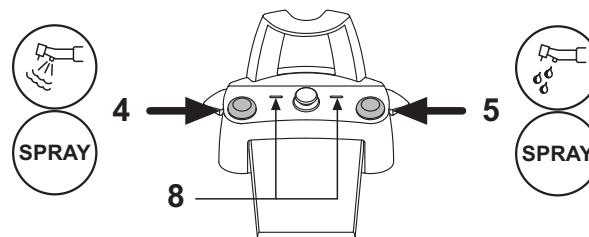

Funzionamento tasto destro (5).

- Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumento estratto: Comando Water Clean System: invia un getto di acqua corrente a strumenti quali la Turbina, il Micromotore e il Detartatore per il risciacquo delle condotte degli spray. L'erogazione di acqua avviene premendo il tasto (5); quando il tasto viene rilasciato il getto di acqua si interrompe e viene attivato automaticamente un soffio di aria per eliminare l'eventuale goccia residua di liquido presente nelle condotte degli spray.
- Breve pressione del tasto con strumento estratto: Attivazione o disattivazione spray allo strumento.




ATTENZIONE!

Un breve segnale acustico avverte dell'avvenuta commutazione. I LED (8) accesi segnalano il funzionamento con spray.

Funzionamento leva destra (6).

NOTA: la leva funziona solo con gli strumenti in posizione di riposo. Per ragioni di sicurezza il comando prescelto si attiva solo con un breve azionamento della leva e successivo rilascio.

- Azionamento della leva verso il basso:
Attivazione del programma "Ritorno automatico della poltrona".
- Azionamento della leva verso l'alto:
Attivazione del programma "B" della poltrona.

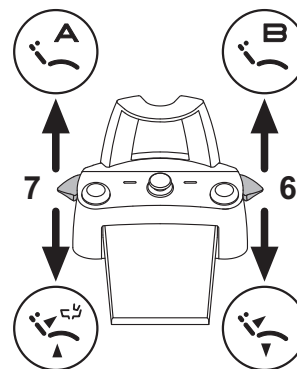

Funzionamento leva sinistra (7).

NOTA: la leva funziona solo con gli strumenti in posizione di riposo. Per ragioni di sicurezza il comando prescelto si attiva solo con un breve azionamento della leva e successivo rilascio.

- Azionamento della leva verso il basso:
Attivazione del programma "Posizione risciacquo paziente".

NOTA: un secondo azionamento della leva riporta la poltrona nella posizione di lavoro.

- Azionamento della leva verso l'alto:
Attivazione del programma "A" della poltrona.

Protezione contro la penetrazione di liquidi.

Il comando a piede è protetto contro la penetrazione di liquidi. Grado di protezione: IPX1.

Pulizia.

Pulire il comando a piede utilizzando un prodotto idoneo (vedere paragrafo 1.4).

NOTA: in caso il comando a piede scivoli sul pavimento pulire dalla polvere la gomma anti-scivolo posta sotto la base utilizzando un panno umido.

5.2.4. Comando a piede versione WIRELESS

I comandi a piede "multifunzione" e "a pressione" possono essere forniti anche nella versione WIRELESS.

Il comando a piede versione WIRELESS contiene un modulo trasmettente ZIGBEE (modulo certificato per Europa, Canada e USA).

Avvertenze per l'uso.



ATTENZIONE!

- Evitare di tenere il comando a piede versione WIRELESS in prossimità di altre sorgenti RF come schede wireless LAN, altri dispositivi radio, dispositivi Home RF, forni a microonde. Distanza consigliata almeno 2 metri nel caso di forni a microonde e 1 metro in tutti gli altri casi.
- Pur risultando irrilevante il campo elettromagnetico irradiato dal comando a piede, si consiglia di NON utilizzarlo in prossimità di apparecchiature per il sostegno della vita (es: pacemaker o stimolatori cardiaci) e protesi acustiche. Nelle strutture sanitarie, prima di utilizzare qualsiasi dispositivo elettronico, occorre sempre accertarsi che ciò sia compatibile con le altre apparecchiature presenti.
- Utilizzare esclusivamente il complesso odontoiatrico per caricare la batteria del comando a piede versione WIRELESS.
- La batteria interna può essere sostituita solo da un tecnico qualificato.

Avvertenze di primo utilizzo.

Si consiglia di eseguire un ciclo completo di carica della batteria del comando a piede prima di procedere al suo primo utilizzo.

Funzionamento comando a piede versione WIRELESS.

Il funzionamento del comando a piede versione WIRELESS è identico a quello della versione con cavo e quindi si rimanda alla lettura dei paragrafi precedenti facendo attenzione allo specifico modello utilizzato.


Il comando a piede versione WIRELESS in più dispone di uno specifico LED (7) che segnala la carica della batteria e lo stato delle comunicazioni con il complesso odontoiatrico.

Segnalazioni LED (7).

Il colore del LED segnala la carica della batteria, mentre il tipo di lampeggio segnala lo stato delle comunicazioni con il complesso odontoiatrico.

Carica della batteria:

COLORE	DESCRIZIONE (CAVO SCOLLEGATO)	DESCRIZIONE (CAVO COLLEGATO)
VERDE	Batteria carica (>75%)	Batteria caricata
ARANCIO	Batteria carica (<50%)	Batteria in ricarica
ROSSO	Batteria da caricare (<25%)	Errore carica batteria
Spento	Batteria scarica	Complesso odontoiatrico spento o comando piede guasto

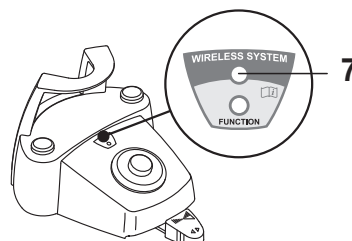


Stato delle comunicazioni:

LAMPEGGIO	DESCRIZIONE
Lento	Collegamento attivo in modalità wireless
Veloce	Collegamento attivo con cavo di ricarica inserito
Doppio	Ricerca di collegamento
Fisso	Errore di comunicazione



NOTA: queste informazioni sono visualizzabili anche sul TOUCH DISPLAY tramite le apposite icone (A) o (B) (vedere paragrafo 5.1.) o nello specifico menu di controllo del comando a piede (vedere paragrafo 5.1.1.2.3.).

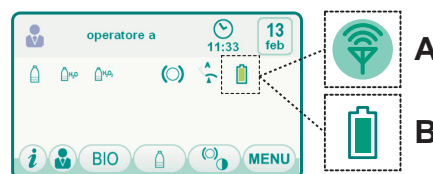

Caratteristiche della batteria.

Il comando a piede versione WIRELESS è provvisto di una batteria ricaricabile Litio-Polimeri (Li-Poly, 3.7V, 5200 mAh tipo Guangzhou Markyn Battery Co. Model 9051109).

La capacità della batteria consente un'autonomia di circa 2 mesi (stimando 8 ore consecutive di esercizio giornaliero). Questa autonomia è ottenuta con batteria in piena efficienza e completamente carica. L'efficienza delle batterie diminuisce con l'invecchiamento. Si stima che dopo 500 cicli di ricarica completa, l'efficienza si riduca al 60%. Anche in questa condizione, la batteria dovrebbe garantire un'autonomia di circa 1 mese.



NOTA: quando l'efficienza della batteria sarà ridotta tanto da essere ritenuta insoddisfacente a sostenere i ritmi di utilizzo giornaliero, richiederne la sostituzione da parte di un tecnico qualificato (ricambio originale cod. 97901336).



ATTENZIONE!

Non tentare di sostituire da soli la batteria.

Limitazione di garanzia sulla batteria.

La batteria presente all'interno del comando a piede è coperta da garanzia di 6 mesi dalla data di installazione.

Ricarica della batteria.

Quando necessario occorre ricaricare le batterie del comando a piede WIRELESS.

Procedere come segue:

- Aprire lo sportellino di protezione del connettore posto nella parte posteriore del comando a piede e collegare il cavo di ricarica.
- Collegare l'altro capo del cavo di ricarica al complesso odontoiatrico (vedi figura).

A questo punto il comando a piede è in fase di ricarica batteria (LED di segnalazione carica batteria illuminato) pur rimanendo completamente funzionante.



NOTA: la batteria viene ricaricata completamente in circa 6 ore.



ATTENZIONE!

Utilizzare esclusivamente il complesso odontoiatrico per caricare la batteria del comando a piede versione WIRELESS.

Naturale scarica della batteria.

Qualora non venga utilizzato per lunghi periodi, la batteria potrebbe lentamente scaricarsi ugualmente.



Dopo lunghi periodi di utilizzo è consigliabile procedere sempre ad un ciclo completo di carica prima dell'uso

Manutenzione e Smaltimento

Il comando a piede versione WIRELESS non contiene parti che possano essere riparate direttamente dall'utilizzatore.

In caso di malfunzionamento, non cercare di eseguire operazioni di manutenzione, ma contattare direttamente il Produttore o il suo distributore locale ai numeri riportati nel certificato di garanzia.

La batteria interna, a fine vita, andrà sostituita da un tecnico specializzato in un centro Service.

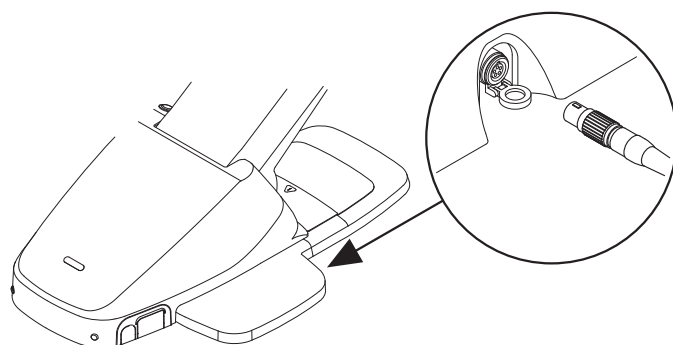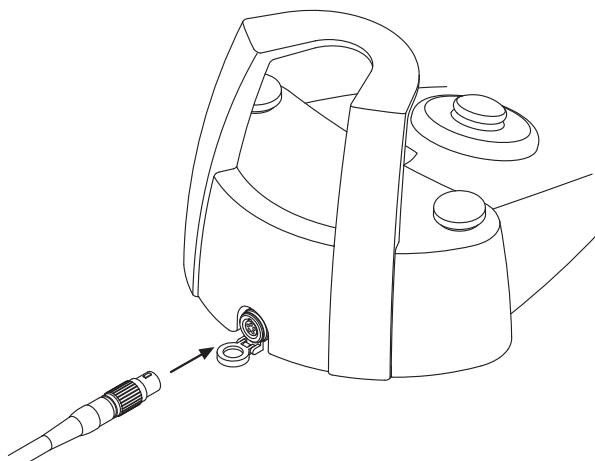

5.3. Siringa

Descrizione dello strumento.

- [a] Beccuccio.
- [b] Impugnatura.
- [c] Pulsante smontaggio siringa.
- [d] Pulsante aria.
- [e] Pulsante acqua.
- [f] Selettore caldo/freddo.
- [g] LED segnalazione caldo freddo.



ATTENZIONE!

Lo strumento è fornito allo stato non sterile.

E' raccomandato l'uso di protezioni e beccucci monouso.

Caratteristiche tecniche.

- Tempo di funzionamento:
 - siringa 3F: funzionamento continuo,
 - siringa 6F: lavoro 5 sec., riposo 10 sec.,
 - siringa 6F-L (con fibre ottiche): lavoro 5 sec., riposo 10 sec.
- Alimentazione:
 - siringa 6F e 6F-L (modelli CEFLA): 24 Vac; 50/60 Hz; 2 A; 50 W.
- Classificazione secondo la norma EN 60601-1:
 - siringa 6F e 6F-L (modelli CEFLA): CLASSE II, tipo B
- Schema di installazione: consultare il manuale tecnico di installazione (vedi paragrafo 11.).

Utilizzo.

- Portare lo strumento in posizione di lavoro.



NOTA: L'attivazione dello strumento viene evidenziato dalla comparsa sul TOUCH DISPLAY della relativa videata di gestione.

- Pulsante [e] = acqua;
- Pulsante [d] = aria;
- Pulsante [e + d] = spray.
- Siringa 6F, funzionamento con acqua, aria e spray caldi: ruotare il selettore [f] in senso orario (LED g acceso).
- Siringa 6F, funzionamento con acqua, aria e spray freddi: ruotare il selettore [f] in senso antiorario (LED g spento).
- I tasti icona disponibili sul TOUCH DISPLAY sono i seguenti:



Accensione/spengimento delle fibre ottiche (solo con siringa 6F-L)



Selezione/deselezione alimentazione idrica indipendente (solo con sistema S.H.S.)



Visualizzazione riga delle icone generali di funzionamento (vedi paragrafo 5.1.)

Regolazione intensità luminosa della fibra ottica.

- Per regolare l'intensità luminosa della fibra ottica occorre toccare in maniera prolungata (almeno 2 secondi) il tasto icona
- Regolare il livello dell'intensità luminosa toccando i tasti icona o .



NOTA: il valore impostabile varia da 1a 16.

- Per confermare l'intensità scelta è sufficiente uscire da questo sottomenu toccando il tasto icona



NOTA: dopo 30 secondi le fibre ottiche si spengono automaticamente.

Smontaggio dell'impugnatura.

- Il beccuccio [a] è montato a scatto sull'impugnatura [b].
- Per estrarre l'impugnatura dal corpo siringa ruotare il selettore in senso antiorario (LED g spento) e premere il pulsante [c].

Cordone siringa removibile.

La siringa è dotata di cordone removibile per agevolare le operazioni di pulizia (vedi paragrafo 5.).

Pulizia.

Carta morbida monouso inumidita con prodotti detergenti/disinfettanti.



ATTENZIONE!



- Non immergere la siringa in liquidi disinfettanti o detergenti.
- Prodotti sconsigliati: prodotti abrasivi e/o contenenti acetone, cloro ed ipoclorito di sodio.

Sterilizzazione.

Impugnatura e beccuccio siringa: autoclave a vapore d'acqua a 135 °C (2 bar) rispettando le istruzioni dell'apparecchiatura.



NOTA: imbustare prima di sterilizzare.

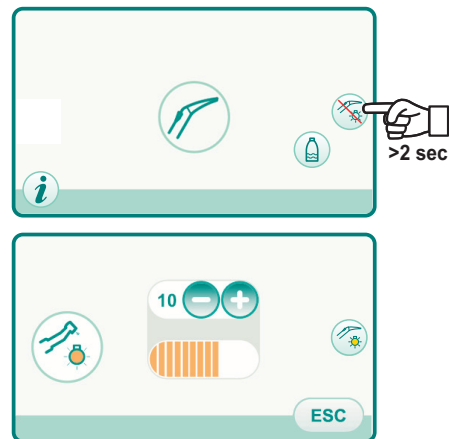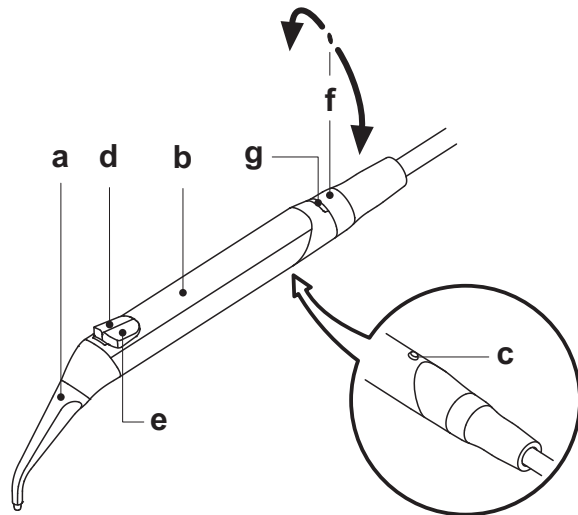

5.4. Turbina

Collegamento manipolo e cambio della fresa.

Fare riferimento alle specifiche istruzioni allegate al manipolo.

Utilizzo.



ATTENZIONE!

Prestare attenzione alle istruzioni d'uso relative alle diverse turbine.

- **Tempi di funzionamento:** lavoro 5 min., riposo 5 min.
- Il rubinetto [f] regola la quantità dell'acqua dello spray.
- Il rubinetto [e] regola la quantità di aria spray per tutti gli strumenti.
- Portare lo strumento in posizione di lavoro.



NOTA: L'attivazione dello strumento viene evidenziato dalla comparsa sul TOUCH DISPLAY della relativa videata di gestione.

- I tasti icona disponibili sul TOUCH DISPLAY sono i seguenti:



Incremento dei valori impostabili



Decremento dei valori impostabili



Selezione del regime di rotazione della turbina



Accensione/spegnimento delle fibre ottiche



Selezione/deselezione alimentazione idrica indipendente (solo con sistema S.H.S.)



Abilitazione e selezione del tipo di spray erogato dallo strumento



Visualizzazione riga delle icone generali di funzionamento (vedi paragrafo 5.1.)

MIN

Selezione rapida 1% del regime massimo di rotazione della turbina

MED

Selezione rapida 50% del regime massimo di rotazione della turbina

MAX

Selezione rapida 100% del regime massimo di rotazione della turbina



Attivazione/disattivazione pompa peristaltica (solo se presente)

- Per avviare lo strumento agire sulla leva del comando a piede (vedi paragrafo 5.2.).



NOTA: sul cordone della turbina è possibile collegare anche i micromotori ad aria dotati di connettore 4-vie e conformi alla Norma ISO 13294 - Dental Air Motor.



ATTENZIONE!

Lo strumento è fornito allo stato non sterile.

Regolazione intensità luminosa della fibra ottica.

- Per regolare l'intensità luminosa della fibra ottica occorre toccare in maniera prolungata (almeno 2 secondi) il tasto icona
- Regolare il livello dell'intensità luminosa toccando i tasti icona o .






NOTA: il valore impostabile varia da 1a 16.

- Per confermare l'intensità scelta è sufficiente uscire da questo sottomenu toccando il tasto icona **ESC**.



NOTA: dopo 30 secondi di non utilizzo dello strumento (leva del comando a piede disattivata) la fibra ottica si spegne.

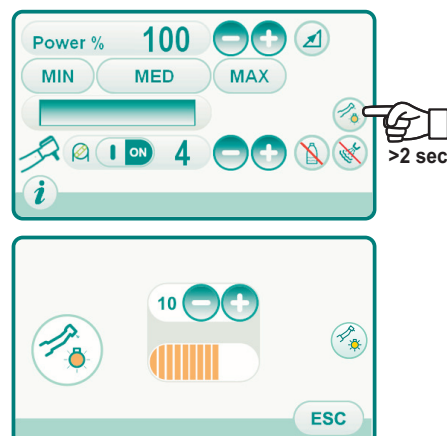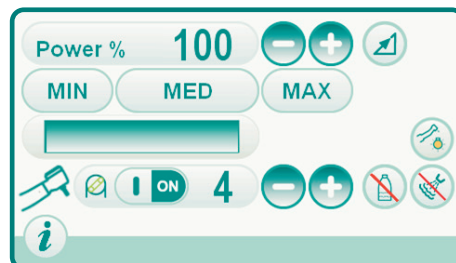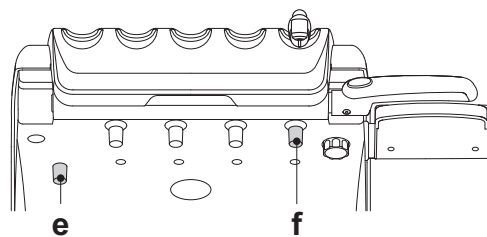

Variazione del regime di rotazione della turbina.

Con lo strumento in posizione di lavoro, selezionare la modalità di variazione del regime di rotazione della turbina toccando i seguenti tasti icona:




Variazione lineare, proporzionale allo spostamento della leva del comando a piede



Variazione ON/OFF che comporta l'erogazione della potenza massima impostata all'attivazione della leva del comando a piede

Sul TOUCH DISPLAY viene visualizzata l'icona relativa alla modalità attiva.

NOTA: la memorizzazione dei dati impostati avviene automaticamente.

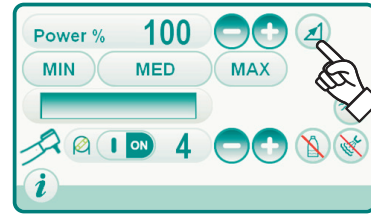

Pulsante di comando spray allo strumento.

Con lo strumento in posizione di lavoro, selezionare il tipo di spray erogato dallo strumento toccando i seguenti tasti icona:



Funzionamento con spray acqua + aria




Funzionamento con spray solo acqua



Funzionamento senza spray

La variazione è ciclica ad ogni tocco e sul TOUCH DISPLAY viene visualizzata l'icona relativa alla modalità attiva.

NOTA: la memorizzazione dei dati impostati avviene automaticamente.

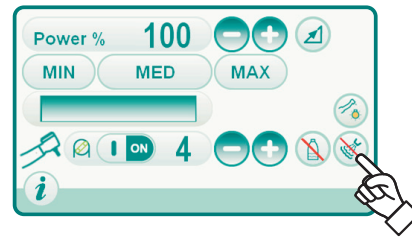

Attivazione/disattivazione pompa peristaltica (solo se presente).

Per attivare/disattivare la pompa peristaltica è sufficiente toccare il relativo tasto icona:




Pompa peristaltica non attiva



Pompa peristaltica attiva

NOTA: l'avvenuta attivazione è confermata dalla comparsa nella casella a fianco del valore di soluzione fisiologica erogata.

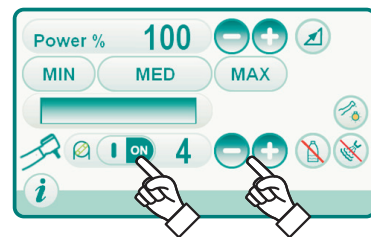

Cordone removibile.

La turbina è dotata di cordone removibile per agevolare le operazioni di pulizia (vedi paragrafo 5.).

Pulizia e manutenzione.

Fare riferimento alle specifiche istruzioni allegate al manipolo.

Per la lubrificazione, si raccomanda l'uso del Daily Oil (CEFLA S.C.).

Sterilizzazione.

Autoclave a vapore d'acqua a 135°C (2 bar) rispettando le istruzioni dell'apparecchiatura.



ATTENZIONE!

Prima di eseguire la fase di sterilizzazione consultare le specifiche istruzioni di uso allegate al manipolo.

Norme di sicurezza.



ATTENZIONE!

- La turbina non deve essere messa in funzione senza aver inserito la fresa o finta fresa.
- Il pulsante di sblocco della fresa non deve essere premuto durante il funzionamento!
- L'attrito tra il pulsante e la girante del micromotore surriscalda la testina e può causare scottature.
- I tessuti interni del paziente (lingua, guancia, labbra, ecc...) devono essere protetti dal contatto con il pulsante mediante strumenti appropriati (specchietti, ecc...).
- Le frese e gli utensili vari applicati sui manipoli devono essere conformi alla Norma sulla Biocompatibilità ISO 10993.

5.5. Micromotore elettrico

Accoppiamento manipoli e cambio della fresa.

Fare riferimento alle specifiche istruzioni allegate al micromotore e ai vari manipoli.

Utilizzo.



ATTENZIONE!

Prestare attenzione anche alle istruzioni d'uso relative ai diversi motori.

Lo strumento è fornito allo stato non sterile.

- **Tempi di funzionamento: lavoro 5 min., riposo 5 min.**
- Il rubinetto [f], in corrispondenza dello strumento, regola la quantità dell'acqua nello spray.
- Il rubinetto [e] regola la quantità di aria spray per tutti gli strumenti.
- Portare lo strumento in posizione di lavoro.



NOTA: L'attivazione dello strumento viene evidenziato dalla comparsa sul TOUCH DISPLAY della relativa videata di gestione.

- I principali tasti icona disponibili sul TOUCH DISPLAY sono i seguenti:



Incremento dei valori impostabili



Decremento dei valori impostabili



Selezione rapporto di riduzione



Selezione rapporto di riduzione



Selezione modalità di variazione della velocità



Selezione senso di rotazione del micromotore



Attivazione/disattivazione segnale di allarme





Impostazione rapporto di riduzione (vedere paragrafo 5.5.4.)



Accensione/spegnimento delle fibre ottiche



Selezione/deselezione alimentazione idrica indipendente (solo con sistema S.H.S.)

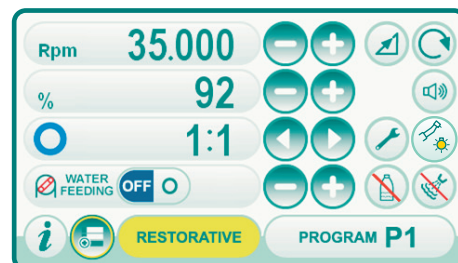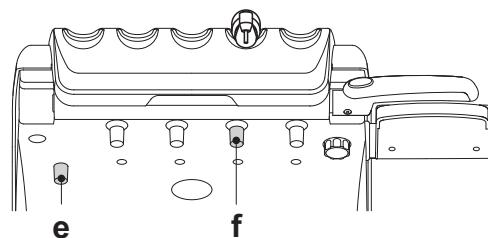

Abilitazione e selezione del tipo di spray erogato dallo strumento



Visualizzazione riga delle icone generali di funzionamento (vedere paragrafo 5.1.)



Visualizzazione semplificata del menu



Attivazione/disattivazione pompa peristaltica (solo se presente)



Selezione modalità di funzionamento del micromotore



Selezione programma di lavoro del micromotore



NOTA: per una spiegazione sul funzionamento degli altri tasti icona visibili si rimanda ai paragrafi relativi alle varie modalità di funzionamento.

- Per avviare lo strumento agire sulla leva del comando a piede (vedi paragrafo 5.2.).

Regolazione intensità luminosa della fibra ottica.

- Per regolare l'intensità luminosa della fibra ottica occorre toccare in maniera prolungata (almeno 2 secondi) il tasto icona
- Regolare il livello dell'intensità luminosa toccando i tasti icona o .




NOTA: il valore impostabile varia da 1 a 16.


- Per confermare l'intensità scelta è sufficiente uscire da questo sottomenu toccando il tasto icona



NOTA: dopo 30 secondi di non utilizzo dello strumento (leva del comando a piede disattivata) la fibra ottica si spegne.

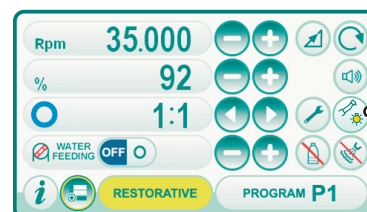

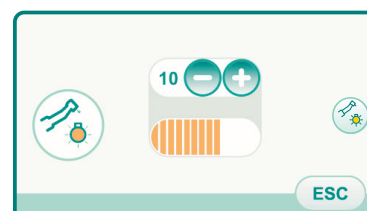


>2 sec




Pulsante di comando spray allo strumento.

Con lo strumento in posizione di lavoro, selezionare il tipo di spray erogato dallo strumento toccando i seguenti tasti icona:



-  Funzionamento con spray acqua + aria
-  Funzionamento con spray solo acqua
-  Funzionamento senza spray

La variazione è ciclica ad ogni tocco e sul TOUCH DISPLAY viene visualizzata l'icona relativa alla modalità attiva.

 **NOTA:** la memorizzazione dei dati impostati avviene automaticamente.

Selezione modalità di variazione della velocità di rotazione.

Con lo strumento in posizione di lavoro, selezionare la modalità di variazione della velocità di rotazione toccando i seguenti tasti icona:



-  Variazione lineare, proporzionale allo spostamento della leva del comando a piede
-  Variazione ON/OFF che comporta l'erogazione della potenza massima impostata all'attivazione della leva del comando a piede

Sul TOUCH DISPLAY viene visualizzata l'icona relativa alla modalità attiva.

 **NOTA:** la memorizzazione avviene automaticamente.

Inversione del senso di rotazione del micromotore.


Selezionare il senso di rotazione del micromotore toccando il relativo tasto icona:

-  Senso di rotazione normale
-  Senso di rotazione invertito

Il senso di rotazione invertito è segnalato da un segnale acustico (3 BEEP).


 **ATTENZIONE!**


Successivamente, all'estrazione del micromotore, un segnale acustico (3 BEEP) avverte se il senso di rotazione è invertito.

 **NOTA:** con la leva del reostato azionata il comando di inversione del senso di rotazione del micromotore è disattivato.

Selezione modalità di funzionamento del micromotore.

Il micromotore dispone di 3 diverse modalità di funzionamento selezionabili toccando il relativo tasto icona:

-  Funzionamento **RESTORATIVE** (vedere paragrafo 5.5.1.)
-  Funzionamento **ENDODONTIC** (vedere paragrafo 5.5.2.)
-  Funzionamento **IMPLANT** (vedere paragrafo 5.5.3.)


 **NOTA:** la variazione avviene in maniera ciclica.





Selezione programmi di lavoro del micromotore.

Il micromotore dispone di 5 programmi di lavoro identificati con P1, P2, P3, P4, P5 e selezionabili toccando il relativo tasto icona.

Ogni programma di lavoro memorizza i seguenti dati:

- modalità di funzionamento,
- velocità massima di rotazione / valore di coppia,
- on/off fibra ottica,
- intensità luminosa della fibra ottica,
- on/off inversione senso di rotazione,
- tipo di spray erogato,
- on/off pompa peristaltica (se presente),
- rapporto di riduzione manipolo.

 **NOTA:** la variazione avviene in maniera ciclica.

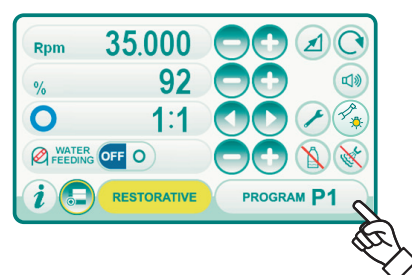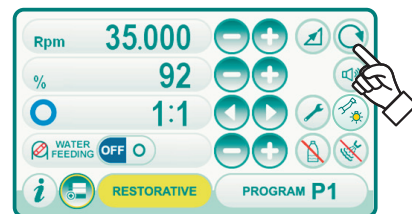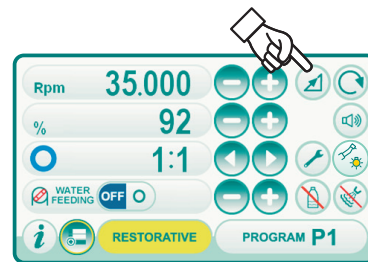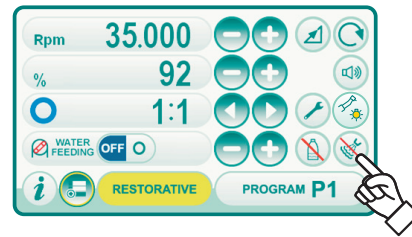

Selezione rapporto di riduzione.

Utilizzando i tasti icona o è possibile selezionare il rapporto di riduzione desiderato tra quelli memorizzati.

Il valore di coppia (impostato o corrente) viene espresso in % o in Ncm per i riduttori certificati.



ATTENZIONE!

Il valore di coppia è o no evidenziato a seconda della tolleranza di lettura sul valore indicato:

Ncm 5,0 tolleranza pari a $\pm 10\%$

Ncm 5,5 tolleranza pari a $\pm 20\%$.



NOTA: la memorizzazione dei dati impostati avviene automaticamente.

Attivazione/disattivazione segnale di allarme.

Per attivare/disattivare un segnale di allarme al raggiungimento della coppia massima impostata è sufficiente toccare il relativo tasto icona:



allarme attivo



allarme non attivo



NOTA: la memorizzazione avviene automaticamente.

Attivazione/disattivazione pompa peristaltica (solo se presente).

Per attivare/disattivare la pompa peristaltica è sufficiente toccare il relativo tasto icona:



Pompa peristaltica non attiva



Pompa peristaltica attiva



NOTA: l'avvenuta attivazione è confermata dalla comparsa nella casella a fianco del valore di soluzione fisiologica erogata.

Impostazione quantità di soluzione fisiologica erogata dalla pompa peristaltica.

Questo valore è visibile solo con pompa peristaltica attiva.

Premere i tasti icona o per modificare quantità di soluzione fisiologica erogata dalla pompa peristaltica.





NOTA: il valore impostabile varia da 1 a 5. La quantità di soluzione erogata associata ai valori impostabili è la seguente:

- valore 1: 35 cc/min circa,
- valore 2: 50 cc/min circa,
- valore 3: 70 cc/min circa,
- valore 4: 90 cc/min circa,
- valore 5: 100 cc/min circa.



NOTA: è possibile modificare quantità di soluzione fisiologica erogata dalla pompa peristaltica anche con lo strumento attivo.

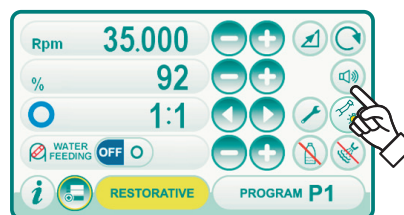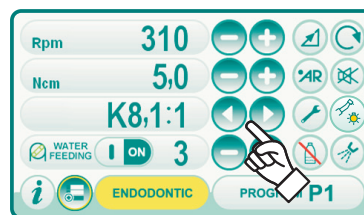

Cordone removibile.

Il micromotore è dotato di cordone removibile per agevolare le operazioni di pulizia (vedi paragrafo 5.).

Pulizia e manutenzione.

Fare riferimento alle specifiche istruzioni allegate allo strumento.

Per la lubrificazione, si raccomanda l'uso del Daily Oil (CEFLA S.C.).



ATTENZIONE!

- Non immergere lo strumento in liquidi disinfettanti o detergenti.
- Prodotti sconsigliati: prodotti abrasivi e/o contenenti acetone, cloro ed ipoclorito di sodio.

Sterilizzazione.

Solo manipoli: autoclave a vapore d'acqua a 135 °C (2 bar) rispettando le istruzioni dell'apparecchiatura.



ATTENZIONE!

Prima di eseguire la fase di sterilizzazione consultare le specifiche istruzioni di uso allegate allo strumento.

Norme di sicurezza.



ATTENZIONE!

- Non montare mai il contrangolo su un micromotore in funzione.
- Il pulsante di sblocco della fresa non deve essere premuto durante il funzionamento!
L'attrito tra il pulsante e la girante del micromotore surriscalda la testina e può causare scottature.
- I tessuti interni del paziente (lingua, guancia, labbra, ecc...) devono essere protetti dal contatto con il pulsante mediante strumenti appropriati (specchietti, ecc...).
- Le frese e gli utensili vari applicati sui manipoli devono essere conformi alla Norma sulla Biocompatibilità ISO 10993.

5.5.1. Modalità di funzionamento RESTORATIVE


Caratteristiche funzionamento RESTORATIVE.

- velocità regolabile da 100 a 40000 Rpm (manipolo 1:1),
- coppia regolabile da 1 al 100%,
- elenco personalizzabile dei rapporti di riduzione,
- modalità di variazione del regime di rotazione impostabile da variabile a fisso e viceversa,
- segnale di allarme al raggiungimento della coppia massima,
- cattura rapida della velocità massima durante la rotazione del motore.

Menu con micromotore estratto ma non attivo.

Tutti i tasti icona sono attivi e ogni funzione disponibile può essere variata (vedere paragrafo 5.5.).

NOTA: ogni impostazione o valore variato verrà automaticamente memorizzato nel programma di lavoro selezionato (es. P1).

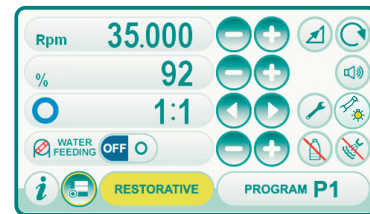

Menu con micromotore estratto ed attivo.

Le funzioni modificabili sono le seguenti:

- la velocità massima di rotazione della fresa utilizzando i tasti icona o ,
- il congelamento della velocità corrente utilizzando il seguente tasto icona:



Imposta la velocità di rotazione corrente come velocità massima


- la modalità di variazione della leva del comando a piede utilizzando i seguenti tasti icona:



Imposta la velocità di rotazione corrente come velocità massima attivando contemporaneamente una modalità di variazione ON/OFF della leva del comando a piede



Riporta la modalità di variazione della leva del comando a piede da ON/OFF a lineare

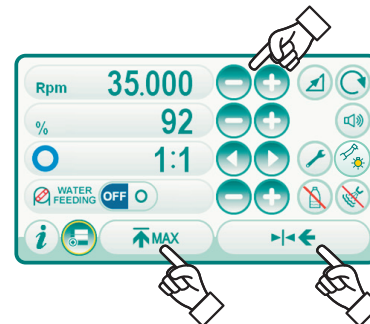

5.5.2. Modalità di funzionamento ENDODONTIC

Caratteristiche funzionamento ENDODONTIC.

- velocità regolabile da 100 a 600 Rpm con valore sempre riferito alla fresa indipendentemente dal rapporto di riduzione,
- coppia regolabile da 0,1 a 5,0 Ncm, escluso il riduttore 1:1 (4,5 Ncm),
- elenco personalizzabile dei rapporti di riduzione,
- modalità di variazione del regime di rotazione del motore impostabile da variabile a fisso e viceversa,
- segnale di allarme progressivo a partire dal 60% della coppia massima,
- pulsante di calibrazione durante la rotazione del motore.

Menu con micromotore estratto ma non attivo.

Tutti i tasti icona sono attivi e ogni funzione disponibile può essere variata (vedere paragrafo 5.5.).

Oltre alle impostazioni standard, nella modalità ENDODONTIC è possibile anche impostare il "Funzionamento a coppia massima raggiunta" toccando il relativo tasto icona:



blocco della rotazione



blocco della rotazione e successiva inversione del senso di rotazione



blocco della rotazione, inversione del normale senso di rotazione e successiva ripresa della normale senso rotazione

NOTA: ogni impostazione o valore variato verrà automaticamente memorizzato nel programma di lavoro selezionato (es. P1).

Di seguito si riporta la lista delle sigle relative ai tipi di contrangolo certificati che vengono indicati sul TOUCH DISPLAY:

Testo display	Rapporto	Coppia display	Tolleranza coppia alla fresa	Contrangoli di riferimento
128:1	128:1	100%	±20%	Tutte le marche
120:1	120:1	100%	±20%	Tutte le marche
64:1	64:1	100%	±20%	Tutte le marche
40:1	40:1	100%	±20%	Tutte le marche
18:1	18:1	100%	±20%	Tutte le marche
16:1	16:1	5 Ncm	±20%	Tutte le marche
E16	16:1	5 Ncm	±10%	Castellini E16®
EVO E16	16:1	5 Ncm	±10%	Goldspeed EVO E16®
10:1	10:1	5 Ncm	±20%	Tutte le marche
ER10	10:1	5 Ncm	±10%	NSK ER10®
9,5:1	9,5:1	5 Ncm	±20%	Tutte le marche
S6:1	6:1	5 Ncm	±10%	Sirona Endo 6:1
K5,4:1	5,4:1	5 Ncm	±10%	Kavo IntraC 0767 LHC®
4:1	4:1	5 Ncm	±20%	Tutte le marche
ER4	4:1	5 Ncm	±10%	NSK ER4®
K2,7:1	2,7:1	5 Ncm	±10%	Kavo LUX 7LP® Kavo IntraC 0768 LHC®
WD-79M	2:1	5 Ncm	±10%	W&H WD-79M® W&H EB-79M®
1:1	1:1	4,5 Ncm	±10%	Tutte le marche

Menu con micromotore estratto ed attivo.

Le funzioni modificabili sono le seguenti:

- la velocità massima di rotazione della fresa utilizzando i tasti icona o
- la calibrazione del manipolo utilizzando il seguente tasto icona:

CAL

imposta il valore di coppia corrente come valore 0

NOTA: si consiglia di eseguire questa operazione mentre si fa funzionare il manipolo al massimo e a vuoto.



- la modalità di variazione della leva del comando a piede utilizzando i seguenti tasti icona:



Imposta la velocità di rotazione corrente come velocità massima attivando contemporaneamente una modalità di variazione ON/OFF della leva del comando a piede



Riporta la modalità di variazione della leva del comando a piede da ON/OFF a lineare

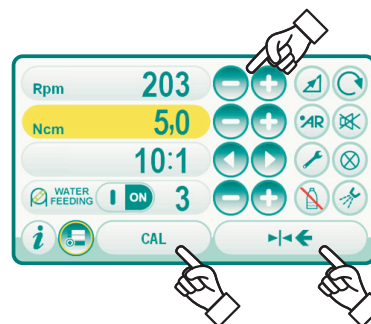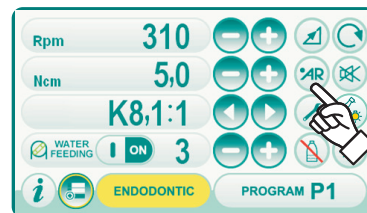

5.5.3. Modalità di funzionamento IMPLANT

Caratteristiche funzionamento IMPLANT.

- velocità regolabile da 5 a 2500 Rpm con valore sempre riferito alla fresa indipendentemente dal rapporto di riduzione (riduttori da 20:1 a 1000:1),
- coppia regolabile da 0,5 a 55,0 Ncm per i riduttori certificati, oppure da 1 a 100%,
- elenco personalizzabile dei rapporti di riduzione,
- segnale di allarme al raggiungimento della coppia massima,
- pulsante di calibrazione durante la rotazione del motore.


Menu con micromotore estratto ma non attivo.

Tutti i tasti icona sono attivi e ogni funzione disponibile può essere variata (vedere paragrafo 5.5.).

NOTA: ogni impostazione o valore variato verrà automaticamente memorizzato nel programma di lavoro selezionato (es. P1).

Di seguito si riporta la lista delle sigle relative ai tipi di contrangolo certificati che vengono indicati sul TOUCH DISPLAY:

Testo display	Rapporto	Coppia display	Tolleranza coppia alla fresa	Contrangoli di riferimento
1000:1	1000:1	50 Ncm	⚠ ±20%	Tutte le marche
256:1	256:1	50 Ncm	⚠ ±20%	Tutte le marche
120:1	120:1	50 Ncm	⚠ ±20%	Tutte le marche
ATR80I	80:1	70 Ncm	±10%	ATR ATR80I®
ER64	64:1	55 Ncm	±10%	NSK SGM-ER64i®
ER32	32:1	55 Ncm	±10%	NSK SGM-ER32i®
K27:1	27:1	55 Ncm	±10%	Kavo IntraLux CL09® + Testina CL3®
20:1	20:1	50 Ncm	⚠ ±20%	Tutte le marche
75EKM	20:1	55 Ncm	±10%	W&H WI-75E/KM® W&H WS-75E/KM®
R20L	20:1	55 Ncm	±10%	Castellini R20L® NSK X-SG20L® NSK S-Max SG20® NSK SGM-ER20i®
ATR20I	20:1	70 Ncm	±10%	ATR ATR20I®
WS75	20:1	70 Ncm	±10%	W&H WS-75® W&H WI-75E/KM®
CA20L	20:1	55 Ncm	±10%	Bien-Air CA20:1L®
16:1	16:1			Tutte le marche
K12:1	12:1	40 Ncm	±10%	Kavo IntraLux CL04® + Testina CL3®

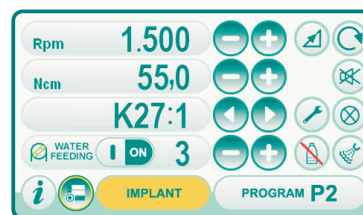

Menu con micromotore estratto ed attivo.

Le funzioni modificabili sono le seguenti:

- la velocità massima di rotazione della fresa utilizzando i tasti icona o ,
- la calibrazione del manipolo utilizzando il seguente tasto icona:

CAL

imposta il valore di coppia corrente come valore 0

NOTA: si consiglia di eseguire questa operazione mentre si fa funzionare il manipolo al massimo e a vuoto.


- la modalità di variazione della leva del comando a piede utilizzando i seguenti tasti icona:



Imposta la velocità di rotazione corrente come velocità massima attivando contemporaneamente una modalità di variazione ON/OFF della leva del comando a piede



Riporta la modalità di variazione della leva del comando a piede da ON/OFF a lineare

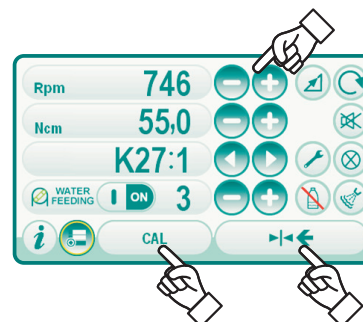

5.5.4. Menu impostazione rapporto di riduzione

Dal menu relativo al micromotore estratto ma non attivo, toccare il tasto icona per entrare nel sottomenu IMPOSTAZIONE RAPPORTO DI RIDUZIONE dove sono presenti i seguenti tasti icona:



Selezione rapporti di riduzione memorizzati

ESC

Uscita dal menu con memorizzazione del rapporto scelto

NEW

Creazione di un rapporto di riduzione personalizzato

EDIT

Modifica di un rapporto di riduzione personalizzato



NOTA: l'icona Rpm non è un campo modificabile poiché visualizza solo la velocità massima raggiungibile col rapporto di riduzione selezionato.

Come creare dei rapporti di riduzione personalizzati.

Per creare e memorizzare dei rapporti di riduzione personalizzati è sufficiente toccare il tasto icona **NEW** per entrare nel relativo sottomenu dove sono presenti i seguenti tasti icona:



Aumento/diminuzione dei decimali o delle unità



Memorizzazione del rapporto creato/modificato



Richiamo del rapporto di riduzione di default







Eliminazione del rapporto di riduzione personalizzato

Come modificare e/o cancellare dei rapporti di riduzione personalizzati.



NOTA: solo rapporti di riduzione personalizzati possono essere modificati e/o cancellati.

- Toccare i tasti icona o per scorrere i rapporti di riduzione memorizzati.
- Una volta selezionato il rapporto di riduzione, toccare il tasto icona **EDIT** per entrare nel sottomenu di modifica.
- Il funzionamento del sottomenu di modifica è identico a quello di creazione.

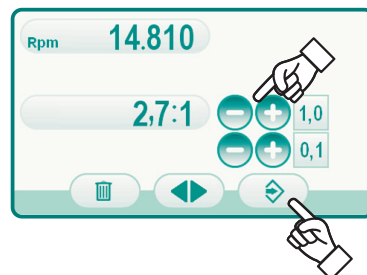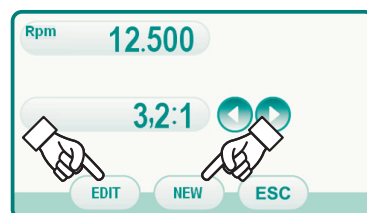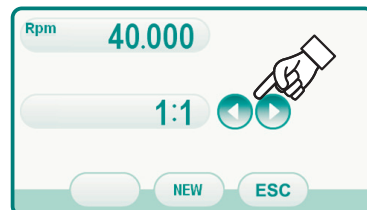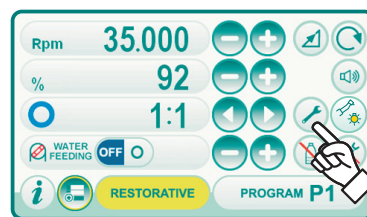

5.6. Detartatore

Collegamento manipolo ed inserto.

Fare riferimento alle specifiche istruzioni allegate al manipolo.



ATTENZIONE!

Prima di collegare il manipolo verificare che i contatti siano perfettamente asciutti. Qualora fosse necessario, asciugarli con l'aria della siringa.

Avvertenze d'uso.



ATTENZIONE!

- Verificare che le parti filettate dell'inserto e del manipolo siano perfettamente pulite.
- Non modificare la forma dell'inserto.
- Controllare periodicamente lo stato di usura dell'inserto e sostituirlo nei seguenti casi:
 - usura evidente,
 - calo delle prestazioni,
 - deformazione o urto.
- Note per detartatori U-PZ7:
 - apparecchio LED di Classe 1;
 - in caso di pulizia e manutenzione evitare di dirigere il fascio luminoso negli occhi (consigliato tenere le fibre ottiche spente).

Utilizzo.

- Tempi di funzionamento:
 - detartatori U-PZ6: lavoro 5 min., riposo 5 min,
 - detartatori U-PZ7: lavoro 5 min., riposo 5 min,
 - detartatori SATELEC: lavoro 5 min., riposo 5 min,
 - detartatori SATELEC LED: funzionamento continuo.
- Il rubinetto [f] in corrispondenza dello strumento regola la quantità dell'acqua di raffreddamento.
- Portare lo strumento in posizione di lavoro.



NOTA: L'attivazione dello strumento viene evidenziata dalla comparsa sul TOUCH DISPLAY della relativa videata di gestione.

- I tasti icona disponibili sul TOUCH DISPLAY sono i seguenti:



Incremento della potenza del detartatore



Decremento della potenza del detartatore



Selezione della modalità di variazione della potenza del detartatore



Accensione/spegnimento delle fibre ottiche



Selezione/deselezione alimentazione idrica indipendente (solo con sistema S.H.S.)



Abilitazione acqua di raffreddamento



Visualizzazione riga delle icone generali di funzionamento (vedi paragrafo 5.1.)

NORMAL

Selezione modalità di funzionamento del detartatore

PROGRAM P1

Selezione programma di lavoro del detartatore

- Per avviare lo strumento agire sulla leva del comando a piede (vedi paragrafo 5.2.).



ATTENZIONE!

Lo strumento è fornito allo stato non sterile.

Regolazione intensità luminosa della fibra ottica.

- Per regolare l'intensità luminosa della fibra ottica occorre toccare in maniera prolungata (almeno 2 secondi) il tasto icona .
- Regolare il livello dell'intensità luminosa toccando i tasti icona o .







NOTA: il valore impostabile varia da 1 a 16.

- Per confermare l'intensità scelta è sufficiente uscire da questo sottomenu toccando il tasto icona .



NOTA: dopo 30 secondi di non utilizzo dello strumento (leva del comando a piede disattivata) la fibra ottica si spegne.

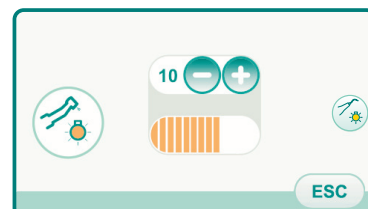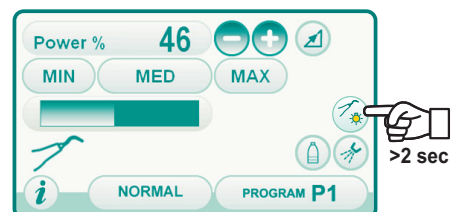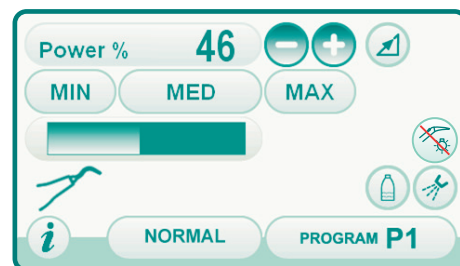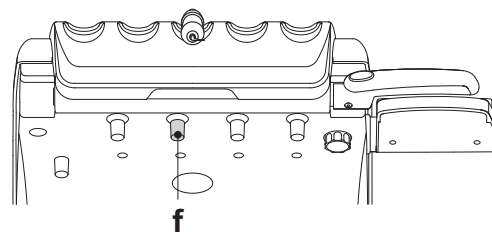

Selezione della modalità di variazione della potenza del detartatore.

Con lo strumento in posizione di lavoro, selezionare la modalità di variazione della potenza del detartatore toccando i seguenti tasti icona:




Variazione lineare, proporzionale allo spostamento della leva del comando a piede



Variazione ON/OFF che comporta l'erogazione della potenza massima impostata all'attivazione della leva del comando a piede

Sul TOUCH DISPLAY viene visualizzata l'icona relativa alla modalità attiva.

NOTA: la memorizzazione dei dati impostati avviene automaticamente.

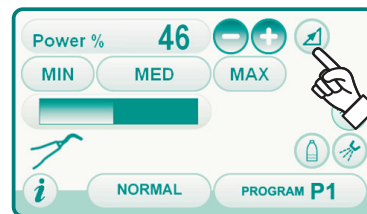

Abilitazione acqua di raffreddamento.

Con lo strumento in posizione di lavoro, selezionare se erogare o no acqua dallo strumento toccando i seguenti tasti icona:



Funzionamento con acqua




Funzionamento senza acqua

La variazione è ciclica ad ogni tocco e sul TOUCH DISPLAY viene visualizzata l'icona relativa alla modalità attiva.

NOTA: durante il funzionamento senza acqua, la potenza massima erogata è pari al 50% della potenza massima impostabile.

NOTA: la memorizzazione dei dati impostati avviene automaticamente.

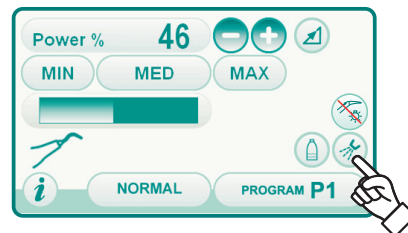

Selezione della modalità di funzionamento del detartatore.

Con lo strumento in posizione di lavoro, selezionare la modalità di funzionamento del detartatore toccando i seguenti tasti icona:

NORMAL

Funzionamento normale

ENDO

Funzionamento ENDO


PARO

Funzionamento PARO
(ENDO con potenza ridotta del 40%)

La variazione è ciclica ad ogni tocco e sul TOUCH DISPLAY viene visualizzata l'icona relativa alla modalità attiva.

NOTA: con la leva del comando a piede azionata non è possibile cambiare la modalità di funzionamento.

NOTA: la memorizzazione dei dati impostati avviene automaticamente.

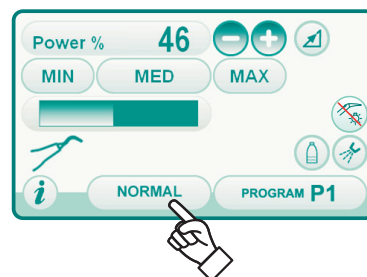


Selezione programmi di lavoro del detartatore.

Il detartatore dispone di 4 programmi di lavoro identificati con P1, P2, P3, P4 e selezionabili toccando il relativo tasto icona.

Ogni programma di lavoro memorizza i seguenti dati:

- potenza massima,
- on/off fibra ottica,
- intensità luminosa della fibra ottica,
- tipo di spray erogato,
- modalità di variazione della potenza.

NOTA: la variazione avviene in maniera ciclica.

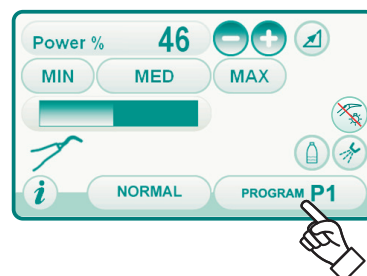

Cordone removibile.

Il detartatore è dotato di cordone removibile per agevolare le operazioni di pulizia (vedi paragrafo 5.).

Pulizia e manutenzione.

Fare riferimento alle specifiche istruzioni allegate allo strumento.

**ATTENZIONE!**

- Non immergere il manipolo in soluzioni disinfettanti o detergenti.

Sterilizzazione.

- Chiave dinamometrica, punte detartatore e manipolo detartatore: autoclave a vapore d'acqua a 135 °C (2 bar) rispettando le istruzioni dell'apparecchiatura.

**ATTENZIONE!**

Prima di eseguire la fase di sterilizzazione consultare le specifiche istruzioni di uso allegate allo strumento.

Norme di sicurezza.**ATTENZIONE!**

- Per evitare situazioni di pericolo o malfunzionamenti, all'atto della connessione sulla tavoletta, non invertire le posizioni di cordoni relativi a detartatori di marche diverse.
- Gli inserti applicati sul manipolo devono essere conformi alla Norma sulla Biocompatibilità ISO 10993.

5.7. Lampada polimerizzante T-LED

Caratteristiche tecniche.

Tensione d'alimentazione	: 24-36 Vdc
Potenza max assorbita	: 6 VA
Sorgente luminosa	: 1 Led da 5 W
Lunghezza d'onda	: 430÷490 nm
Segnali acustici	: all'inizio, ogni 5 sec. e a fine ciclo
Tipo di funzionamento	: intermittente
	(lavoro 3 cicli consecutivi - riposo 60 sec.).
Programmi	: 6 (preimpostati).

Descrizione generale della lampada.

- a Impugnatura lampada.
- b Parte terminale girevole.
- c Fibra ottica.
- d Protezione per gli occhi.
- e Cordone di alimentazione.
- f Pulsantiera di comando.

NOTA: la lampada polimerizzante può essere utilizzata in diverse configurazioni (a bacchetta, a pistola o qualunque posizione intermedia) per facilitare l'operatività dell'utilizzatore.

NOTA: la lampada polimerizzante viene consegnata in un contenitore originale che è bene custodire per eventuali trasporti successivi.

Descrizione della pulsantiera di comando.

[1] **LED 1 (ciclo STANDARD) :**
Emissione di 1000 mW/cm² per 20 secondi (questo ciclo è il ciclo di default al momento della vendita).

[2] **LED 2 (ciclo FAST) :**
Emissione di 1600 mW/cm² per 15 secondi.

[3] **LED 3 (ciclo STRONG) :**
Emissione di 1800 mW/cm² per 20 secondi.

[4] **LED S :**
Quando è illuminato il LED S si entra nella modalità dei cicli a rampa e contemporaneamente si accendono i led a fianco le lettere B, R e L:
[LED S + LED 1] **ciclo a rampa B (BONDING) :**
Ciclo rampa con emissione di 500 mW/cm² per 5 secondi, rampa da 500 a 1000 mW/cm² per 5 secondi e 1000 mW/cm² per 5 secondi, per un totale di 15 secondi.

[LED S + LED 2] **ciclo a rampa R (RAPID RESTORATION) :**
Ciclo rampa con emissione di 500 mW/cm² per 5 secondi, rampa da 500 a 2200 mW/cm² per 5 secondi e 2200 mW/cm² per 5 secondi, per un totale di 15 secondi.

[LED S + LED 3] **ciclo a rampa L (LONG RESTORATION) :**
Ciclo rampa con emissione di 500 mW/cm² per 5 secondi, rampa da 500 a 1800 mW/cm² per 5 secondi e 1800 mW/cm² per 10 secondi, per un totale di 20 secondi.

[5] **LED segnalatore di anomalie :**
Questo LED rosso si accende solo in caso di anomalia di funzionamento.

[6] **Pulsante START :**
Il pulsante START fa partire il ciclo selezionato in quel momento (evitando dal LED indicatore ciclo acceso).
Se viene schiacciato nuovamente durante un momento qualsiasi del ciclo, l'emissione della luce si interrompe istantaneamente.

[7] **Pulsante MODE :**
Questo pulsante serve per selezionare il ciclo che si intende effettuare. Consente di passare dal ciclo in cui ci si trova in quel momento al ciclo immediatamente successivo.

I primi tre cicli (1, 2 e 3) sono a potenza costante e i led si accendono singolarmente.

Quando è illuminato il LED S si entra nella modalità dei cicli a rampa e contemporaneamente si accendono i led a fianco le lettere B, R e L. Una volta che si è acceso il LED del ciclo che si intende utilizzare la lampada è pronta per l'uso. Spingendo il pulsante START si attiva l'emissione della luce secondo il ciclo selezionato.

NOTA: la scelta del ciclo è possibile e il pulsante è attivo, solo quando la lampada non emette luce. Se il pulsante viene accidentalmente premuto durante l'emissione della luce, non si ha nessun effetto.



Funzionamento.

ATTENZIONE!


Lo strumento è fornito allo stato non sterile.

Prima dell'uso disinfettare l'impugnatura lampada. La fibra ottica e la protezione per gli occhi possono essere sterilizzate in autoclave a vapore d'acqua a 135°C.

- Inserire la fibra ottica (c) in fondo al suo alloggiamento fino ad avvertire uno scatto.
- Inserire il manipolo della lampada polimerizzante all'estremità del proprio cordone di alimentazione ed avvitare la ghiera di fissaggio (e).

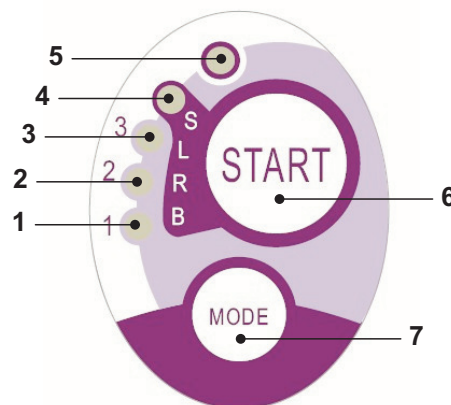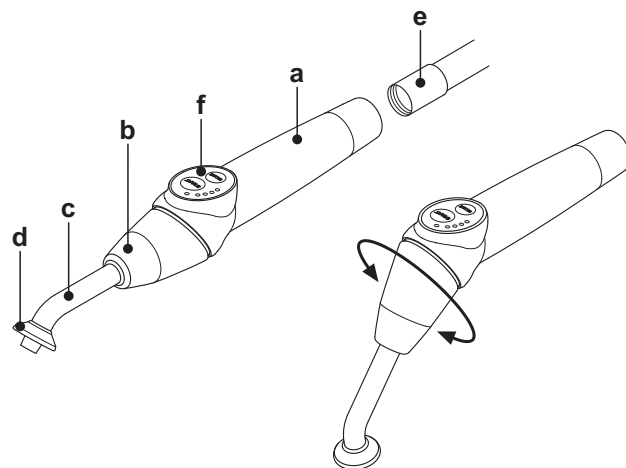

Cycle	LED	Total time	Ø8 mm	Total energy
standard	1	20"	1.000 mW/cm ²	20.000 mJ
fast	2	15"	1.600 mW/cm ²	24.000 mJ
strong	3	20"	1.800 mW/cm ²	36.000 mJ
bonding	S+1	15"	ramp cycle	11.250 mJ
rapid rest	S+2	15"	ramp cycle	20.250 mJ
long rest	S+3	20"	ramp cycle	26.250 mJ

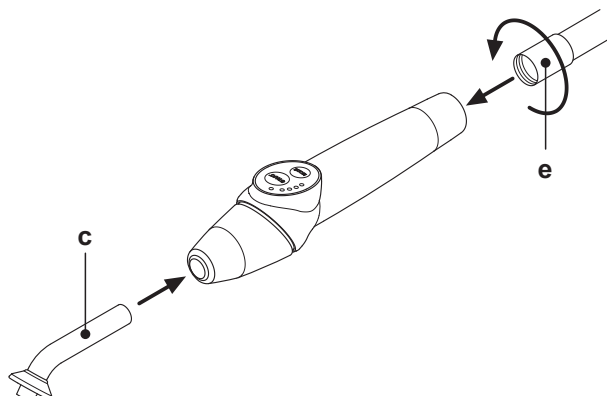

- Estrarre la lampada dal suo alloggiamento in tavoletta assistente o tavoletta medico.

NOTA: L'attivazione dello strumento viene evidenziato dalla comparsa sul TOUCH DISPLAY della relativa videata di gestione.

- Ruotare la parte anteriore della lampada e/o la fibra ottica nella configurazione più funzionale per la fotopolimerizzazione (a bacchetta, a pistola o posizioni intermedie).
- Selezionare il ciclo che si desidera utilizzare adoperando il pulsante MODE come indicato precedentemente (il ciclo selezionato viene sempre indicato dal corrispondente LED illuminato).

NOTA: la lampada è dotata di una memoria permanente, per cui al successivo utilizzo verrà sempre presentato l'ultimo ciclo adoperato.

- Posizionare la fibra ottica nella posizione adatta per la polimerizzazione.

NOTA: la fibra ottica deve essere posizionata il più possibile vicina al materiale da polimerizzare, senza tuttavia toccarlo.

- Far partire il ciclo mediante il pulsante START.

ATTENZIONE!

Modalità di impiego: lavoro 2 cicli consecutivi, riposo 60 sec.

NOTA: quando viene attivato un ciclo programmato i LED (1, 2, 3, B, R, L) segnalano (in multipli di 5 secondi) il trascorrere del tempo spegnendosi ogni 5 secondi di lavoro.

La lampada è dotata anche di un segnalatore acustico che emette un BEEP all'avvio del ciclo, un BEEP ogni 5 secondi di funzionamento ed infine 2 BEEP al termine del ciclo di lavoro.

- Lasciare che l'erogazione della luce si interrompa spontaneamente; tuttavia, qualora si desideri, è possibile interromperla in qualsiasi momento schiacciando nuovamente il pulsante START.

ATTENZIONE!

- La lampada è provvista di un sistema di segnalazione che mediante l'accensione dei LED in varie combinazioni segnala un suo eventuale malfunzionamento (vedi paragrafo successivo).
- La lampada è provvista di una protezione termica.

Segnalazioni.

In caso di malfunzionamento della lampada polimerizzante sono state previste le seguenti segnalazioni sulla pulsantiera di comando:



- **LED 5 e LED 1 verde acceso continuo.**
Assenza di emissione luce dalla lampada.
Contattare l'Assistenza Tecnica.
- **LED 5 e LED 2 verde acceso continuo.**
Malfunzionamento microcontrollore di attivazione strumento.
Contattare l'Assistenza Tecnica.
- **LED 5 e LED 3 verde acceso continuo.**
Alimentazione insufficiente.
Contattare l'Assistenza Tecnica.
- **LED 5 e LED 4 lampeggianti contemporaneamente.**
Intervento della protezione termica del manipolo. Tali LED continueranno a lampeggiare fino a che la lampada non si sarà raffreddata a sufficienza (circa 5 minuti) per poter essere nuovamente utilizzata.
Se il problema persiste, contattare l'Assistenza Tecnica.

Spessore massimo polimerizzabile.

Lo spessore massimo polimerizzabile con i singoli cicli è di 3 millimetri (fare riferimento anche alle istruzioni del composito utilizzato).

ATTENZIONE!

Tale spessore non deve essere superato, pena la possibile incompleta polimerizzazione dello strato.

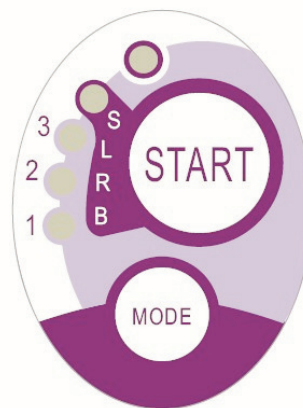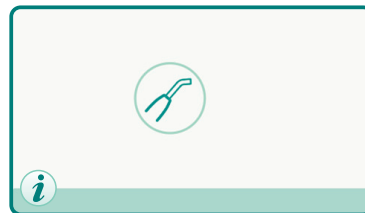

Avvertenze generali di utilizzo.



ATTENZIONE!

- Il LED fonte di luce è una sorgente di classe 2 secondo la norma IEC 62471. **NON FISSARE IL FASCIO.**
La luce emessa può danneggiare gli occhi in caso di irradiazioni dirette senza protezione.
 Utilizzare sempre la lampada con le protezioni per gli occhi, e fare attenzione a non dirigere il fascio di luce negli occhi.
La luce emessa può danneggiare i tessuti molli (mucosa orale, gengiva, cute).
 Fare attenzione a dirigere con precisione il raggio sul materiale da polimerizzare.
- Le persone che presentano patologie oculari come individui che hanno subito l'intervento di asportazione della cataratta o patologie della retina devono essere protette durante l'utilizzo della lampada, ad esempio con idonei occhiali di protezione.
- La parte terminale girevole può ruotare di 180° rispetto all'impugnatura in senso antiorario per passare dalla configurazione a bacchetta a quella a pistola.
 Per ritornare nella configurazione a bacchetta la rotazione è oraria.
Il raggiungimento delle due posizioni estreme è segnalato da uno scatto; non forzare la rotazione oltre lo scatto.
 Le posizioni intermedie sono possibili anche se non provviste di scatto.
Riposizionare correttamente la fibra ottica dopo la rotazione della parte terminale girevole.
- Non tirare i cordoni di alimentazione.**
- Non sottoporre il manipolo a vibrazioni eccessive.**
- Fare attenzione a non lasciar cadere il manipolo e in particolare la fibra ottica.**
La lampada può rompersi in caso di morso o urto accidentale.
 Verificare l'integrità del manipolo dopo un urto o una caduta prima di procedere all'uso della lampada polimerizzante.
 Provare ad accendere la lampada e verificarne il funzionamento senza utilizzarla su un paziente.
In caso di incrinatura o rottura, o di qualsiasi altra anomalia, non utilizzare la lampada su un paziente e contattare l'assistenza tecnica.
 La fibra ottica è particolarmente fragile e in caso di urto può incrinarsi o rompersi, compromettendo la quantità finale di luce erogata.
 In caso di caduta, si raccomanda di osservare con attenzione la fibra ottica per verificare la presenza di eventuali incrinature o rotture. In caso di cricatura, compare una luce intensa nel punto in cui la fibra è criccata. In tutti questi casi la fibra ottica deve essere sostituita.
- Il manipolo della lampada polimerizzante (eventualmente venduto in confezione separata) può essere connesso esclusivamente a riuniti odontoiatrici con attacco predisposto per questo manipolo lampada.**
La connessione a qualsiasi altra apparecchiatura può comportare il danneggiamento dei circuiti interni della lampada e può provocare gravi pericoli per la sicurezza dell'operatore e del paziente.
- Il manipolo della lampada polimerizzante non è protetto contro la penetrazione di liquidi (IP20).**
- Il manipolo della lampada polimerizzante non è adatto all'utilizzo in presenza di miscele di gas anestetico infiammabile con aria, ossigeno o protossido d'azoto (N₂O).**

Pulizia.

La lampada polimerizzante può costituire un mezzo di trasmissione di infezioni crociate da paziente a paziente.

Le parti che sono maggiormente contaminate sono la fibra ottica e la protezione per gli occhi. Prima di sterilizzarle, controllare che non vi siano residui di prodotti polimerizzati: eventualmente rimuoverli con alcool oppure tramite una spatola di plastica.

Per la sterilizzazione della fibra ottica e della protezione per gli occhi utilizzare esclusivamente l'autoclave con una temperatura di sterilizzazione di almeno 134°C.



ATTENZIONE!

- La fibra ottica è in grado di sopportare 500 cicli in autoclave, dopo di che tende a opacizzarsi, e potrebbe quindi emettere una quantità di luce inferiore.**
- Anche la protezione per gli occhi deve essere sostituita dopo 500 cicli.**
- Si raccomanda di rivolgersi al produttore per acquistare pezzi di ricambio originali (fibra ottica + protezione per gli occhi: codice di ordinazione 97660404).**

Il manipolo non può essere messo in autoclave; si raccomanda di disinfettarlo esternamente con prodotti appropriati ed eventualmente di adoperarlo coprendolo con pellicola monouso.

Per la disinfezione del manipolo utilizzare carta morbida monouso, evitando l'impiego di sostanze corrosive ed evitando l'immersione all'interno di liquidi.



ATTENZIONE!

- Il manipolo della lampada NON è idoneo ad essere messo in autoclave.**
- Il manipolo della lampada non è protetto dalla penetrazione di liquidi, quindi NON è idoneo ad essere sterilizzato a freddo per immersione.**
- Quando si disinfetta esternamente la lampada, è consigliabile effettuare tale operazione con la fibra ottica inserita.**
Non usare alcun tipo di disinfettante sulla superficie ottica esposta del manipolo quando la fibra è estratta; il contatto del disinfettante con questa superficie la rende opaca in modo irreparabile.

Manutenzione.

Nessuna particolare manutenzione è richiesta per questa apparecchiatura.

Qualunque sostituzione e/o riparazione, sia sul manipolo sia sul riunito, deve essere eseguita da tecnici autorizzati dal Produttore.

Il manipolo è stato deliberatamente costruito in modo da richiedere attrezzi specifici per l'apertura e non può quindi essere smontato dall'utente.

La manomissione del manipolo fa automaticamente decadere la garanzia.

Risoluzioni dei problemi.

- A lampada estratta, la lampada non si accende (nessun led acceso sulla pulsantiera).**
 Controllare che l'attacco Midwest sia correttamente collegato al cordone di alimentazione.
 Avvitare con cura la ghiera poi provare a reinserire la lampada e a ristrarla nuovamente.
 Se il problema persiste, contattare l'Assistenza Tecnica.
 - Emissione di una quantità di luce ridotta.**
 - Controllare che la fibra ottica non sia incrinata o comunque danneggiata; se lo è, va sostituita.
 Rivolgersi al produttore per avere parti di ricambio originali.
 - Controllare che non siano presenti residui polimerizzati sulla punta della fibra ottica; se presenti asportarli meccanicamente strofinando con alcool oppure con una spatola in plastica.
- Qualora vi sia la necessità di spedire il manipolo, si prega innanzitutto di disinfettarlo.
 Si raccomanda inoltre di spedirlo nell'imballaggio originale.
 Si prega infine gentilmente di allegare alla bolla di spedizione la descrizione del guasto in questione.

Smaltimento a fine vita.

- Non gettare l'apparecchiatura nei rifiuti normali.
- Rispettare le norme vigenti nel paese di utilizzo per il corretto smaltimento a fine vita dell'apparecchiatura.
- Data la possibilità di trasmissione di infezioni crociate, si consiglia di disinfettare l'apparecchiatura prima di disfarsene.

5.8. Telecamera endorale C-U2

C-U2 è una telecamera intraorale progettata appositamente per un semplice utilizzo nell'esame dentale intraorale, con un manipolo estremamente leggero, controllo automatico dell'esposizione a fuoco fisso. E' concepita per assistere il dentista nella comunicazione con il paziente, per spiegare e motivare il trattamento previsto e migliorare la consapevolezza del paziente. Il sistema C-U2 permette di fotografare in alta definizione (1280x720) le immagini di maggior interesse attraverso l'apposita area sensibile al tocco predisposta nel manipolo e visualizza le immagini intraorali su apposito monitor o Personal Computer.

⚠ ATTENZIONE!

La telecamera può essere utilizzata come ausilio alla diagnosi ma il risultato va confortato con l'osservazione diretta e/o altre indicazioni diagnostiche. Basarsi solo sull'immagine proveniente dalla telecamera potrebbe portare ad una cattiva valutazione in quanto i colori o le forme, elaborate elettronicamente, potrebbero non essere fedeli alla realtà.

Avvertenze di utilizzo.

⚠ ATTENZIONE!

- Il PC esterno ed il monitor esterno devono essere di grado medicale, ovvero devono essere certificati e conformi alla norma IEC 60601-1 3a Ed. e quindi in grado di garantire un doppio livello di isolamento per il paziente (2 MOPP) e per l'operatore (2 MOOP): - rispetto alla rete di alimentazione; - verso tutte le porte di I/O (USB, LAN) alimentate con tensione Safety Extra Low Voltage (SELV).
- Pur risultando irrilevante il campo elettromagnetico irradiato dal dispositivo, si consiglia comunque di non utilizzarlo in prossimità di apparecchiature per il sostegno della vita (es. pacemaker o stimolatori cardiaci) secondo quanto specificato nel manuale d'uso di tali apparecchiature.
- E' necessario utilizzare il dispositivo con l'apposita protezione monouso, che va sostituita per ogni nuovo paziente.
- Dopo aver applicato una nuova protezione monouso, verificarne l'integrità prima di utilizzare la telecamera, controllando se c'è evidenza di rottura. In questo caso, rimuoverla ed applicarne una nuova.
- Il manipolo non deve mai essere immerso in liquidi, o posto in autoclave, per nessun motivo.
- Conservare il manipolo in un posto pulito ed asciutto.
- Non forzare piegature eccessive del cavo di connessione.
- Prestare attenzione a non far cadere il manipolo e non esporlo a vibrazioni eccessive.
- Non utilizzare un manipolo danneggiato; accertarsi che la telecamera sia in buone condizioni, e non presenti parti taglienti, prima dell'utilizzo. In caso di dubbio, non utilizzare il manipolo, riportarlo con attenzione, e contattare l'assistenza tecnica.
- Prima dell'utilizzo, controllare l'integrità del vetrino di protezione dell'ottica.
- Non puntare la fonte di luce direttamente verso gli occhi dell'operatore o del paziente durante l'uso.
- Con l'uso continuativo (esempio, più di 10 minuti consecutivi) la temperatura della punta della telecamera è normale che aumenti significativamente; se questo causa disagio, il manipolo andrebbe riposto per alcuni minuti, per raffreddare la sorgente di luce. Per periodi d'utilizzo maggiore l'intensità luminosa andrebbe ridotta.
- Se lasciata in funzione per lunghi periodi, verificare prima dell'utilizzo che la punta sia ad una temperatura accettabile, toccando brevemente con un dito la parte plastica trasparente prestando attenzione a non toccare l'obiettivo posto al centro.
- Non tentare in alcun modo di piegare, tirare o smontare il manipolo.

Collegamento manipolo.

Inserire il manipolo della telecamera C-U2 (**a**) all'estremità del cordone ed avvitare la ghiera (**b**).

⚠ ATTENZIONE!

Verificare che il cordone sia ben avvitato sul manipolo.

Utilizzo della telecamera.

- Portare lo strumento in posizione di lavoro.
A questo punto la telecamera è attivata e può presentarsi in stato LIVE (il monitor mostra immagini "in movimento") o in stato FREEZE (il monitor mostra le ultime immagini "congelate"), più precisamente:
 - 1- stato LIVE in modalità multi immagine,
 - 2- stato FREEZE in modalità multi immagine,
 - 3- stato LIVE in modalità singola immagine,
 - 4- stato FREEZE in modalità singola immagine.

👉 NOTA: se la telecamera è in stato LIVE, riponendo lo strumento si ritorna alla videata principale.
Se la telecamera è in stato FREEZE, riponendo lo strumento rimane visualizzato il menu relativo.

- I principali tasti icona disponibili sul TOUCH DISPLAY sono i seguenti:



Accensione/spengimento led telecamera



Attivazione/disattivazione funzione MIRROR



Selezione modalità di funzionamento singola immagine o multi immagine





Accesso al pannello di controllo OSD



Selezione pagina di memorizzazione immagini (solo con funzionamento multi immagine)

👉 NOTA: per una una spiegazione sul funzionamento degli altri tasti icona visibili si rimanda ai paragrafi relativi alle varie modalità di funzionamento.

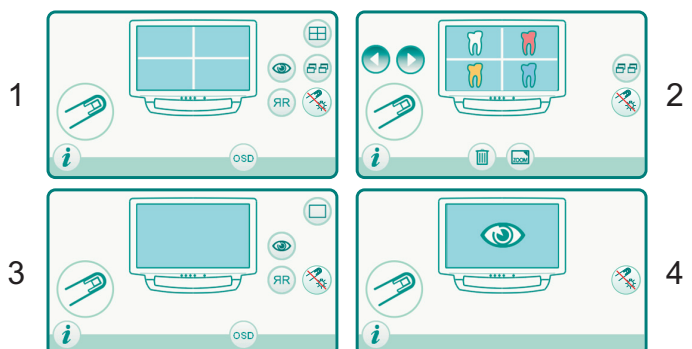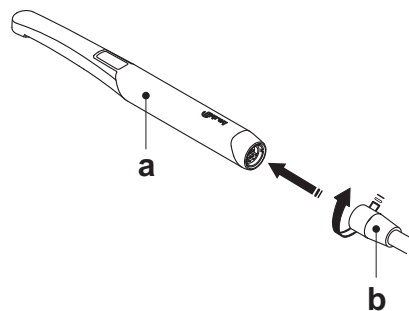

- Con una breve pressione del comando a piede è possibile fermare sul monitor da 1 a 16 immagini divise in 4 pagine.

NOTA: le immagini fermate sul monitor dalla telecamera vengono salvate in modo solo temporaneo. Qualora si desideri archiviare in modo permanente le immagini è necessario collegare la telecamera ad un PC conforme alla norma IEC 60950 che disponga di una porta USB 2.0 HIGH SPEED e di un programma software di gestione delle immagini.

Accensione led telecamera.

Toccando il tasto icona è possibile accendere/spegnere l'illuminazione a led della telecamera.

Sul TOUCH DISPLAY viene visualizzata l'icona relativa alla modalità attiva:




Led spento



Led acceso

Se necessario, regolare il livello dell'intensità luminosa toccando in maniera prolungata (almeno 2 secondi) il tasto icona e poi regolare l'intensità utilizzando i tasti icona o .

Per confermare l'intensità scelta è sufficiente uscire da questo sottomenu toccando il tasto icona .

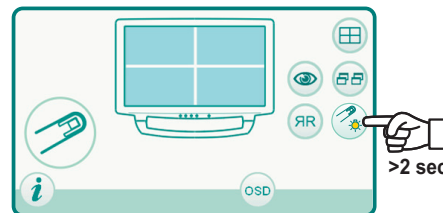

Funzione MIRROR.

Toccando il tasto icona è possibile passare dalla visione di immagini reali a quella di immagini speculari.

Sul TOUCH DISPLAY viene visualizzata l'icona relativa alla modalità attiva:

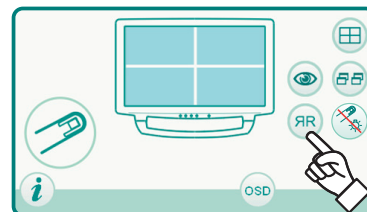


Immagine reale



Immagine speculare

NOTA: tale funzione è possibile solo in modalità LIVE.



Impostazione funzionamento modalità singola immagine o multi immagine.

Con la telecamera attivata ed in stato LIVE, toccando il tasto icona è possibile dalla modalità singola immagine a quella multi immagine.

Sul TOUCH DISPLAY viene visualizzata l'icona relativa alla modalità attiva:




Modalità singola immagine attiva



Modalità multi immagine attiva

NOTA: l'attivazione della modalità multi immagine è segnalata anche sul monitor da un'apposita icona posta nell'angolo in alto a destra.

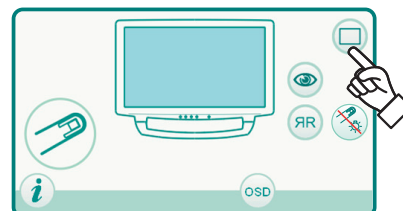

Funzione FREEZE (fermo immagine).


Con questa telecamera è possibile fermare (congelare) delle immagini sul monitor.

Questa funzione può essere attivata in vari modi:

- Azionando il comando a piede (vedere paragrafo 5.2.).
 - Premendo il pulsante a sfioramento [g] sul manipolo telecamera.
- vamente il pulsante o azionare nuovamente il comando a piede.

Successivamente la visualizzazione di queste immagini può avvenire in due modalità: **singola immagine** oppure **multi immagine**.

In quest'ultima modalità lo schermo del monitor viene diviso in quattro parti e vengono visualizzate contemporaneamente 4 immagini congelate.



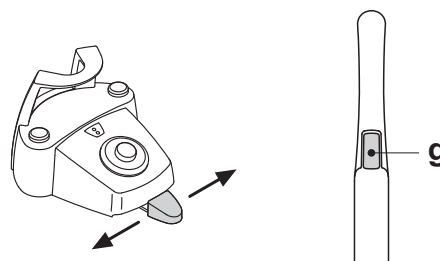


Funzionamento modalità singola immagine.

Estraendo la telecamera in stato *LIVE* e in modalità singola immagine, sul monitor viene visualizzata l'immagine "in movimento":

- premendo il pulsante a sfioramento [**g**] del manipolo telecamera (od azionando il comando a piede) si effettua il congelamento dell'immagine che viene immediatamente visualizzata sul monitor cancellando l'eventuale immagine precedente.
- toccando il tasto icona si visualizza l'ultima immagine congelata.

NOTA: l'ultima immagine congelata rimane visibile sul monitor anche se si ripone la telecamera.

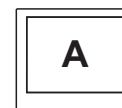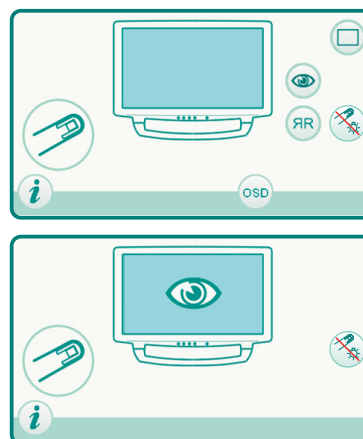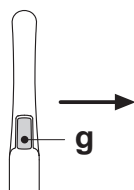

Funzionamento modalità multi immagine.

Estraendo la telecamera in stato *LIVE* e in modalità multi immagine, sul monitor viene visualizzata l'immagine "in movimento" e nell'angolo in alto a destra compare l'icona con il numero della pagina di memorizzazione attiva (es. 1):

- toccando il tasto icona si cambia la pagina di memorizzazione ruotando tra le 4 pagine disponibili,
- toccando il tasto icona si visualizzano le eventuali 4 immagini già presenti nella pagina di memorizzazione selezionata.

NOTA: al centro del monitor viene visualizzato il numero della pagina selezionata.

- memorizzazione dell'immagine: premendo il pulsante a sfioramento [**g**] del manipolo telecamera (od azionando il comando a piede) si effettua il congelamento dell'immagine che viene direttamente visualizzata sul monitor ponendola nella prima casella libera (es. A) della pagina attiva in quel momento. Ogni successiva immagine congelata viene posizionata nella casella successiva ruotando in senso orario.

NOTA: una volta riempite le 4 caselle disponibili, ogni successiva immagine congelata andrà a sostituire le esistenti sempre ruotando in senso orario.

NOTA: per salvare altre immagini senza cancellare le precedenti è sufficiente toccare il tasto icona e cambiare la pagina di memorizzazione attiva.





• in fase di visualizzazione (stato *FREEZE*):

- toccando il tasto icona si visualizzano in successione le 4 pagine disponibili,
- toccando i tasti icona o è possibile selezionare una delle 4 immagini presenti nella pagina visualizzata,
- toccando il tasto icona si visualizza a tutto schermo l'immagine selezionata.

NOTA: toccando nuovamente il tasto icona si torna alla visualizzazione con 4 immagini.

- toccando il tasto icona si cancella l'immagine selezionata.


NOTA: toccando il tasto icona per 3 secondi si cancellano tutte le 4 immagini presenti nella pagina visualizzata.

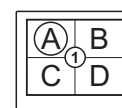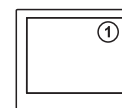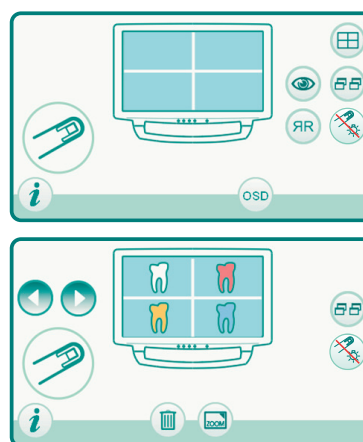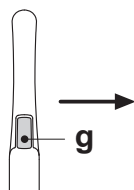

Stato del manipolo.

Nell'area del pulsante di comando (h) è presente una guida ottica illuminata da LED multicolore che mostra lo stato del manipolo durante l'utilizzo secondo la seguente tabella:

Colore	Situazione
Brevi impulsi blu molto lenti	Manipolo in standby
Azzurro fisso	Manipolo attivo, immagini video live visualizzate
Lampeggio blu/azzurro	Manipolo in fermo immagine
Brevi impulsi rossi	Errore diagnostica interna: contattare l'Assistenza Tecnica

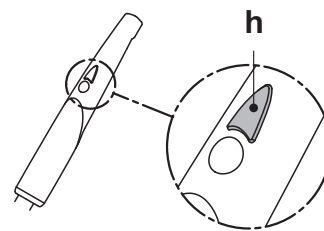

MyRay iCapture.

Questo programma permette di configurare la telecamera C-U2 quando viene collegata a un PC/WORKSTATION.

Per una completa descrizione sul funzionamento del programma MyRay iCapture si rimanda alle apposite istruzioni allegate, in formato elettronico, al manipolo C-U2.

Protezioni igieniche monouso.

La telecamera può costituire un mezzo di trasmissione di infezioni crociate da paziente a paziente.

Per questo si raccomanda di **utilizzarla sempre con le protezioni monouso** (cod.97901590) e di disinfettarla esternamente ogni giorno al termine del suo utilizzo.

La protezione (con una linguetta bianca) è racchiusa all'interno di due pellicole protettive: una anteriore, trasparente, con una linguetta blu, ed una posteriore, cartacea.

Per inserire correttamente la protezione monouso procedere come segue:

1. Inserire la parte distale del manipolo tra la pellicola con la linguetta Bianca e la pellicola posteriore cartacea. L'obiettivo, circondato dai LED, deve essere rivolto verso il basso, verso la pellicola posteriore, cartacea. Inserire gentilmente il manipolo fino a fondo.
2. Rimuovere le pellicole protettive tirando la linguetta blu.
3. La telecamera è ora protetta e pronta all'uso.



ATTENZIONE!

- Assicurarsi sempre che il manipolo sia correttamente inserito all'interno della protezione.
- Per garantire l'igiene degli utilizzatori e dei pazienti, si rammenta che la protezione monouso va sostituita ad ogni utilizzo.
- Smaltimento: le protezioni igieniche monouso vanno trattate come rifiuti speciali (come i guanti chirurgici).

Pulizia e disinfezione.

Pulire il manipolo dopo ogni uso utilizzando un prodotto idoneo: fare riferimento al paragrafo 1.4.



ATTENZIONE!

- La telecamera non è progettata per sterilizzazione a freddo per immersione, per esempio in soluzioni come glutaraldeide, o soluzioni di perossido d'idrogeno (acqua ossigenata).
- L'uso di qualsiasi prodotto deve essere fatto nel rispetto delle disposizioni date dal fabbricante.
- Ciò che viene utilizzato per la pulizia e la disinfezione deve essere gettato via al termine dell'operazione.

Manutenzione e riparazione.

Per la telecamera C-U2 non è necessaria alcuna manutenzione particolare. In caso di guasto, si prega di rispedire il manipolo completo.



ATTENZIONE!

Non vi sono parti riparabili sul campo. Qualora si presentasse un difetto di funzionamento, si prega di contattare un rivenditore autorizzato.


Gestione del reso.

- Si prega di rispedire eventuali dispositivi difettosi utilizzando i loro imballi originali. Non riutilizzare contenitori danneggiati.
- Per via del rischio di infezione crociata, è tassativo disinfettare il dispositivo prima di spedirlo. Manipoli non adeguatamente puliti e disinfettati non verranno accettati.



ATTENZIONE!

Il mittente si assume la responsabilità per eventuali danni all'apparecchio dovuti al trasporto, per dispositivi in garanzia o meno.

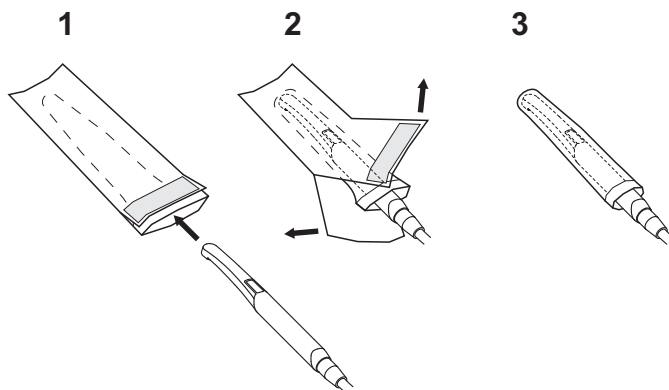

5.9. Sensore integrato ZEN-Xi

Il sensore integrato ZEN-Xi è un dispositivo medico per l'acquisizione in formato elettronico di radiografie endorali tramite l'interfacciamento ad un Personal Computer.

Con l'abbinamento di un programma di gestione dello studio odontoiatrico, sarà possibile archiviare le immagini radiografiche nella cartella del paziente e di visualizzarle successivamente sul monitor del Personal Computer.



ATTENZIONE!


Non utilizzare il sistema per usi diversi dall'acquisizione di radiografie endorali, e non utilizzarlo se non si è in possesso delle necessarie conoscenze in campo odontoiatrico e radiologico.

Utilizzo.

Le istruzioni di utilizzo e manutenzione del sensore integrato ZEN-Xi sono allegate all'apparecchiatura.



NOTA: Il sensore integrato ZEN-Xi non ha alcuna interazione elettrica con il complesso odontoiatrico.

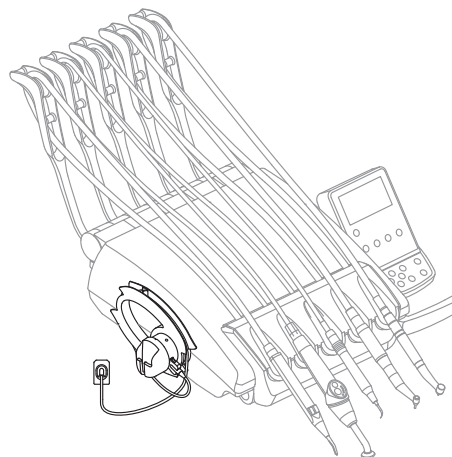

5.10. Pompa peristaltica

Questo dispositivo permette la distribuzione di una soluzione fisiologica attraverso una linea di irrigazione monouso senza contatto. Questo dispositivo è previsto in abbinamento solo con il micromotore.

NOTA: Per l'uso con il micromotore, è necessario l'impiego di contrangoli con raffreddamento esterno o per frese cave (tipo R20-L).

Descrizione dei simboli presenti sul dispositivo.

- 1) Materiale conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 93/42 CEE e successive modifiche intervenute.
- 2) ATTENZIONE: Pericolo di pizzicamento. Non mettere le dita negli elementi in rotazione.
- 3) Materiale sterilizzato con Ossido di Etilene.
- 4) Data di scadenza (aaaa-mm).
- 5) Materiale monouso.
- 6) Codice di identificazione del materiale.

Messa in servizio.

- Orientare ed inserire l'asta supporto flebo [a] nell'apposita sede e appendere il flacone o la bottiglia [b] contenente la soluzione fisiologica.
- Aprire la confezione della linea sterile d'irrigazione [c] ed estrarre il contenuto.



ATTENZIONE!

Utilizzare guanti sterili monouso.

Verificare l'integrità dell'imballaggio, nonché la scadenza della linea d'irrigazione. Solo i kit d'irrigazione CEFLA S.C. garantiscono un funzionamento privo di problemi. Queste linee sono sterili e monouso, un eventuale riutilizzo può comportare la contaminazione microbiologica del paziente.

- Aprire il coperchio [d] della pompa peristaltica ruotandolo verso l'alto.
- Inserire il tubo flessibile, facendo attenzione a posizionare il tratto di diametro maggiore all'interno delle sedi a V della pompa. La rotazione della pompa avviene in senso orario, posizionare il tubo in modo che il tratto proveniente dalla sacca entri dalla parte sinistra della pompa (vedi figura).
- Chiudere il coperchio [d]. Se la chiusura resiste, aprire nuovamente il coperchio e controllare la posizione del tubo.



ATTENZIONE!

Non far funzionare la pompa con il coperchio [d] aperto, pericolo di pizzicamento della dita.

- Forare il tappo del flacone [b] di soluzione fisiologica con l'estremità appuntita della linea di irrigazione [c].
- Fissare il tubo della linea di irrigazione sul cordone strumento utilizzando le apposite graffe in plastica fornite all'interno del kit sterile.



NOTA: utilizzare il tipo A per il cordone del detartatore e il tipo B per quello del micromotore.

Funzionamento.

Per attivare/disattivare il funzionamento della pompa peristaltica, occorre estrarre il micromotore e toccare il relativo tasto icona:



Pompa peristaltica non attiva



Pompa peristaltica attiva



NOTA: l'avvenuta attivazione è confermata da un BEEP sonoro e dalla comparsa nella casella a fianco del valore di soluzione fisiologica erogata



NOTA: l'avvenuta attivazione della pompa peristaltica è segnalata sul TOUCH DISPLAY anche da una specifica icona di segnalazione (vedere paragrafo 5.1.) che riporta anche il valore relativo alla quantità di soluzione fisiologica erogata.


Qualora fosse necessario, toccare i tasti icona o per modificare quantità di soluzione fisiologica erogata dalla pompa peristaltica.

NOTA: il valore impostabile varia da 1 a 5. La quantità di soluzione erogata associata ai valori impostabili è la seguente:

- valore 1: 35 cc/min circa,
- valore 2: 50 cc/min circa,
- valore 3: 70 cc/min circa,
- valore 4: 90 cc/min circa,
- valore 5: 100 cc/min circa.



NOTA: è possibile modificare quantità di soluzione fisiologica erogata dalla pompa peristaltica anche con lo strumento attivo.

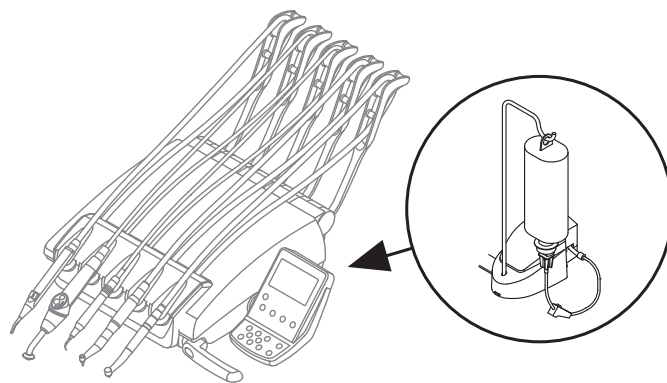



1 0051

3 5

2

4

6

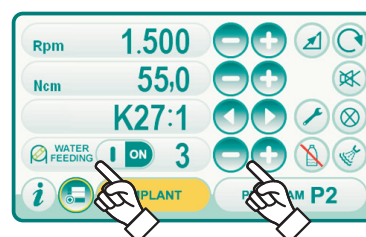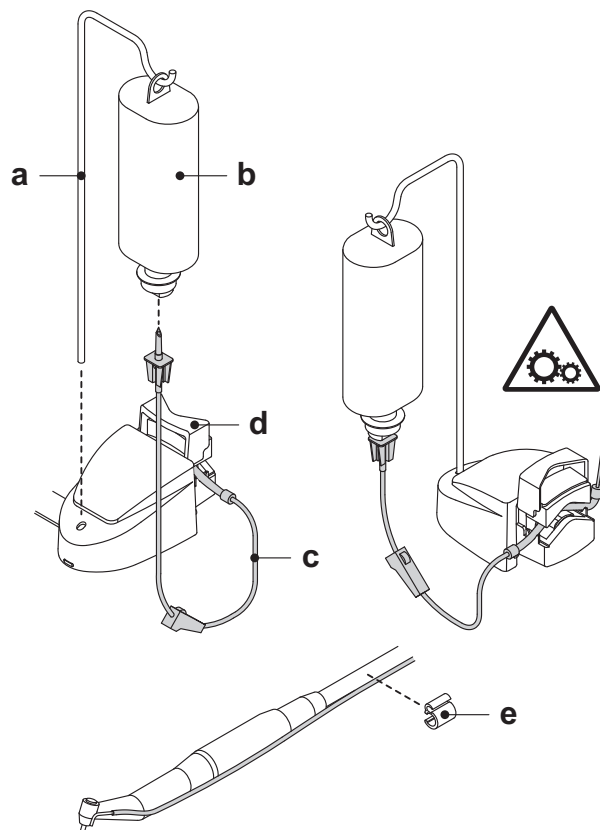

5.11. Localizzatore apicale elettronico (APEX LOCATOR)

L'APEX LOCATOR, tramite l'analisi delle variazioni di particolari segnali elettrici, è in grado di facilitare la localizzazione dell'apice radicolare. Se usato in abbinamento con un "file" (non fornito) per il trattamento manuale è importante ausilio nella misura della lunghezza del canale stesso.

Oltre al normale utilizzo manuale in questo complesso odontoiatrico è possibile usare il rilevatore apicale anche in abbinamento con le modalità "ENDO" dei micromotori e dell'ablattore. E' possibile monitorare la posizione degli strumenti utilizzati sui manipoli perché, attraverso i cordoni degli strumenti, i segnali del APEX LOCATOR vengono portati direttamente ai file, consentendo il monitoraggio della posizione nel canale durante i trattamenti.

Descrizione componenti.

- [1] Cablaggio esterno APEX LOCATOR.
- [1.1] Cablaggio esterno APEX LOCATOR - polo neutro.
- [1.2] Cablaggio esterno APEX LOCATOR - polo attivo.
- [2] Elettrodo a gancio.
- [3] Sonda.
- [4] Pinzetta collegamento clip APEX LOCATOR.
- [5] Presa per cablaggio esterno APEX LOCATOR.

Funzionamento.

- Su questo complesso odontoiatrico il APEX LOCATOR si attiva automaticamente all'inserimento del cablaggio esterno [1] nell'apposita presa [5] posizionata sotto la tavoletta medico.
- All'attivazione sul display compare il menu relativo all'impostazione della soglia di allarme (vedere paragrafo 5.1.1.2.11.).
- Applicazione degli elettrodi:
 - Connettere al polo neutro [1.1] l'elettrodo a gancio [2] e collocarlo sul labbro del paziente.
 - Connettere il polo attivo [1.2] al file (non fornito) inserito nel canale radicolare; la connessione al file può essere realizzata tramite la sonda [3] oppure tramite l'apposita pinzetta [4] oppure attraverso le predisposizioni realizzate per i manipoli.



ATTENZIONE!

Gli elettrodi non sono forniti allo stato sterile.

Indicazioni sul display.

- La bargraph a sinistra del display segnala la posizione del file rispetto all'apice. Le indicazioni numeriche "1, 2, 3" rappresentano la distanza relativa tra lo strumento e l'apice.
- l'icona APEX visualizza la distanza dello strumento dall'apice.



NOTA: l'indicazione " > 4 " segnala che il file è troppo distante dall'apice per poter essere misurato.

- l'icona ALARM visualizza la soglia di allarme impostata. La soglia d'allarme identifica la distanza tra lo strumento e l'apice oltre la quale viene generato un segnale sonoro che aumenta progressivamente man mano che ci si avvicina all'apice.

Per impostare la soglia d'allarme vedere paragrafo 5.1.1.2.11.

Durante l'introduzione del file nel canale le indicazioni sia grafiche che numeriche sono costantemente aggiornate.

APEX LOCATOR abbinato a micromotore elettrico.

E' possibile usare il APEX LOCATOR anche in abbinamento con il micromotore elettrico quando si trova in modalità ENDO.

Quando l'APEX LOCATOR è attivato, se si estrae il micromotore elettrico in modalità ENDO sul display appaiono contemporaneamente sia le informazioni relative al micromotore sia quelle relative al APEX LOCATOR (bargraph e valore APEX).

Durante il funzionamento del micromotore elettrico i tasti sono associati alle funzioni dello strumento e quindi non è possibile modificare la soglia di allarme dell'APEX LOCATOR se non riposizionando lo strumento stesso.

Rilevazione della lunghezza del canale radicolare.

- L'uso del file manuale è di primaria importanza per la rilevazione del canale. La procedura corretta prevede di inserire il file dentro al canale e avanzare fino ad ottenere l'indicazione 0.5.
- Avanzare ulteriormente il file con una lenta rotazione in senso orario fino ad ottenere l'indicazione APEX sullo strumento.
- Ottenuta l'indicazione APEX arretrare il file ruotandolo in senso antiorario fino ad ottenere nuovamente il valore 0.5. Posizionare lo stop di gomma in corrispondenza della superficie occlusale come punto di riferimento per determinare la lunghezza di lavoro all'interno del canale radicolare.
- Effettuare una radiografia per verificare il corretto posizionamento del file.
- Estrarre il file dal canale e misurare la lunghezza di lavoro tramite un righello. Sottrarre alla misura rilevata una quota di sicurezza di 0.5-1 mm.






ATTENZIONE!

Utilizzare l'APEX LOCATOR sempre in combinazione con l'indagine radiologica per determinare con la massima accuratezza la posizione dell'apice. Situazioni morfologiche differenti e non sempre prevedibili, potrebbero portare ad indicazioni non sempre precise.

Ad esempio:

- canale radicolare eccessivamente largo;
- ritrattamenti;
- radici fratturate;
- presenza di corone metalliche.

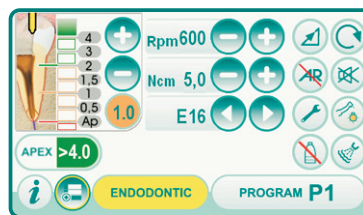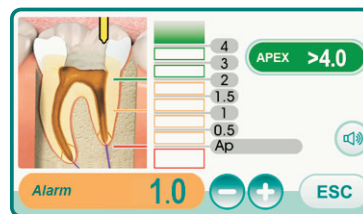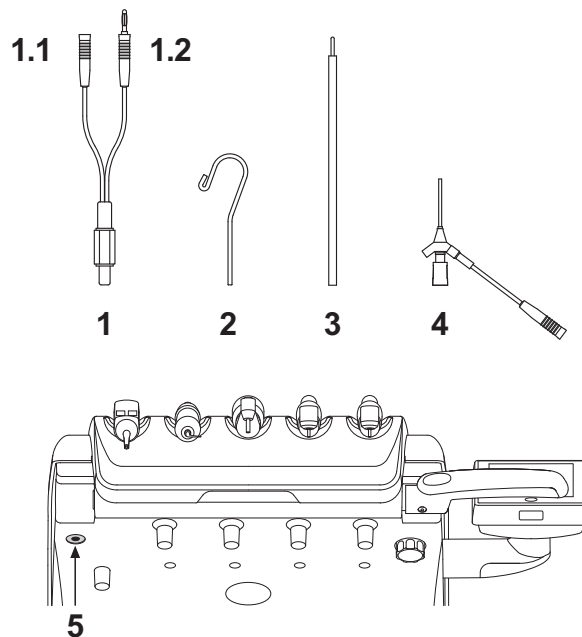

6. Funzionamento tavoletta assistente

Caratteristiche principali.

- La tavoletta (a) è vincolata al gruppo idrico (b) per mezzo di due bracci snodati che ne consentono il posizionamento nella zona più consona all'operatore. Il braccio fisso (c) può ruotare attorno alla bacinella di 120°. Il braccio a pantografo (e) permette una escursione verticale della tavoletta assistente di 335 mm attraverso 6 posizioni di lavoro.


NOTA: per riportare la tavoletta assistente alla posizione tutta bassa è sufficiente alzarla portandola nella posizione tutta alta e successivamente abbassarla.

- La tavoletta (a) è dotata di una consolle di comando (d) provvista di pulsanti per il comando delle funzioni della poltrona e del gruppo idrico.
- La tavoletta assistente può essere equipaggiata con 2 cannule di aspirazione e 3 strumenti.
- La tavoletta assistente è dotata di rulli scorrevoli (f) per la guida ed il supporto dei tubi delle cannule di aspirazione.

Pulizia rulli scorrevoli.

Sfilare i rulli scorrevoli (f) premendo verso il basso.

Pulire i rulli scorrevoli utilizzando un prodotto idoneo: fare riferimento al paragrafo 1.4.

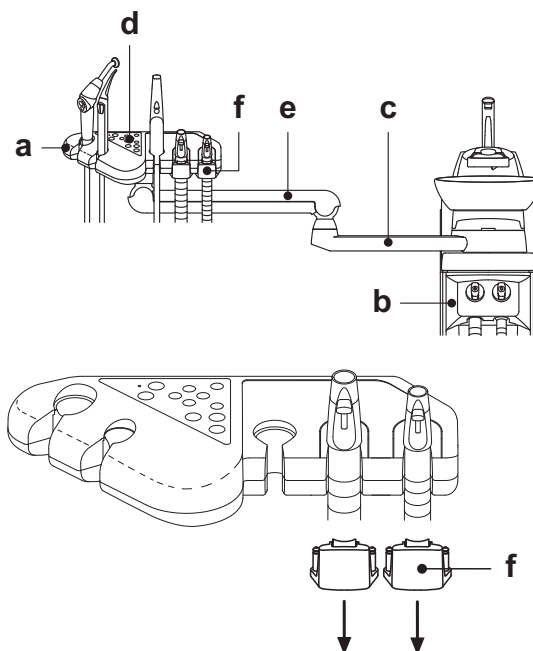

6.1. Consolle tavoletta assistente

Descrizione pulsanti:



Pulsante di accensione/spengimento lampada operatoria



Pulsante comando di erogazione acqua al bicchiere



Pulsante comando di erogazione acqua alla bacinella



Pulsante richiamo posizione di azzeramento



Pulsante richiamo posizione risciacquo



Pulsante salita sedile e richiamo posizione programmata A



Pulsante salita schienale e richiamo posizione programmata B



Pulsante discesa sedile e richiamo posizione programmata C




Pulsante discesa schienale e richiamo posizione di emergenza D



Pulsante attivazione veloce ciclo BIOSTER
(con relativo LED spia)



Pulsante inserimento/esclusione sistema S.H.S.
(con relativo LED spia)

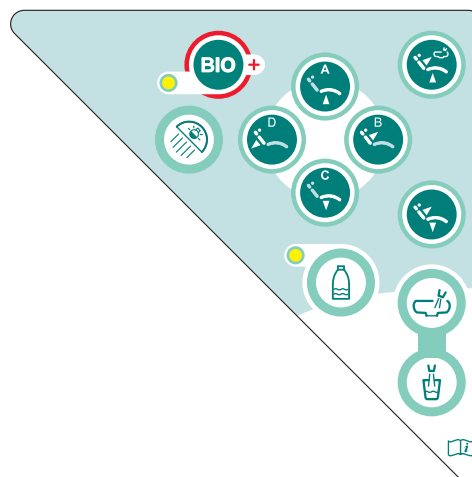


NOTA: funzionamento dei pulsanti di movimentazione poltrona:

- Breve pressione: attivazione movimento automatico di richiamo della posizione programmata.
- Pressione prolungata: attivazione movimento di posizionamento manuale.


6.2. Siringa a tavoletta assistente

Per il funzionamento di questo strumento vedere paragrafo 5.3.

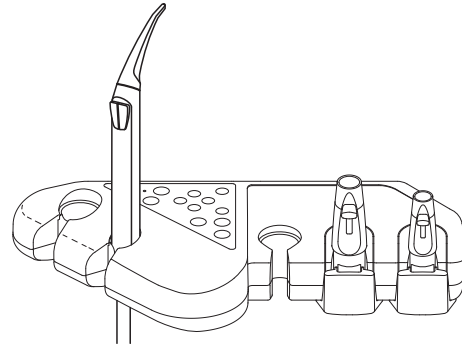


6.3. Lampada polimerizzante a tavoletta assistente

Per il funzionamento di questo strumento vedere paragrafo 5.7.

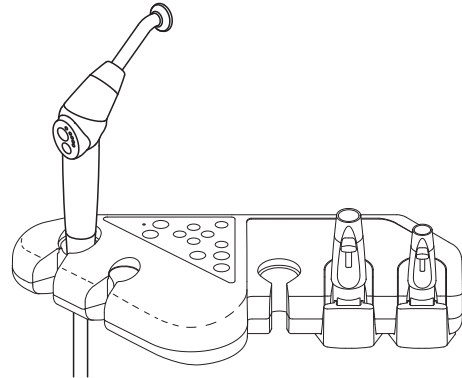

6.4. Telecamera endorale a tavoletta assistente

Per il funzionamento di questo strumento vedere paragrafo 5.8.

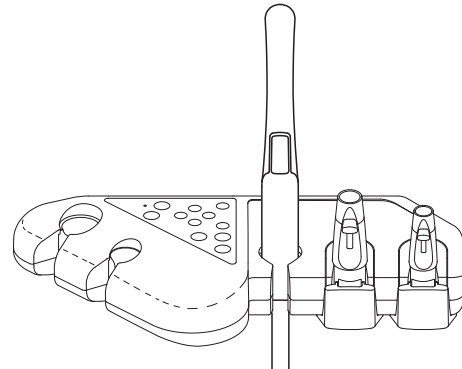

6.5. Tubi di aspirazione

L'aspiratore entra in funzione estraendo il tubo dal supporto.
Per variare la potenza di aspirazione agire sul cursore (**a**) posto sull'impugnatura del terminale porta-cannula.

NOTA: riponendo il tubo nel supporto si ottiene l'arresto dell'aspiratore con un ritardo pari a 2 secondi circa. Tale ritardo è stato previsto per consentire l'asciugatura dei tubi di aspirazione.

Lavaggio Cannule.

Poiché sui riuniti possono essere montati diversi sistemi di aspirazione (ad anello liquido o umido, ad aria), per la disinfezione dell'impianto di aspirazione si raccomanda di attenersi rigorosamente alle istruzioni del fabbricante del sistema di aspirazione, per quanto riguarda sia il prodotto da utilizzare, sia i tempi e i modi di utilizzo.



ATTENZIONE!

Per la pulizia dell'impianto di aspirazione si raccomanda l'uso di **STER 3 PLUS (CEFLA S.C)** diluito in soluzione al 6% (equivalente a 60 ml di prodotto in 1 litro di acqua).

Smontaggio tubi di aspirazione.



ATTENZIONE!

Procedere allo smontaggio delle cannule indossando i guanti per prevenire eventuali contatti con materiale infetto.

Estrarre i tubi di aspirazione dagli appositi innesti del convogliatore effettuando una manovra di rotazione e trazione sull'attacco del tubo.

Separare i tubi di aspirazione dai terminali porta-cannula effettuando una manovra di rotazione e trazione sull'attacco del tubo.



ATTENZIONE!

Non effettuare mai questa operazione afferrando direttamente il tubo di aspirazione.

Sterilizzazione.

- Terminali porta-cannula: autoclave a vapore d'acqua a 135 °C (2 bar) rispettando le istruzioni dell'apparecchiatura.
- Tubi di aspirazione: sterilizzazione a freddo per immersione.



ATTENZIONE!

Non sottoporre i tubi a procedure che prevedano temperature superiori a 55°C.




Manutenzione.

Lubrificare periodicamente le guarnizioni O-Ring dei terminali porta-cannula (vedi paragrafo 9.4.) utilizzando il lubrificante **S1-Protettivo per O-Ring (CEFLA S.C.)**.

Note sulla biocompatibilità.

Devono essere impiegate solo le cannule che vengono fornite a corredo e successivamente solo cannule di ricambio originali.

Le cannule di aspirazione devono essere conformi alla Norma sulla Biocompatibilità EN 10993-1.

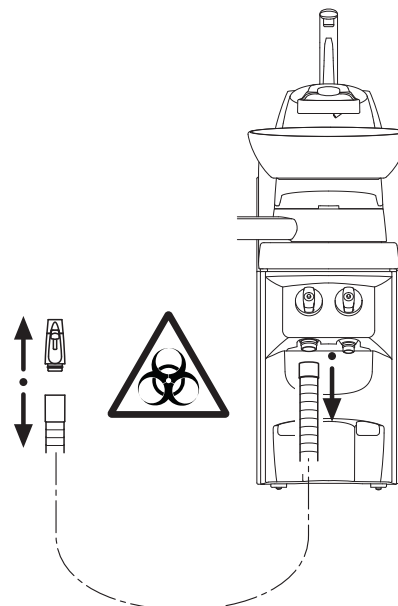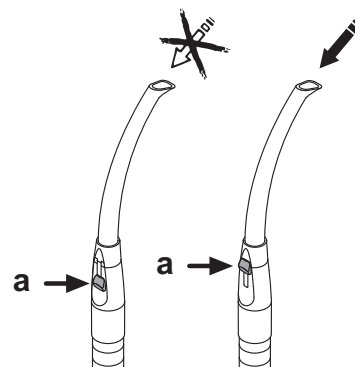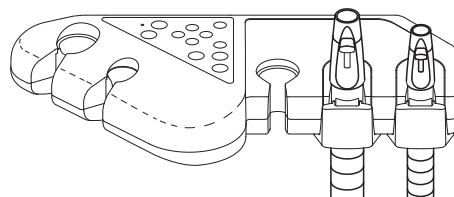

6.6. Vassoio portatray a tavoletta assistente


Il vassoio portatray (**a**) è in acciaio inox e può essere agevolmente tolto dal relativo supporto.

Il supporto vassoio può ruotare sia in senso orario che antiorario onde permettere il suo posizionamento nella zona più consona per l'operatore. Per bloccare/sbloccare il supporto vassoio è sufficiente agire sul pomello di frizionamento (**b**).



ATTENZIONE!

Carico massimo ammesso sul vassoio portatray: 1 Kg distribuito.

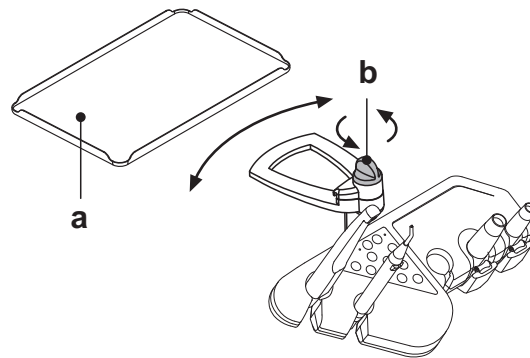

6.7. Aspirasaliva idraulico

L'aspirasaliva idraulico entra in funzione estraendo il tubo dal supporto.

Pulizia dopo ogni utilizzo.

Aspirare circa mezzo litro di STER 3 PLUS (CEFLA S.C) diluito in soluzione al 6% (equivalente a 60 ml di prodotto in 1 litro di acqua).

Pulizia filtro aspirasaliva.

Questa operazione deve essere effettuata giornalmente al termine della giornata lavorativa.





ATTENZIONE!

Indossare i guanti prima di effettuare questa operazione!

- Aspirare circa mezzo litro di STER 3 PLUS diluito in soluzione al 6% (equivalente a 60 ml di prodotto in 1 litro di acqua).
- Onde evitare possibili gocciolamenti di liquidi e secreti dal filtro (**b**) che verrà estratto, aspirare solo aria per circa 5 secondi.
- Togliere il terminale (**a**) operando una manovra di rotazione e trazione contemporanea.
- Estrarre il filtro (**b**).
- Pulire/sostituire il filtro (codice 97290060).
- Rimontare il filtro e il terminale.

Manutenzione periodica.

Lubrificare la guarnizione O-Ring (**c**) utilizzando il lubrificante **S1-Pro-tettivo per O-Ring**.

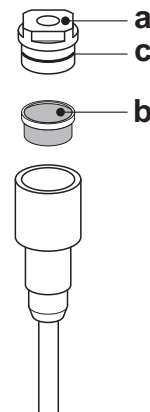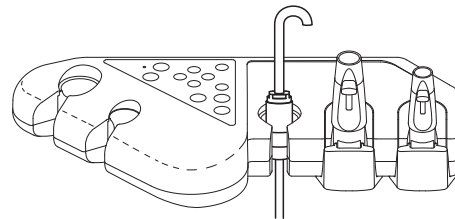

7. Funzionamento gruppo idrico

7.1. Bacinella e riempimento bicchiere

La bacinella può ruotare liberamente sull'idrico di 305° con movimentazione manuale o motorizzata (optional).
La bacinella e la fontanella acqua al bicchiere possono essere tolte per agevolare le operazioni di pulizia.

Pulsanti di comando.



Pulsante comando di erogazione acqua al bicchiere.



Pulsante comando di erogazione acqua alla bacinella.

Sensore bicchiere.

Alla base della fontanella bicchiere è presente un sensore ottico che rileva la presenza del bicchiere e ne attiva automaticamente il riempimento.

Il funzionamento del sensore è il seguente:

- posto il bicchiere sotto la fontanella, dopo 2 secondi inizia l'erogazione dell'acqua per una durata di 2 secondi (questo tempo non è modificabile),
- una volta tolto il bicchiere, il ciclo di riempimento può essere ripetuto solo dopo 3 secondi,
- durante il ciclo di riempimento, togliendo il bicchiere e/o premendo il pulsante EROGAZIONE ACQUA AL BICCHIERE si interrompe immediatamente l'erogazione dell'acqua.

NOTA: per disabilitare il sensore bicchiere vedere il paragrafo 5.1.1.2.2.2.

Regolazione livello acqua al bicchiere.

Vedere il paragrafo 5.1.1.2.2.2.

Regolazione temperatura acqua al bicchiere.

Vedere il paragrafo 5.1.1.2.2.2.

Impostazione lavaggio bacinella.

L'erogazione dell'acqua alla bacinella può avvenire in maniera temporizzata o manuale (erogazione ON/OFF tramite una breve pressione del relativo pulsante di comando).

Per impostare il funzionamento desiderato ed il tempo di erogazione acqua vedere il paragrafo 5.1.1.2.2.1.

Impostazione del funzionamento automatico del lavaggio bacinella.

Il lavaggio bacinella entra in funzione automaticamente nei seguenti casi:

- premendo il pulsante "Erogazione acqua al bicchiere",
- premendo il pulsante "Posizione di azzeramento per la poltrona",
- premendo il pulsante "Posizione di risciacquo per la poltrona".

Per modificare tale funzionamento vedere il paragrafo 5.1.1.2.2.1.

Movimentazione bacinella motorizzata.



Pulsante comando movimentazione bacinella in senso antiorario.



Pulsante comando movimentazione bacinella in senso orario.

NOTA: la bacinella può essere movimentata anche manualmente agendo direttamente sulla bacinella stessa.

Movimenti automatici della bacinella (solo con bacinella motorizzata).



La bacinella si muove automaticamente nei seguenti casi:

- premendo il pulsante "Posizione di risciacquo per la poltrona",

NOTA: in questo caso la posizione della bacinella è anche instabile (vedere il paragrafo 5.1.2.).

- premendo il pulsante "Posizione di azzeramento per la poltrona".

Per modificare tale funzionamento vedere il paragrafo 5.1.1.2.2.3.

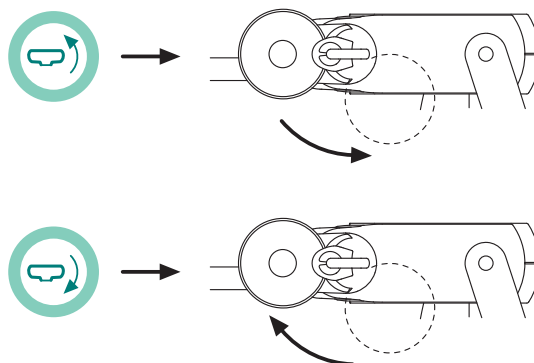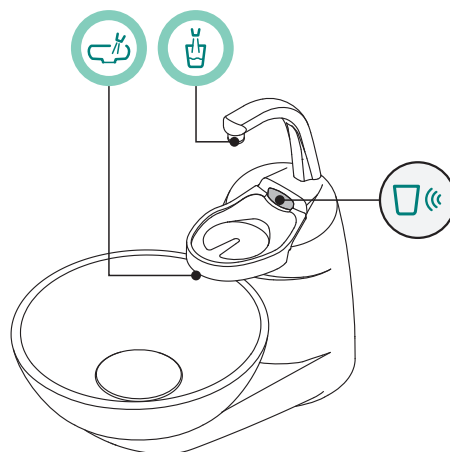

Smontaggio fontanella, bacinella e filtro bacinella.

- Estrarre la fontanella (**l**) sollevandola verso l'alto.
- Estrarre il filtro (**q**) ed il suo coperchio (**p**) dalla bacinella sollevandoli verso l'alto.
- Togliere la bacinella (**m**) sollevandola verso l'alto dopo averla sganciata ruotandola in senso antiorario.

Disinfezione e pulizia.



ATTENZIONE!

Procedere alle operazioni di pulizia della bacinella e del filtro bacinella indossando i guanti per prevenire eventuali contatti con materiale infetto.


Le operazioni di pulizia vanno effettuate giornalmente, al termine della giornata lavorativa.

- Fontanelle e bacinella: lavare accuratamente con un prodotto anticalcare specifico (ad esempio MD 550 Orotol DÜRR).
- Filtro bacinella: pulire sotto acqua corrente detergendolo con detersivi commerciali.



ATTENZIONE!

Non impiegare prodotti abrasivi o acidi.

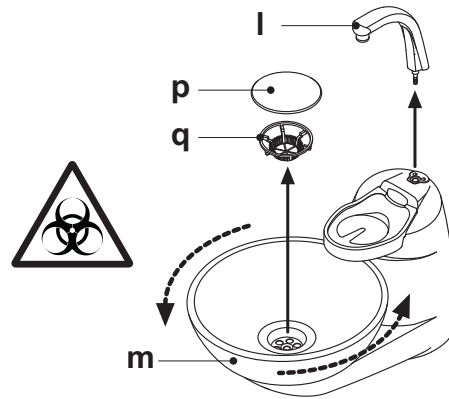

7.2. Sistema S.H.S.



Descrizione del sistema.


Il sistema S.H.S. è dotato di un serbatoio (**a**) idoneo a contenere acqua distillata.


Il serbatoio ha una capacità complessiva di 1,8 litri.

L'acqua distillata alimenta:

- gli spray di tutti gli strumenti posti sulla tavoletta medico ed assistente,
- la siringa posta sulla tavoletta assistente,
- il riempimento del bicchiere,
- l'attacco rapido dell'acqua (se presente).

Il tasto icona  sul TOUCH DISPLAY (vedere paragrafo 5.1.1.2.8.) o il pulsante  presente sulla pulsantiera della tavoletta assistente permettono di inserire/escludere l'alimentazione con acqua distillata.

 **NOTA:** lo stato di alimentazione con acqua distillata è evidenziato dalla presenza dell'icona (**A**) sul display console.

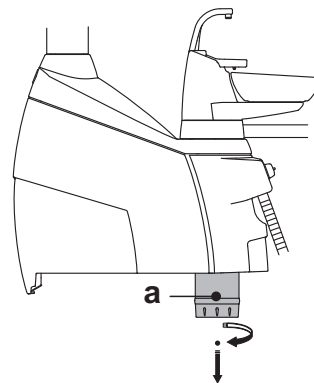



Segnalazione riserva serbatoio.


Quando il liquido presente nel serbatoio scende sotto il livello di riserva, sulla consolle della tavoletta medico compare una apposita icona di segnalazione (**B**).

Riempimento del serbatoio.

Al raggiungimento del livello minimo del serbatoio (circa 500 cc.), occorre procedere al suo riempimento operando come segue:

- Escludere il sistema S.H.S. toccando il tasto icona  o premendo il pulsante .

Verificare la scomparsa dell'icona (**B**) sul display console.

 **NOTA:** durante questa operazione l'aria in pressione contenuta nel serbatoio si scaricherà automaticamente all'esterno.

- Togliere il serbatoio (**a**) ruotandolo in senso orario.
- Versare nel serbatoio acqua distillata sino al raggiungimento del livello massimo.



ATTENZIONE!



Utilizzare solo acqua distillata, che per maggiori garanzie igieniche può essere addizionata con 600 parti per milione di perossido di idrogeno (ppm) utilizzando 20 ml di Peroxy Ag+ per litro di acqua distillata, oppure acqua ossigenata (20 ml di acqua ossigenata al 3% per 1 litro di acqua distillata).

- Montare nuovamente il serbatoio ruotandolo in senso antiorario.



ATTENZIONE!

Assicurarsi che il serbatoio sia serrato correttamente.

- Toccare il tasto icona  o premere il pulsante  per inserire nuovamente il sistema S.H.S. e confermare l'avvenuto riempimento. Verificare la presenza dell'icona (**A**) sul display console.




ATTENZIONE!

In caso di lunghe assenze dallo studio (ferie) è necessario, prima della partenza, svuotare completamente il serbatoio (**a**)

Pulizia del serbatoio.

Si consiglia di disinfettare periodicamente (almeno 1 volta al mese) a freddo il solo serbatoio utilizzando un prodotto a base di acido peracetico ed operando come segue:

- togliere il serbatoio dal riunito e svuotarlo completamente,
- preparare la soluzione del prodotto a base di acido peracetico seguendo le istruzioni del fabbricante,
- riempire il serbatoio fino all'orlo con la soluzione di acido peracetico,
- lasciare permanere la soluzione di acido peracetico all'interno del serbatoio per il tempo prescritto dal fabbricante,
- svuotare il serbatoio dalla soluzione di acido peracetico,
- sciacquare il serbatoio con acqua distillata,
- riempire il serbatoio con acqua distillata eventualmente addizionata come indicato precedentemente,
- riporre il serbatoio nell'apposita sede del riunito.

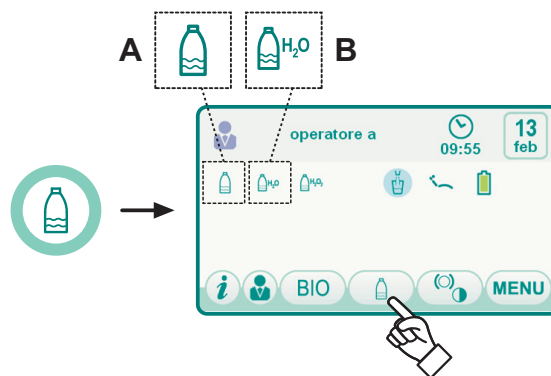

7.3. Sistema W.H.E. (Water Hygienisation Equipment)

Il sistema W.H.E. garantisce una separazione sicura, in modo fisico, del sistema idrico del complesso odontoiatrico dalla rete idrica pubblica, grazie ad un tratto a caduta libera dell'acqua (conforme a norma EN 1717).

Inoltre il sistema realizza l'immissione in continuo nel circuito idrico di perossido di idrogeno con una concentrazione finale nelle condotte pari a 0,06% (600 ppm), idonea a realizzare la batteriostasi.

A questo fine, si raccomanda l'uso di **PEROXY Ag+** (CEFLA S.C); tuttavia è possibile anche utilizzare acqua ossigenata al 3%.

Descrizione del sistema.


Il sistema WHE è posizionato all'interno della cassetta allacciamenti ed è sempre attivo.

Il sistema, inoltre, è dotato di un serbatoio (**a**) posto all'interno dell'idrico ed idoneo a contenere circa 590 cc. di acqua ossigenata.

Una specifica icona (**G**) segnala sul TOUCH DISPLAY che il sistema W.H.E. è in funzione.



NOTA: il sistema W.H.E. si disinserisce automaticamente quando si attiva il sistema S.H.S. (se presente).

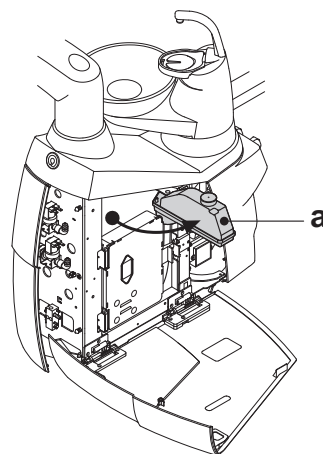


Segnalazione liquido disinfettante in esaurimento.

Quando il liquido disinfettante presente nel serbatoio (**a**) si sta per esaurire, sul TOUCH DISPLAY compare una specifica icona di segnalazione (**H**), sul display compare un messaggio di errore e vengono emessi 3 BEEP di avvertimento che si ripetono ad ogni accensione del complesso odontoiatrico.



ATTENZIONE!

In caso di esaurimento del liquido disinfettante, l'unità operatoria rimane comunque funzionante ma utilizza acqua di rete NON trattata. Si raccomanda di intervenire rapidamente e rabboccare il serbatoio del disinfettante nel più breve tempo possibile.

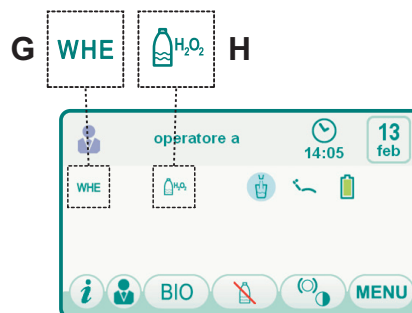

Riempimento del serbatoio contenente liquido disinfettante.

Quando il liquido disinfettante nel serbatoio si esaurisce, occorre procedere come segue:

Complessi odontoiatrici serie A7 Plus

- Aprire il carter laterale idrico (vedere paragrafo 7.7.).
- Ruotare il serbatoio (**a**) dell'acqua ossigenata.
- Togliere il tappo svitandolo in senso antiorario e versare acqua ossigenata nel serbatoio sino al suo completo riempimento.
- Riposizionare il tappo e il serbatoio.
- Infine richiudere il carter laterale idrico.



ATTENZIONE!

Per il rifornimento utilizzare solamente PEROXY Ag+ oppure acqua ossigenata al 3% (10 volumi) puri, senza diluire.

Svuotamento circuito idrico sistema W.H.E.

Questa funzione permette di svuotare il circuito idrico del sistema W.H.E. qualora il complesso odontoiatrico debba rimanere spento per molti giorni. Per la procedura di svuotamento vedere il paragrafo 5.1.1.2.1.3.

Messaggi di errore sul display consolle.

Se il sistema rileva una condizione di funzionamento anomalo visualizza sul display un messaggio di errore (vedere paragrafo 10.).

Se l'errore rilevato è marginale il complesso odontoiatrico rimane comunque funzionante, se invece l'errore rilevato è grave il complesso odontoiatrico risulta bloccato ed occorre chiamare l'Assistenza Tecnica.

Conservazione del PEROXY Ag+.

Per una corretta conservazione del **PEROXY Ag+** attenersi alle istruzioni del fabbricante riportate sulla confezione.

È importante tenere la confezione ben chiusa e riporla in un luogo fresco (temperatura non superiore a 25°C).



ATTENZIONE!

Mai lasciare il PEROXY Ag+ o l'acqua ossigenata per più di un mese all'interno del serbatoio (**a).**

In caso di lunghe assenze dallo studio (ferie) è necessario, prima della partenza, svuotare completamente il serbatoio (**a).**



NOTA: per lo svuotamento del serbatoio si consiglia di utilizzare una cannula di aspirazione.

7.4. Sistema automatico di disinfezione BIOSTER

Descrizione del sistema.

Questo sistema permette di eseguire un ciclo automatico di disinfezione dei circuiti idrici dei seguenti strumenti:

- tutti gli strumenti posti sulla tavoletta medico,
- la siringa posta sulla tavoletta assistente,
- le cannule di aspirazione (se presente il sistema per il lavaggio delle cannule di aspirazione),
- le condotte dell'acqua al bicchiere.

Il sistema, inoltre, è dotato di un serbatoio (**a**) posto all'interno dell'idrico ed idoneo a contenere circa 590 cc. di acqua ossigenata.

Il ciclo di disinfezione è impostabile ed è provvisto di un sistema elettronico di sicurezza conforme alla Direttiva Medical Device CEE 93/42 e successive modifiche intervenute.



ATTENZIONE!

Eseguire un ciclo di disinfezione al termine di ogni giornata di lavoro.

Segnalazione liquido disinfettante in esaurimento.

Quando il liquido disinfettante presente nel serbatoio (**a**) si sta per esaurire, sul TOUCH DISPLAY compare una specifica icona di segnalazione (**H**), sul display compare un messaggio di errore e vengono emessi 3 BEEP di avvertimento che si ripetono ad ogni accensione del complesso odontoiatrico.

Riempimento del serbatoio contenente liquido disinfettante.

Quando il liquido disinfettante nel serbatoio si esaurisce, occorre procedere come segue:

Complessi odontoiatrici serie A7 Plus

- Aprire il carter laterale idrico (vedere paragrafo 7.7.).
- Ruotare il serbatoio (**a**) dell'acqua ossigenata.
- Togliere il tappo svitandolo in senso antiorario e versare acqua ossigenata nel serbatoio sino al suo completo riempimento.
- Riposizionare il tappo e il serbatoio.
- Infine richiudere il carter laterale idrico.



ATTENZIONE!

Per il rifornimento utilizzare solamente PEROXY Ag+ oppure acqua ossigenata al 3% (10 volumi) puri, senza diluire.

Impostazione del ciclo di disinfezione.

- Verificare livello di liquido disinfettante presente nel serbatoio e, se necessario, aggiungerne.



NOTA: il ciclo di disinfezione non si attiva se il livello di liquido presente nel serbatoio è inferiore alla riserva.

- Utilizzando il TOUCH DISPLAY o premendo in maniera prolungata (almeno 2 secondi) il pulsante BIO posto sulla tavoletta assistente, entrare nel menu "Impostazione ciclo di disinfezione BIOSTER" ed impostare il tempo di permanenza del liquido disinfettante all'interno delle condotte idriche degli strumenti (vedere paragrafo 5.1.1.2.1.1.).
- Posizionare sopra la bacinella l'apposito contenitore (**d**) degli strumenti da disinfettare.
- Inserire nel contenitore i cordoni degli strumenti da disinfettare.



ATTENZIONE!

Per lo strumento siringa occorre utilizzare l'apposito adattatore (**f**) e deve avere il sistema di riscaldamento spento.

Il cordone del micromotore deve essere inserito completo di corpo motore.




Il cordone della turbina e del detartatore devono essere inseriti senza manipolo.

- Se si vuole disinfettare i tubi di aspirazione, inserire i terminali cannule negli appositi attacchi posti sotto il collettore (vedere paragrafo 7.5.).



NOTA: verificare che i terminali cannule siano aperti.

- Se è selezionata la disinfezione della condotta acqua bicchiere, inserire sotto la fontanella bicchiere l'apposito contenitore (**e**) dato in dotazione.
- Assicurarsi che i rubinetti degli spray (**g**), posti nella parte inferiore della tavoletta, siano aperti.

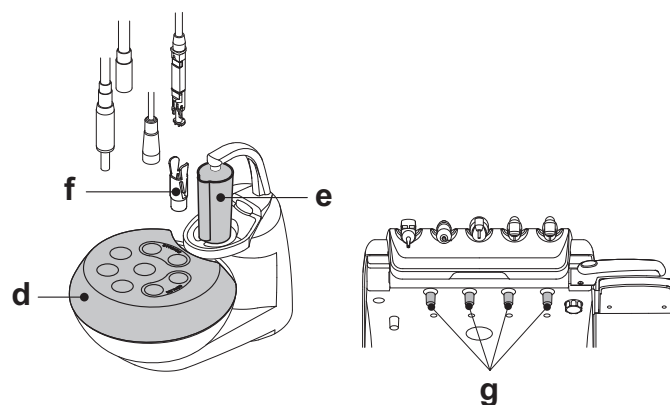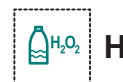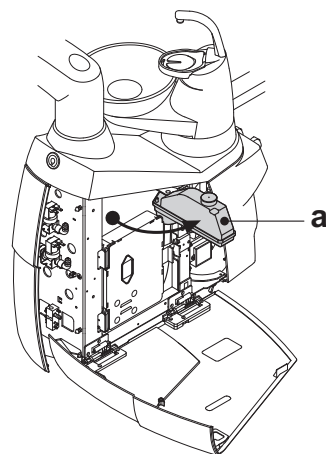

Esecuzione del ciclo di disinfezione.

- Avviare il ciclo automatico di disinfezione toccando il tasto icona **PLAY** (vedere paragrafo 5.1.1.2.1.1.) sul TOUCH DISPLAY o premendo il pulsante BIO sulla tavoletta assistente.
- Il sistema, a questo punto, esegue in maniera automatica le seguenti fasi:
 - svuotamento con aria delle condotte idriche degli strumenti,
 - introduzione del liquido disinfettante ed inizio conteggio del relativo tempo di permanenza impostato precedentemente,
 - trascorso tale tempo, avvio di una nuova fase di svuotamento con aria delle condotte,
 - lavaggio delle condotte con acqua di rete o con acqua distillata (solo con sistema per alimentazione con acqua distillata presente ed attivo).
- Al termine del ciclo di disinfezione (sul TOUCH DISPLAY compare la scritta "Fine ciclo: riporre gli strumenti") è sufficiente riporre gli strumenti estratti per tornare alla condizione di lavoro.



Interruzione del ciclo di disinfezione.

- Toccando il tasto icona **STOP** è possibile in ogni istante interrompere il ciclo di disinfezione.
- Un messaggio di conferma compare sul display della consolle:
 - toccando il tasto icona **ESC** si rinuncia a bloccare la disinfezione e si torna a visualizzare i menu del ciclo.
 - toccando il tasto icona **ENTER** il ciclo di disinfezione viene interrotto e sul display viene visualizzato un menu intermedio riportante il tempo impostato e gli strumenti estratti.

NOTA: a questo punto il complesso odontoiatrico è in stato di blocco.

- Ora possono essere fatte le seguenti scelte:
 - toccando il tasto icona **ESC** si torna al menu iniziale di impostazione tempi dove è possibile far ripartire dall'inizio il ciclo di disinfezione modificando, se si vuole, il tempo di permanenza del disinfettante e/o aggiungendo degli strumenti da disinfettare,
 - toccando il tasto icona **ENTER** si entra nel menu "Lavaggio strumenti" per eseguire il lavaggio delle condotte degli strumenti estratti,
 - toccando il tasto icona **PLAY** si fa riprendere il ciclo di disinfezione dal punto in cui era stato interrotto.
- Nel menu "Lavaggio strumenti":
 - toccando il tasto icona **PLAY** si attiva il ciclo di svuotamento e lavaggio delle condotte degli strumenti estratti utilizzando acqua di rete o acqua distillata (se presente il sistema S.H.S.),
 - toccando il tasto icona **ENTER** ritorna al menu precedente.

NOTA: al termine del ciclo di lavaggio sul display compare la scritta "Fine ciclo: riporre gli strumenti", a questo punto è sufficiente riporre gli strumenti estratti per tornare alla condizione di lavoro.

Conservazione del PEROXY Ag+.

Per una corretta conservazione del **PEROXY Ag+** attenersi alle istruzioni del fabbricante riportate sulla confezione. È importante tenere la confezione ben chiusa e riporla in un luogo fresco (temperatura non superiore a 25°C).

ATTENZIONE!

Mai lasciare il **PEROXY Ag+** o l'acqua ossigenata per più di un mese all'interno del serbatoio (a).

In caso di lunghe assenze dallo studio (ferie) è necessario, prima della partenza, svuotare completamente il serbatoio (a).




NOTA: per lo svuotamento del serbatoio si consiglia di utilizzare una cannula di aspirazione.

Messaggi di errore sul display consolle.

Se il sistema rileva una condizione di funzionamento anomalo visualizza sul display un messaggio di errore (vedere paragrafo 10.).

ATTENZIONE!

In caso di interruzione anomala del ciclo di disinfezione l'apparecchiatura rimane in stato di blocco fino a che non viene eseguito nuovamente il ciclo di disinfezione o viene eseguito il ciclo di lavaggio.

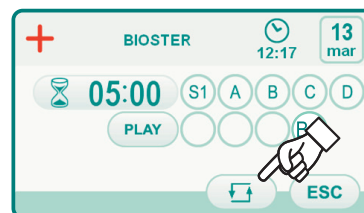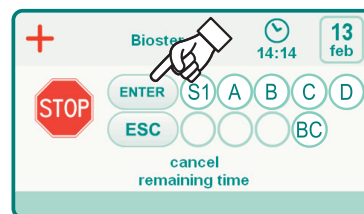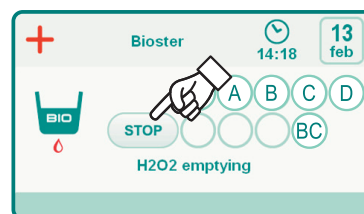

7.5. Ciclo automatico di lavaggio strumenti (Flushing)

Descrizione del sistema.

Il ciclo automatico FLUSHING permette di eseguire un ciclo automatico di lavaggio per rinnovare l'acqua presente nelle condotte idriche degli strumenti posti sulla tavoletta medico e sulla tavoletta assistente.

Il lavaggio può avvenire con acqua di rete, con acqua trattata (se presente il sistema W.H.E.) o con acqua distillata (se presente il sistema S.H.S.)

Il tempo di durata del ciclo è impostabile da 1 a 5 minuti.



ATTENZIONE!

Si consiglia di eseguire un ciclo FLUSHING prima di iniziare la giornata di lavoro e nell'intervallo tra un paziente e l'altro.

Impostazione del ciclo FLUSHING.

- Se presente il sistema S.H.S. e si desidera eseguire il ciclo di lavaggio con acqua distillata, verificare che sul display consolle sia accesa la relativa icona (**A**) (vedere paragrafo 7.2.).



NOTA: si consiglia di eseguire il ciclo di lavaggio con il serbatoio contenente acqua distillata completamente pieno.

- Utilizzando il TOUCH DISPLAY, entrare nel menu "Impostazione ciclo FLUSHING" ed impostare la durata del ciclo (vedere paragrafo 5.1.1.2.1.2.).
- Posizionare sopra la bacinella l'apposito contenitore (**d**) degli strumenti da disinfettare.
- Inserire nel contenitore i cordoni degli strumenti da disinfettare.




ATTENZIONE!

Per lo strumento siringa occorre utilizzare l'apposito adattatore (**f**) e deve avere il sistema di riscaldamento spento.

Il cordone del micromotore deve essere inserito completo di corpo motore.

Il cordone della turbina e del detartatore devono essere inseriti senza manipolo.

- Assicurarsi che i rubinetti degli spray (**g**), posti nella parte inferiore della tavoletta, siano aperti.

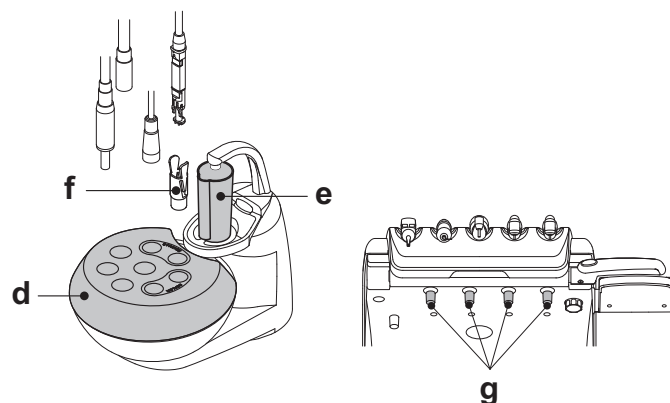

Esecuzione del ciclo FLUSHING.



- Avviare il ciclo di lavaggio toccando il tasto icona **PLAY** sul TOUCH DISPLAY (vedere paragrafo 5.1.1.2.1.2.).
- Al termine del ciclo di lavaggio (sul display compare la scritta "Fine ciclo: riporre gli strumenti") è sufficiente riporre gli strumenti estratti per tornare alla condizione di lavoro.

Interruzione del ciclo FLUSHING.

Toccando il tasto icona **STOP** è possibile in ogni istante interrompere il ciclo di lavaggio e ritornare al menu iniziale di impostazione ciclo.

Messaggi di errore sul display consolle.

Se il sistema rileva una condizione di funzionamento anomalo visualizza sul display un messaggio di errore (vedere paragrafo 10.).

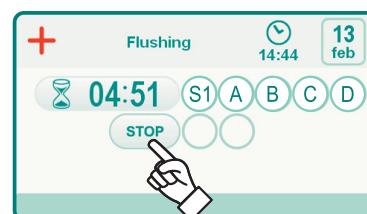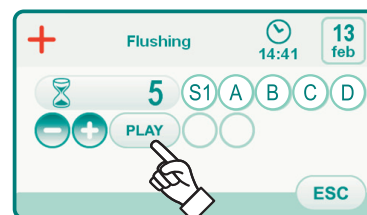

7.6. Sistema A.C.V.S. (Automatic Cleaning Vacuum Sistem)

Descrizione del sistema.

Questo sistema permette di detergere l'impianto di aspirazione chirurgica. Il sistema è dotato di un serbatoio (**c**) contenente il liquido detergente e di due attacchi (**d**) che vengono utilizzati per eseguire il lavaggio delle cannule di aspirazione.

Il serbatoio contenente il liquido detergente ha una capacità complessiva di 500 cc.

Il ciclo di lavaggio è automatico e normalmente dovrebbe essere eseguito alla fine di ogni intervento a completamento del periodo di pulizia e disinfezione dell'unità operatoria.



ATTENZIONE!

Come liquido detergente si raccomanda l'uso di **STER 3 PLUS (CEFLA S.C)** diluito in soluzione al 6% (equivalente a 60 ml di prodotto in 1 litro di acqua).

Come avviare il ciclo di lavaggio.

Per avviare il ciclo di lavaggio operare come segue:

- Verificare che nel serbatoio (**c**) ci sia del liquido detergente.
- Estrarre entrambi i terminali cannula dai supporti della tavoletta assistente verificando che il motore dell'aspirazione entri in funzione.
- Aprire le chiusure meccaniche dei terminali cannule.
- Inserire i terminali cannule nei rispettivi attacchi (**d**) posti sotto il collettore. La depressione che si genera nei venturimetri innesca l'inizio del ciclo di lavaggio.
- Fasi operative del ciclo di lavaggio:
 - erogazione di acqua di rete per 50 sec. con funzionamento intermittente (2 sec. ON - 1 sec. OFF),
 - bloccaggio del flusso di acqua ed immissione di 10cc. di liquido disinfettante,
 - interruzione dell'immissione di liquido disinfettante e continuazione dell'aspirazione per 10 sec.
- L'interruzione del flusso di acqua aspirante con relativo arresto del motore determina la fine del ciclo di lavaggio. Sul display compare la scritta "Riporre le cannule di aspirazione".
- A questo punto è sufficiente riporre i terminali cannule nei rispettivi supporti della tavoletta assistente per tornare alla condizione di lavoro.

Riempimento del serbatoio.

Complessi odontoiatrici serie A7 Plus:

Quando il liquido detergente nel serbatoio (**c**) passa sotto il livello di minimo procedere come segue:



- Portare la poltrona alla massima altezza.
- Togliere il serbatoio ruotandolo in senso antiorario.
- Versare il liquido detergente nel serbatoio sino al suo completo riempimento.
- Montare nuovamente il serbatoio ruotandolo in senso orario.

Bloccaggio del ciclo di lavaggio.

Se il sistema rileva una condizione di funzionamento anomalo visualizza sul display un messaggio di errore (vedere paragrafo 10.).



NOTA: rimuovendo le cause del blocco il ciclo di lavaggio si riavvia automaticamente.

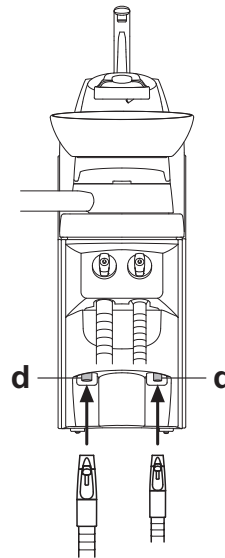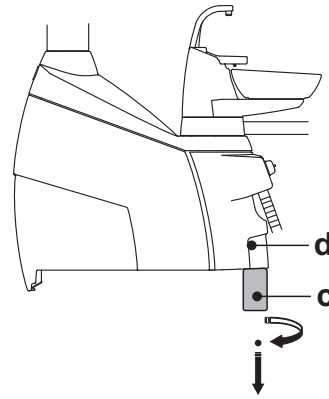

7.7. Apertura/chiusura carter laterale idrico


Complessi odontoiatrici serie A7 Plus:

Apertura carter:

- sbloccare il carter laterale idrico (**a**) azionando l'apposita maniglia (**h**),
- far scorrere il carter verso sinistra (vedi figura) e ruotarlo fino ad ottenere l'apertura completa.

Chiusura carter:

- chiudere il carter laterale idrico tenendolo come da figura,
- bloccare il carter facendolo scorrere verso destra fino al raggiungimento del fine corsa meccanico.

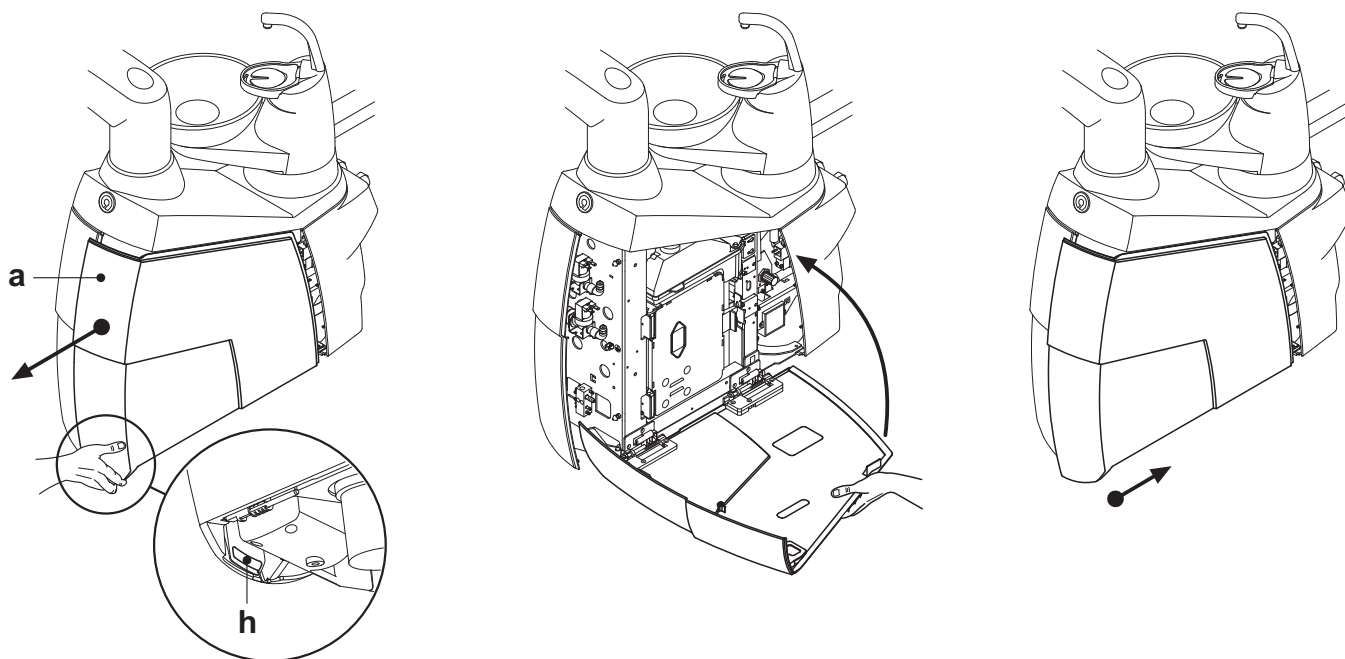


8. Accessori

8.1. Lampada operatoria

La lampada operatoria può essere di 2 modelli:

- ① **Lampada con sorgente luminosa alogena modello VENUS PLUS.**
Le istruzioni di utilizzo e manutenzione della lampada alogena modello VENUS PLUS sono disponibili in formato PDF scaricabile dall'area download del sito internet www.anthos.com.
- ② **Lampada con sorgente luminosa a LED modello VENUS PLUS -L.**
Per le istruzioni di utilizzo e manutenzione vedere paragrafo 8.1.1.

NOTA: durante le movimentazioni automatiche della poltrona la lampada si spegne automaticamente per evitare l'abbagliamento del paziente.

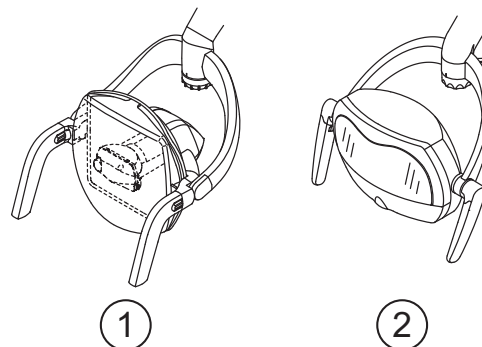

8.1.1. Lampada operatoria modello VENUS PLUS -L

Caratteristiche tecniche.

- Funzionamento: continuo.
- Tensione di alimentazione: 18 V~ 50/60 Hz.
- Potenza assorbita: 15 VA.
- Dimensioni spot luminoso: 65 mm X 165 mm.
- Lux: 50.000 (max).
- Temperatura di colore: 5.000 °K (+/- 5%).
- Temperatura massima su superfici accessibili (in uso normale): < 50°C.
- Protezione contro i pericoli elettrici: apparecchio di classe II tipo B.
- Sorgente luminosa: 2 LED multichip.
- Classificazione dell'apparecchiatura secondo le norme EN 62471:2008 e IEC 62471:2006 per la SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: Gruppo di Rischio 1.

Avvertenze di sicurezza.

ATTENZIONE!

- L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita solo da personale autorizzato.
- L'apparecchiatura dovrà essere utilizzata esclusivamente da personale autorizzato (medico e paramedico) adeguatamente addestrato.
- Non applicare alcun peso in nessun punto dell'apparecchiatura, agire su di essa con la sola forza necessaria alla sua movimentazione.
- L'apparecchiatura dovrà essere sempre presidiata quando accesa, in particolare non dovrà mai essere lasciata incustodita in presenza di minori / incapaci o in genere di personale non autorizzato all'utilizzo.
- Non effettuare alcun intervento di manutenzione sull'apparecchiatura quando l'alimentazione è inserita; disinserire quindi l'alimentazione prima di intervenire.
- L'apparecchio non è adatto ad un uso in presenza di una miscela di gas anestetico infiammabile con ossigeno o protossido d'azoto.
- Le operazioni di pulizia devono essere eseguite con la lampada spenta ed a temperatura ambiente. Non vaporizzare direttamente il getto di liquido detergente su parti del gruppo ottico.
- L'apparecchiatura non è protetta contro la penetrazione di liquidi (IPX0).
- Non applicare protezioni anche trasparenti al gruppo ottico che possono creare ostruzione alle prese dell'aria di raffreddamento.

Descrizione.



- a) Sorgente luminosa costituita da 2 LED multichip.
- c) Maniglie staccabili ed autoclavabili.
- d) Interruttore per l'accensione.
- e) Manopola per la regolazione dell'intensità luminosa.
- k) Sensore NO TOUCH per l'accensione e la regolazione dell'intensità luminosa (optional).
- f) Braccio autobilanciato.

Accensione e spegnimento.

- Per accendere la lampada azionare l'interruttore (d) verso l'alto.
- Per spegnere la lampada azionare nuovamente l'interruttore (d) verso l'alto.

NOTA per lampade con sensore NO TOUCH: è possibile accendere e spegnere la lampada anche eseguendo un rapido passaggio della mano nel campo di sensibilità (5 cm) del sensore (k).

Se al passaggio della mano la funzione di accensione/spegnimento non si attiva, si consiglia di ripetere l'operazione eseguendo il passaggio più lentamente.

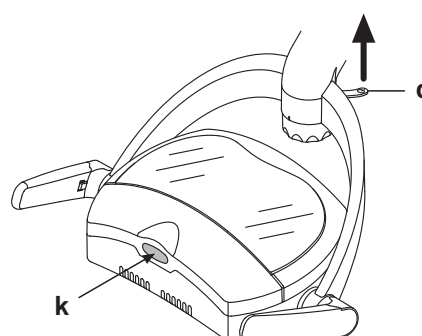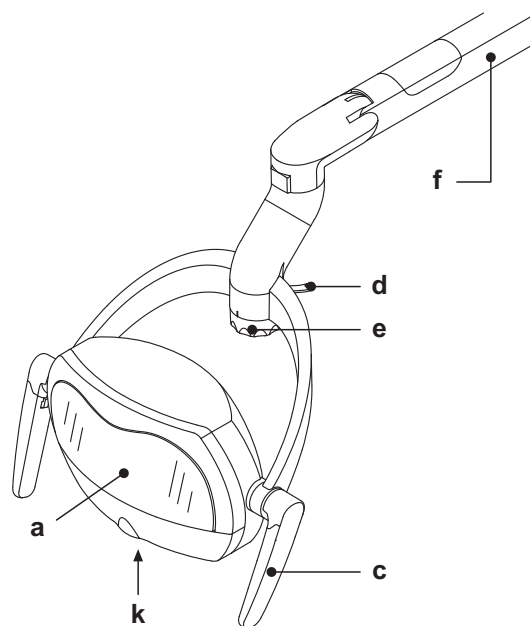

Regolazione dell'intensità luminosa.

Ruotare la manopola (e):

- Senso orario: aumenta luminosità.
- Senso antiorario: diminuisce luminosità.

👉 NOTA per lampade con sensore NO TOUCH: è possibile eseguire la regolazione dell'intensità luminosa anche lasciando ferma la mano nel campo di sensibilità (5 cm) del sensore (k).


Alla partenza della funzione di regolazione la lampada emette una segnalazione acustica:

- 1 breve BEEP: incremento della luminosità.
- 2 brevi BEEP: decremento della luminosità.

Al raggiungimento del massimo o del minimo la lampada emette 2 BEEP lunghi e si arresta la funzione di regolazione.

Se la lampada è impostata al massimo, la funzione di regolazione decrementa la luminosità e il decremento si arresta quando si raggiunge il minimo o quando si toglie la mano dal sensore.


Se la lampada non è impostata al massimo (qualsiasi valore intermedio), la funzione di regolazione incrementa sempre la luminosità e l'incremento si arresta quando si raggiunge il massimo o quando si toglie la mano dal sensore.

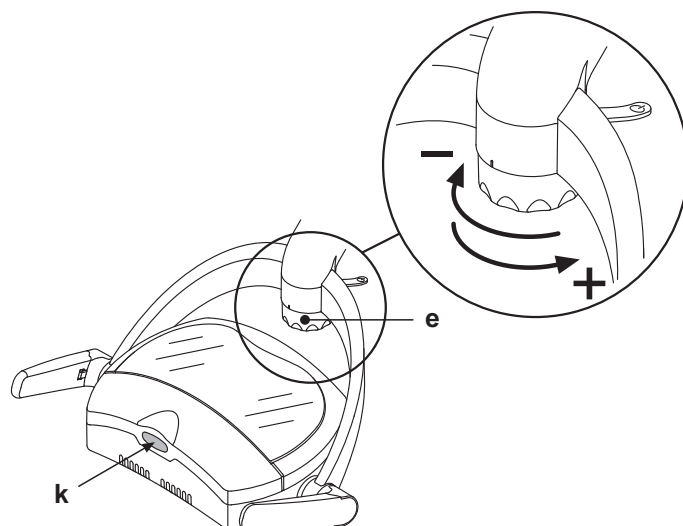

Smontaggio delle maniglie.

Estrarre la maniglia dopo aver premuto il pulsante di sblocco (o).

👉 NOTA: per facilitare questa operazione si consiglia di tenere fermo il gruppo ottico con l'altra mano.

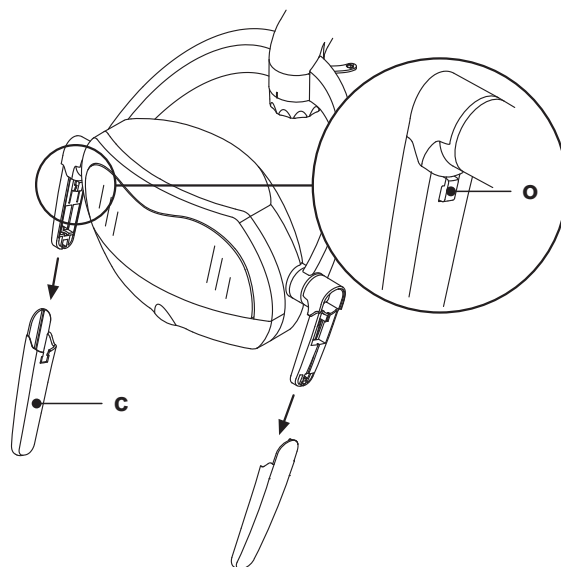

Pulizia e disinfezione.



ATTENZIONE!

Eseguire queste operazioni a lampada spenta e dopo averla lasciata raffreddare.

Per la pulizia e la disinfezione utilizzare carta monouso morbida (evitare di utilizzare carta riciclata), non abrasiva, oppure garza sterile.

- **Bracci lampada e carter gruppo ottico:** pulire le parti esterne dell'apparecchiatura utilizzando STER 1 PLUS (CEFLA S.C.) o un prodotto analogo.
- **Schermo trasparente:** pulire utilizzando un panno morbido per vetri imbevuto di una soluzione di acqua e sapone neutro.



ATTENZIONE!

Assolutamente non utilizzare prodotti contenenti alcool.

- **Maniglie removibili:** le maniglie sono sterilizzabili in autoclave a vapore d'acqua a 135°C (2 bar). Tempo minimo 15 min.



ATTENZIONE!

- Per tutte le parti della lampada è tassativamente proibito l'impiego di sostanze abrasive e detergenti a base di trielina, benzina, acqueragia o solventi in genere.
- Non vaporizzare il prodotto scelto direttamente sul gruppo ottico.
- Ciò che viene utilizzato per la pulizia e la disinfezione deve essere gettato via al termine dell'operazione.

Manutenzione.

La lampada operatoria VENUS PLUS -L non necessita di particolari operazioni di manutenzione.



ATTENZIONE!

Non vi sono parti riparabili sul campo. Qualora si presentasse un difetto di funzionamento si prega di chiamare l'Assistenza Tecnica.


Risoluzione dei problemi.

- **La sorgente luminosa non si accende agendo sull'apposito interruttore o sul sensore NO TOUCH (se presente).**
Verificare che l'alimentazione sia correttamente inserita poi chiamare l'Assistenza Tecnica.
- **L'intensità luminosa non varia agendo sull'apposita manopola o sul sensore NO TOUCH (se presente).**
Chiamare l'Assistenza Tecnica.
- **L'intensità luminosa si è notevolmente ridotta.**
 - Verificare la regolazione dell'intensità luminosa agendo sull'apposita manopola.
 - Pulire lo schermo frontale utilizzando un panno morbido.

Nel caso l'intensità luminosa non ritornasse ai valori iniziali, chiamare l'Assistenza Tecnica.

8.2. Monitor a palo lampada

Le istruzioni di utilizzo e manutenzione del monitor sono allegate al complesso odontoiatrico.

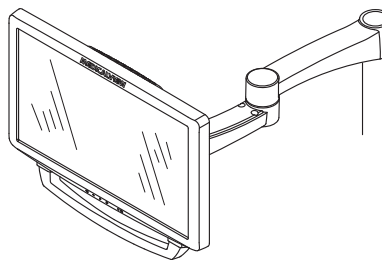

8.3. Negatoscopio per panoramiche

Su tutte le tavolette medico versione INTERNATIONAL può essere applicato un negatoscopio per radiografie panoramiche.

Le dimensioni dello schermo sono le seguenti: H=210mm, L=300mm.


Per accendere il negatoscopio è sufficiente agire sull'apposito interruttore (a):



= Negatoscopio acceso.



= Negatoscopio spento.

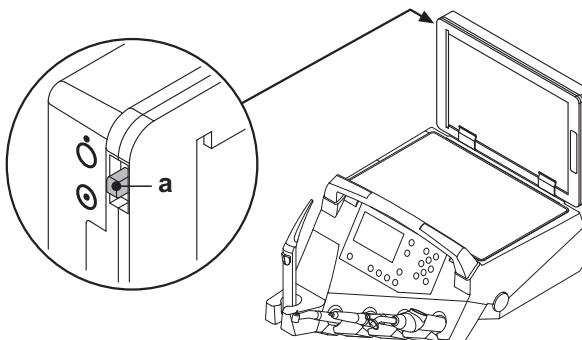

8.4. Attacchi rapidi aria/acqua/230V

Gli attacchi rapidi aria/acqua/230V-sono posti lateralmente sulla cassetta allacciamenti.



ATTENZIONE!


Spegnere l'apparecchiatura prima di collegare o scollegare le prese aria/acqua.

Dati tecnici.

- Presa di corrente: 230Vac 2A- in accordo con la norma IEC/EN 60320-2-2/F (solo su complessi odontoiatrici con alimentazione a 230Vac).
- Pressione attacco rapido aria: 6 Bar.
- Pressione attacco rapido acqua:
 - con acqua di rete, 2,5 Bar;
 - con sistema S.H.S., 1,8 Bar;
 - con sistema W.H.E., 3 Bar.
- Portata attacco rapido acqua:
 - con acqua di rete, 1800 ml/min;
 - con sistema S.H.S., 950 ml/min;
 - con sistema W.H.E., 400 ml/min.



NOTA: con sistema S.H.S., per utilizzare l'attacco rapido con acqua di rete occorre disabilitare il serbatoio dell'acqua distillata (vedere paragrafo 7.2.).

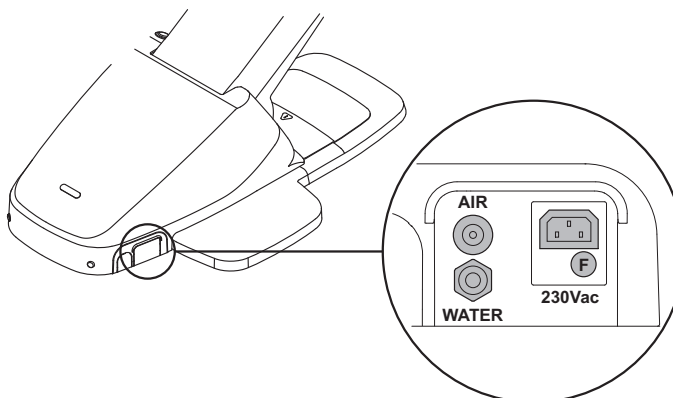

9. Manutenzione

Manutenzione preventiva

Cefla sc - Cefla Dental Group, in qualità di costruttore di complessi odontoiatrici, in accordo alle normative del settore IEC 60601-1 3.a Ed. - 2007, IEC 62353 ed alla Direttiva MDD 93/42, e successive modifiche intervenute, sui dispositivi medici, prescrive che le verifiche per la manutenzione preventiva, specificate nel Manuale di Servizio Tecnico e nel Libretto Garanzia e Manutenzione allegato al complesso odontoiatrico, vengano effettuate da personale tecnico autorizzato, almeno una volta ogni 12 mesi.



ATTENZIONE!

Eventuali riparazioni, modifiche o manomissioni, durante il periodo di garanzia, effettuate da personale non autorizzato da Cefla sc - Cefla Dental Group, determinano il decadimento della garanzia stessa.

Verifiche di sicurezza.

In conformità alla norma IEC 62353, le verifiche di sicurezza, specificate nel Manuale di Servizio Tecnico e nel Libretto Garanzia e Manutenzione allegato al complesso odontoiatrico, dovranno essere effettuate con la periodicità dettata dalla normativa locale vigente; in assenza di indicazioni specifiche, Cefla sc - Cefla Dental Group, in qualità di costruttore di complessi odontoiatrici, suggerisce una verifica almeno ogni 24 mesi all'installazione e dopo ogni intervento di riparazione/aggiornamento a carico delle parti elettriche a cui è applicata la tensione di rete.



ATTENZIONE!

La mancata osservazione di queste prescrizioni, può far decadere la responsabilità del costruttore su eventuali danni o malfunzionamenti delle apparecchiature.

9.1. Manutenzione degli strumenti

Le istruzioni di manutenzione degli strumenti sono allegate ad ogni strumento.



ATTENZIONE!


Si consiglia di eseguire le operazioni di manutenzione degli strumenti con apparecchiatura spenta.

9.2. Scarico della condensa

Questa operazione va effettuata giornalmente, prima di iniziare il lavoro.

Complessi odontoiatrici serie A7 Plus:

- mettere un recipiente sotto al rubinetto (a) posto sotto la parte idrico,
- svitare il pomello del rubinetto,
- una volta svuotato il serbatoio, chiudere il rubinetto serrando a fondo.

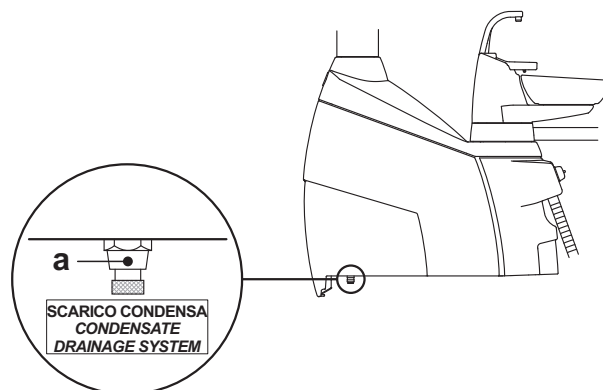

9.3. Pulizia filtri aspirazione chirurgica

Questa operazione va effettuata quotidianamente, al termine della giornata lavorativa.




ATTENZIONE!

Procedere alle operazioni di pulizia dei filtri aspirazione indossando i guanti per prevenire eventuali contatti con materiale infetto.

Operare come segue:

- Estrarre i due filtri (d).
- Pulire/sostituire ogni filtro (codice 97461845).
- Rimontare i due filtri facendo attenzione ad eliminare eventuali residui di amalgama dall'imbocco della sede di ogni filtro.

NOTA: onde evitare possibili gocciolamenti di liquidi e secreti dal filtro che viene estratto, è buona norma, eseguire le suddette operazioni con la cannula in funzione.

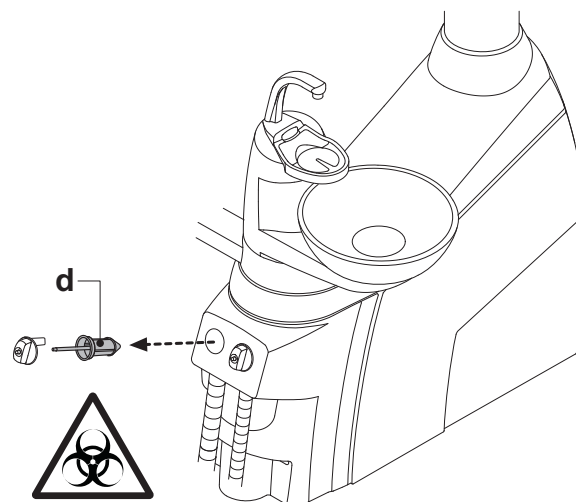

9.4. Aspirazione chirurgica

L'aspirazione chirurgica deve essere igienizzata utilizzando un prodotto idoneo a tal uso.



ATTENZIONE!

Per la pulizia dell'impianto di aspirazione si raccomanda l'uso di **STER 3 PLUS (CEFLA S.C.)** diluito in soluzione al 6% (equivalente a 60 ml di prodotto in 1 litro di acqua).

Al termine di ogni intervento di chirurgia.

- Eseguire un ciclo automatico di lavaggio o aspirare con ognuna delle cannule utilizzate circa mezzo litro di soluzione igienizzante.
- Sterilizzare i terminali porta-cannula in autoclave a vapore d'acqua a 135 °C (2 bar) rispettando le istruzioni dell'apparecchiatura.

Alla fine di ogni giornata lavorativa.

- Aspirare con ciascuna cannula 1 litro di acqua alternando acqua e aria (tenendo la cannula alternativamente immersa in acqua e fuori dall'acqua).
- Terminato il risciacquo con acqua, eseguire un ciclo automatico di lavaggio o aspirare con ognuna delle cannule utilizzate circa mezzo litro di soluzione igienizzante.



ATTENZIONE!

L'uso di qualsiasi prodotto igienizzante deve essere fatto nel rispetto delle disposizioni date dal fabbricante.





NOTA: al termine di queste operazioni è buona norma aspirare solo aria per fare asciugare tutto l'impianto di aspirazione (5 minuti).

Una volta alla settimana.

Estrarre il corpo della cannula dal suo attacco cordone e lubrificare la guarnizioni O-Ring (**o**) utilizzando **S1-Protettivo per O-Ring** (CEFLA S.C.).

Una volta all'anno.

Sostituire i tubi di aspirazione e i terminali porta-cannula.

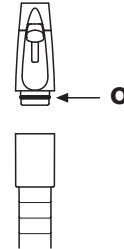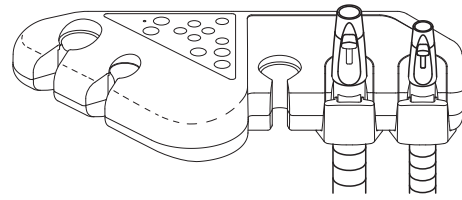

9.5. Separatore chirurgico CATTANI

All'inizio di ogni giornata lavorativa.

Inserire all'interno del filtro (**d**) una pastiglia (**v**) di **VF CONTROL PLUS** (CEFLA S.C.).



ATTENZIONE!

Questa operazione deve essere tassativamente eseguita con i guanti indossati per prevenire eventuali contatti con materiale infetto.

Al termine di ogni intervento di chirurgia.

- Eseguire un ciclo automatico di lavaggio o aspirare con ognuna delle cannule utilizzate circa mezzo litro di soluzione igienizzante.
- Sterilizzare i terminali porta-cannula in autoclave a vapore d'acqua fino a 135° C (2 bar), tempo minimo 15 min.

Alla fine di ogni giornata lavorativa.

- Aspirare con ciascuna cannula 1 litro di acqua alternando acqua e aria (tenendo la cannula alternativamente immersa in acqua e fuori dall'acqua).
- Terminato il risciacquo con acqua, eseguire un ciclo automatico di lavaggio o aspirare con ognuna delle cannule utilizzate circa mezzo litro di soluzione igienizzante.



NOTA: al termine di queste operazioni è buona norma aspirare solo aria per fare asciugare tutto l'impianto di aspirazione (5 minuti).

Ogni 15 giorni.

- Pulire il vaso del separatore e le sonde utilizzando una spugna non abrasiva e del detergente neutro.
- Pulire la valvola di drenaggio del vaso del separatore utilizzando l'apposito scovolino.

Una volta all'anno.

- Da parte del tecnico: controllo dei sifoni e degli scarichi, controllo di tutti i tubi interni, delle plastiche e delle gomme soggette ad invecchiamento.

Prima di assentarsi dall'ambulatorio per alcuni giorni.

- Mettere in moto l'aspiratore, farlo funzionare per 20-30 minuti senza aspirare liquidi.

Il gruppo aspirante si asciugherà completamente. Si eviteranno così quelle formazioni di sali causate dall'umidità e dalle sostanze basiche, sali che talvolta possono far grippare la ventola e bloccare di conseguenza il motore.

Come smontare il vaso del separatore.



ATTENZIONE!

La seguente operazione deve essere tassativamente eseguita con i guanti indossati per prevenire eventuali contatti con materiale infetto.

Complessi odontoiatrici serie A7 Plus:





- Portare la poltrona alla massima altezza.
- Aprire il carter laterale idrico (vedere paragrafo 7.7.).
- Ruotare la cassetta elettrica (**b**) e, se presente, il serbatoio (**a**) dell'acqua ossigenata.
- Svuotare completamente il vaso del separatore schiacciando l'apposito pulsante temporizzato (**c**) posto sul coperchio.
- Se presente, sfilare la valvola (**s**) per impianti centralizzati.
- Ruotare e sollevare il vaso fino al suo distacco dalla pompa di drenaggio (**k**).
- Sganciare il vaso (**d**) dal coperchio (**f**) sollevando i due elastici (**e**) laterali.
- Dopo aver effettuato le operazioni di pulizia rimontare il vaso (**d**) lubrificando preventivamente le guarnizioni O-Ring con **S1-Protettivo per O-Ring** (CEFLA S.C.).
- Infine riposizionare la cassetta elettrica, il serbatoio e richiudere il carter laterale idrico.

Segnalazione pompa di drenaggio bloccata.

Un'apposita icona (**A**) sul TOUCH DISPLAY segnala se la pompa di drenaggio posta sotto il vaso del separatore si dovesse bloccare.


A questo punto si consiglia di spegnere l'apparecchiatura e svuotare manualmente il vaso del separatore.

Se l'icona compare nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

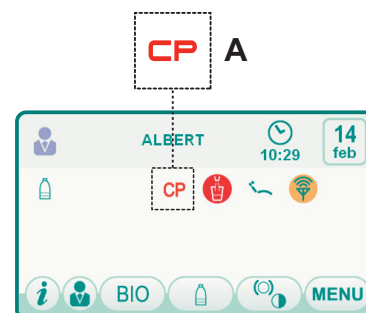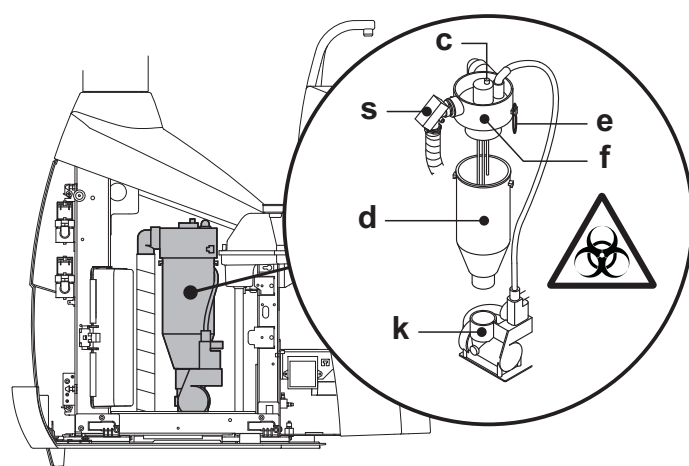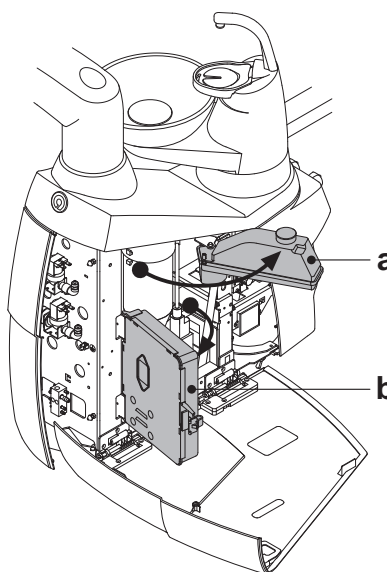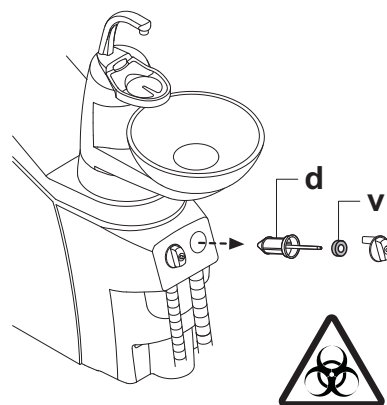

9.6. Pulizia filtro aria di ritorno turbina

Controllare mensilmente il filtro (**g**) del contenitore di raccolta dell'olio presente nell'aria di ritorno della turbina.
In caso di necessità sostituire l'elemento filtrante (codice di ordinazione 97290014).

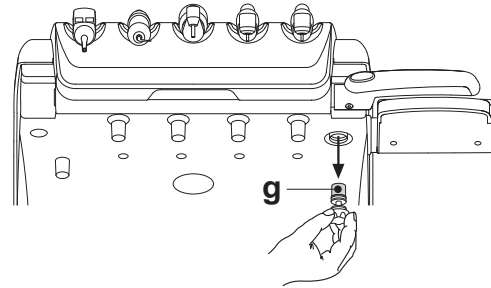

9.7. Separatore di amalgama CATTANI a gravità

Svuotamento del vaso separatore.

- Sollevare completamente la poltrona in modo da svuotare il più possibile il vaso dai liquidi di scarico.
- Togliere il vaso (**m**) svitandolo in senso anti-orario.



ATTENZIONE!


Questa operazione deve essere tassativamente eseguita con i guanti indossati per prevenire eventuali contatti con materiale infetto.

- Facendo riferimento alle apposite istruzioni CATTANI allegate all' apparecchio, svuotare il vaso nell'apposito contenitore a perdere (codice articolo 97290027).



ATTENZIONE!

Per lo smaltimento dei contenitori a perdere pieni di amalgama attenersi alle Normative locali e nazionali.

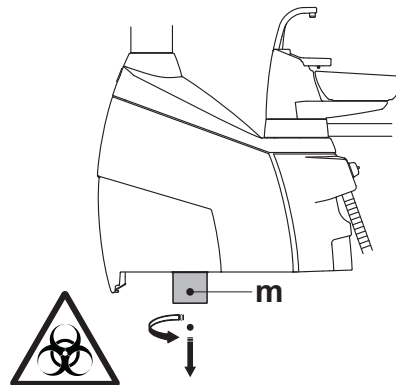

9.8. Separatore di amalgama METASYS

Le istruzioni di manutenzione del separatore di amalgama METASYS sono allegate all'apparecchio se lo stesso è equipaggiato con tale tipo di separatore. Il dispositivo di controllo del separatore è situato all'interno dell'idrico.



ATTENZIONE!

Procedere alle operazioni di pulizia del separatore indossando i guanti per prevenire eventuali contatti con materiale infetto.



ATTENZIONE!

Per lo smaltimento dei contenitori a perdere pieni di amalgama attenersi alle Normative locali e nazionali.

9.9. Separatore di amalgama DÜRR

Le istruzioni di manutenzione del separatore di amalgama DÜRR sono allegate all'apparecchio se lo stesso è equipaggiato con tale tipo di separatore. Il dispositivo di controllo del separatore è situato all'interno dell'idrico.



ATTENZIONE!

Procedere alle operazioni di pulizia del separatore indossando i guanti per prevenire eventuali contatti con materiale infetto.



ATTENZIONE!

Per lo smaltimento dei contenitori a perdere pieni di amalgama attenersi alle Normative locali e nazionali.

9.10. Poltrona dentistica

La poltrona dentistica non necessita di particolari operazioni di manutenzione.

Si consiglia tuttavia un controllo generale di funzionamento annuale da parte di un tecnico autorizzato ANTHOS.

10. Messaggi di avvertimento

M = Messaggio sul display consolle
C = Causa
R = Rimedio

M: "Riserva H2O, riempire serbatoio"

C: Il livello del liquido presente nel serbatoio per l'alimentazione idrica indipendente è sceso sotto il livello di minimo.
R: Riempire il serbatoio (vedere paragrafo 7.2.).

M: "Riporre gli strumenti"

C: Durante l'impostazione del ciclo di igienizzazione, il sistema ha rilevato uno strumento già estratto.
R: Verificare che tutti gli strumenti siano correttamente riposti e ripetere l'impostazione del ciclo. Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "Controllare strumenti, ripetere il ciclo"

C: Durante il ciclo di igienizzazione o lavaggio, il sistema ha rilevato che sono stati modificati gli strumenti estratti.
R: Controllare gli strumenti selezionati e ripetere il ciclo di igienizzazione (vedere paragrafo 7.4.) o lavaggio (vedere paragrafo 7.5.).

M: "Riserva H2O2, riempire serbatoio"

C: Il livello dell'acqua ossigenata presente nel relativo serbatoio è sceso sotto il livello di minimo.
R: Riempire il serbatoio dell'acqua ossigenata (vedere paragrafo 7.4.).

M: "Aprire rubinetti H2O spray"

C: Durante il ciclo di igienizzazione, il sistema non riesce ad eseguire la fase di riempimento delle condotte con acqua ossigenata.
R: Aprire rubinetti dell'acqua spray e ripetere il ciclo di igienizzazione (vedere paragrafo 7.4.). Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "Estrarre tutti gli strumenti"

C: Durante il ciclo di igienizzazione, il sistema ha rilevato un malfunzionamento interno.
R: Ripetere il ciclo di igienizzazione selezionando tutti gli strumenti. Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "Eseguire svuotamento W.H.E."

C: Malfunzionamento del sistema W.H.E.
R: Eseguire lo svuotamento del serbatoio interno W.H.E. e ripristinare il sistema (vedere paragrafo 5.1.1.2.1.3.). Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "Selezionare W.H.E."

C: Il sistema cerca di eseguire una funzione che richiede attivo il sistema WHE.
R: Attivare il sistema W.H.E. (vedere paragrafo 7.3.).

M: "Controllare cannule, ripetere il ciclo"

C: Durante il ciclo di igienizzazione o di lavaggio, il sistema ha rilevato che le cannule non sono collegate ai relativi attacchi.
R: Verificare che le cannule siano collegate correttamente e ripetere il ciclo di igienizzazione (vedere paragrafo 7.4.) o di lavaggio (vedere paragrafo 7.5.). Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "Estrarre almeno uno strumento"

C: Si è tentato di avviare un ciclo di igienizzazione senza aver selezionato alcun strumento o bicchiere.
R: Ripetere il ciclo di igienizzazione selezionando almeno uno strumento o il bicchiere. Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "Strumento configurato"

C: Lo strumento in quella posizione della tavoletta è stato automaticamente configurato con i dati di fabbrica.
R: Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "Riporre le cannule"

C: Le cannule di aspirazione risultano estratte quando si accende il complesso odontoiatrico.
R: Verificare che le cannule di aspirazione siano posizionate correttamente nelle loro sedi. Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "Riporre lo strumento"

C: Uno strumento risulta estratto quando si accende il complesso odontoiatrico.
R: Verificare che tutti gli strumenti siano posizionati correttamente nelle loro sedi. Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "Controllare cannule filtro, aspirazione"

C: Malfunzionamento del ciclo di lavaggio cannule.
R: Controllare che i filtri siano puliti, che le cannule non siano chiuse o che il gruppo aspiratore funzioni correttamente poi ripetere il ciclo di lavaggio. Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "Emergenza idrico attivata"

C: Durante un movimento automatico la tavoletta assistente ha incontrato un ostacolo.
R: Rimuovere l'ostacolo e premere nuovamente il pulsante del programma desiderato.

M: "Abbassare la poltrona"

C: La bacinella non si muove perché la poltrona è in zona d'interferenza.
R: Abbassare la poltrona fino ad uscire dalla zona di interferenza.

M: "Verificare fusibili lampada"

C: La lampada operatoria non si accende perché manca la tensione di alimentazione.
R: Chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "Eseguire manutenzione periodica"

C: Il sistema richiede la manutenzione periodica.
R: Chiamare l'Assistenza Tecnica per programmare l'intervento di manutenzione.

M: "Emergenza pedana attivata"

C: La poltrona ha incontrato un ostacolo.
R: Premere il pulsante di "Salita sedile" e rimuovere l'ostacolo.

M: "Emergenza schienale attivata"

C: Lo schienale poltrona ha incontrato un ostacolo.
R: Premere il pulsante di "Salita sedile" e rimuovere l'ostacolo.

M: "Spostare la bacinella"

C: La poltrona non si muove causa presenza della bacinella in zona d'interferenza.
R: Spostare la bacinella fino ad uscire dalla zona di interferenza.

M: "Emergenza sedile attivata"

C: La poltrona ha incontrato un ostacolo.
R: Premere il pulsante di "Salita sedile" e rimuovere l'ostacolo.

M: "Emergenza delivery attivata"

C: La tavoletta Side Delivery ha incontrato un ostacolo.
R: Premere il pulsante di "Salita sedile" poltrona e rimuovere l'ostacolo.

M: "Blocco poltrona, riporre strumento"

C: E' stato richiesto un movimento della poltrona mentre uno strumento risulta essere estratto.
R: Riporre lo strumento e ripetere il movimento della poltrona.

M: "Blocco poltrona attivato"

C: E' stato richiesto un movimento della poltrona mentre questa è in stato di blocco.
R: Rimuovere il blocco poltrona (vedere paragrafo 4.).



ATTENZIONE!

M: "XXXX, chiamare assistenza tecnica" (dove XXXX rappresenta un codice numerico).

C: Questo tipo di messaggio indica un errore interno grave.

R: Chiamare l'Assistenza Tecnica comunicando il numero dell'errore.


11. Dati tecnici

Pianta di installazione:	97042086
Manuale tecnico:	97071156
Catalogo ricambi unità operatoria:	97023117
Catalogo ricambi poltrona:	97023117
Peso massimo unità operatoria:	90 Kg.
Peso massimo poltrona dentistica:	115 Kg.
Portata massima poltrona dentistica:	190 Kg.
Tensione nominale:	230V~
Frequenza nominale:	50/60 Hz.
Potenza assorbita:	1500 W
Collegamento aria:	1/2 Gas.
Pressione alimentazione aria:	6-8 bar.
Portata alimentazione aria:	82 l/min.
Collegamento acqua:	1/2 Gas.
Pressione alimentazione idrica:	3-5 bar.


Portata alimentazione idrica:	10 l/min
Consumo acqua:	2 l/min.
Durezza dell'acqua:	< 25 °f (14 °d)
Collegamento scarico:	ø40 mm.
Portata scarico:	10 l/min.
Inclinazione del condotto di scarico:	10 mm/m.
Collegamento aspirazione:	ø40 mm.
Depressione di aspirazione (minimo):	65 mbar.
Portata aspirazione:	450 l/min.
Marchio di approvazione:	CE 0051
Installazione elettrica conforme:	IEC 60364-7-710
Dimensioni imballo riunito:	1570 x 780 x 1325(h)
Dimensioni imballo poltrona:	1510 x 730 x 1000(h)
Peso imballo riunito:	145 Kg.
Peso imballo poltrona:	150 Kg.

FUSIBILI			
Identificazione	Valore	Protezione	Posizione
Riunito. Fusibile F2 Fusibile F4 Fusibile F5 Fusibile F6	T 12,5 A T 6,3 A T 6,3 A T 6,3 A	230 V~ : Linea di alimentazione riunito Protez. secondario : Idrico. Protez. secondario : Riunito. Protez. secondario : Lamp. operatoria.	Contenitore allacciamenti. Contenitore allacciamenti. Contenitore allacciamenti. Contenitore allacciamenti.
Poltrona. Fusibile F1	T 6,3 A	230 V~ : Linea di alimentazione poltrona.	Scheda poltrona.
Attacchi rapidi. Fusibile	T 2 A	230 V~ : Linea di alimentazione presa elettrica.	Contenitore allacciamenti.
Alimentatore MONITOR. Fusibile	T 4 A	21 V~ : Linea di alimentazione MONITOR.	Zona scheda poltrona.

11.1. Caratteristiche dimensionali modello A7 Plus CONTINENTAL

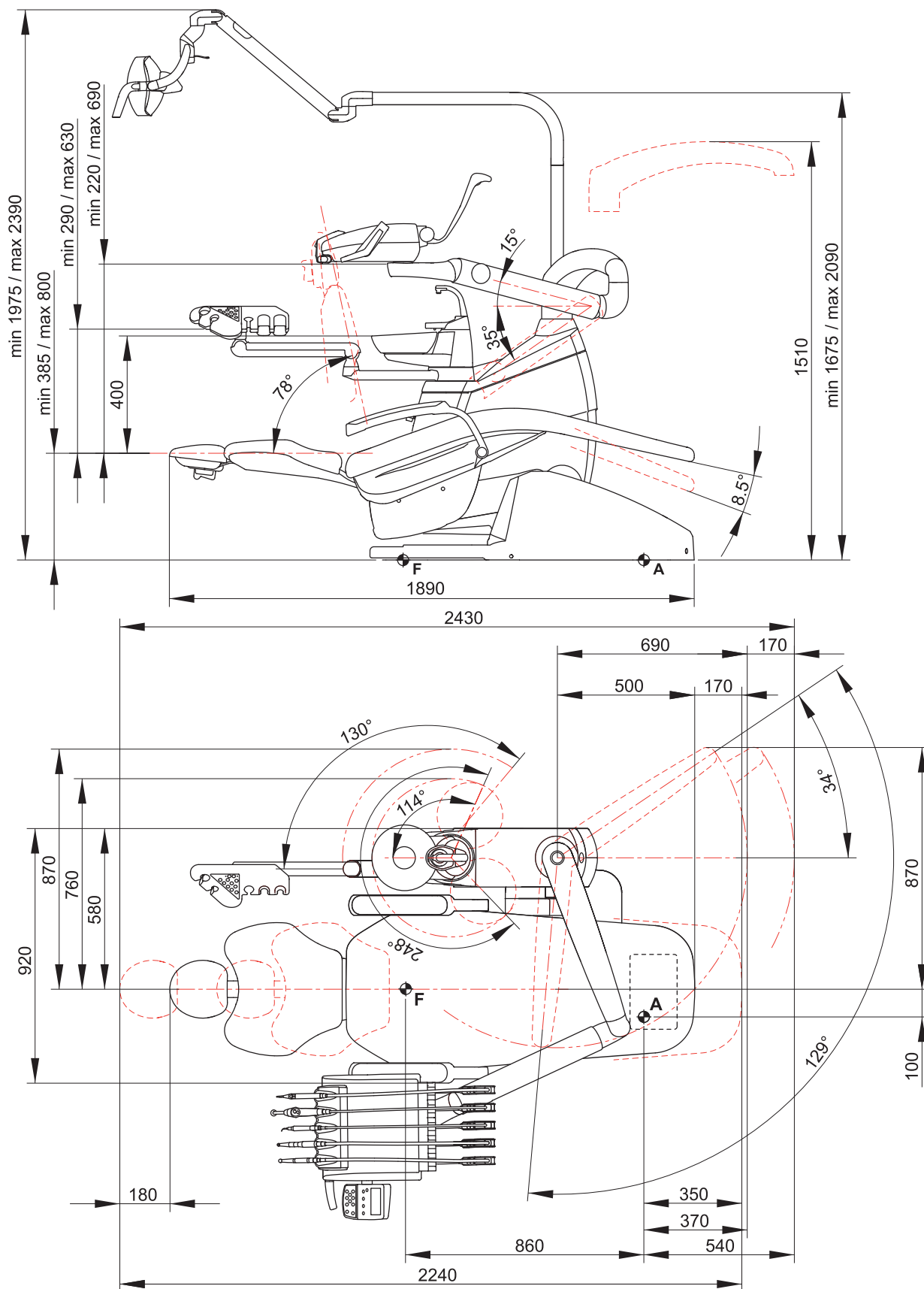

11.2. Caratteristiche dimensionali modello A7 Plus INTERNATIONAL

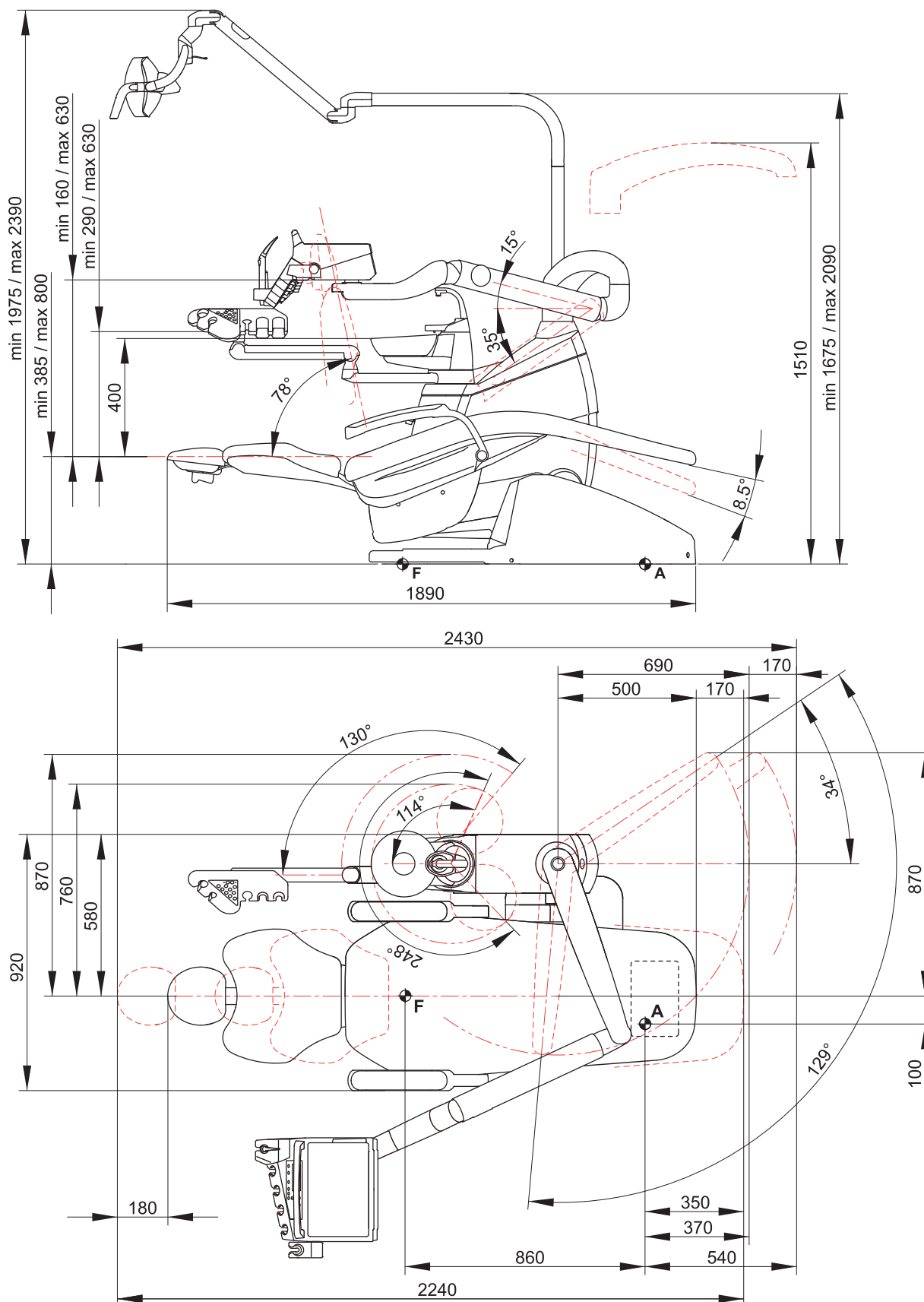

12. Schema generale di manutenzione del complesso odontoiatrico			
QUANDO	CHE COSA	COME	VEDI PARAGRAFO
Prima di iniziare la giornata di lavoro.	Scarico della condensa.	/	Vedi paragrafo 9.2.
	Separatore chirurgico CATTANI.	Inserire all'interno del filtro cannula una pastiglia di VF CONTROL PLUS	Vedere paragrafo 9.5.
Dopo ogni trattamento.	Manipolo contrangolo.	Sterilizzare o disinfettare l'esterno.	Vedi documentazione allegata al manipolo.
	Turbina.	Sterilizzare o disinfettare l'esterno.	Vedi paragrafo 5.4.
	Micromotore.	Disinfettare l'esterno.	Vedi paragrafo 5.5.
	Ablatore.	Sterilizzare o disinfettare l'esterno.	Vedi paragrafo 5.6.
	Siringa.	Sterilizzare o disinfettare l'esterno.	Vedi paragrafo 5.3.
	Lampada polimerizzante.	Sterilizzare la fibra ottica, disinfettare l'esterno.	Vedi paragrafo 5.7.
	Telecamera C-U2.	Disinfettare l'esterno. Non impiegare prodotti abrasivi o acidi.	Vedi paragrafo 5.8.
	Tubi aspirazione chirurgica.	Aspirare con ciascuna cannula circa 1/2 litro di soluzione igienizzante. Sterilizzare i terminali porta-cannula.	Vedi paragrafo 9.4.
In caso di bisogno	Bacinella.	Pulire con detergenti commerciali per materiali ceramici. Non impiegare prodotti abrasivi o acidi.	Vedi paragrafo 7.1.
	Separatore chirurgico METASYS.	Vedi documentazione allegata all'apparecchiatura.	/
	Separatore chirurgico DÜRR.	Vedi documentazione allegata all'apparecchiatura.	/
	Lampada operatoria.	Vedi documentazione allegata all'apparecchiatura.	/
	Monitor a palo lampada.	Vedi documentazione allegata all'apparecchiatura.	/
	Cordoni strumento removibili.	Pulire con prodotto disinfettante idoneo attenendosi alle istruzioni del fabbricante. Non impiegare prodotti abrasivi o acidi.	Vedi paragrafo 5.
	Superfici verniciate e sellerie poltrona.	Pulire con prodotto disinfettante idoneo attenendosi alle istruzioni del fabbricante. Spruzzare il prodotto su carta monouso morbida. Non impiegare prodotti abrasivi o acidi.	Vedi paragrafo 1.4.
Al termine della giornata di lavoro.	Filtro della bacinella.	Pulire il filtro in acqua corrente. Il contenuto deve essere smaltito separatamente.	Vedi paragrafo 7.1.
	Filtro aspirazione chirurgica.	Controllare il filtro e sostituirlo in caso di riduzione della portata di aspirazione (codice 97461845).	Vedi paragrafo 9.3.
	Tubi aspirazione chirurgica.	Pulire il filtro del terminale aspirasaliva.	Vedi paragrafo 9.4.
	Aspirasaliva idraulico.	Pulire il filtro del terminale aspirasaliva.	Vedi paragrafo 6.6.
Ogni settimana.	Separatore chirurgico CATTANI.	Pulire il vaso separatore, la valvola di drenaggio e le sonde.	Vedi paragrafo 9.5.
	Terminali porta-cannula.	Lubrificare la guarnizione O-Ring.	Vedi paragrafo 9.4.
Ogni mese.	Filtro aria di ritorno turbina.	Controllare il filtro e, se necessario, sostituirlo (codice 97290014).	Vedi paragrafo 9.6.
Ogni anno.	Poltrona dentistica.	Chiamare l'Assistenza Tecnica per un controllo generale di funzionamento.	/

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ “CE / EU” / “CE / EU” CONFORMITY DECLARATION
DECLARATION DE CONFORMITÉ “CE / EU” / ERKLÄRUNG VON “CE / EU” ZUSTIMMUNG / DECLARACION DE CONFORMIDAD “CE / EU”
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE “CE / EU” / ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ “CE / EU” / ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ “CE / EU”
DEKLARACJA ZGODNOSCI WE “CE / EU” / “CE / EU” UYGUNLUK BELGESİ

Prodotto tipo/ Product type :

Matr./ Serial N°:

Incollare in questo spazio l'etichetta del complesso
odontoiatrico o di altra apparecchiatura o indicare
modello e numero di matricola
Stick the label of the dental equipment or other device
into this space or write model and serial number

- I** Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi
1) ai requisiti essenziali (Allegato I) presenti nella direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici (D.Lgs.46/97) e successive modifiche ed integrazioni (**dispositivo medico di Classe IIa**)
2) alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Rohs 2)
- GB** We declare, on our sole responsibility, that the products referred to herein are in compliance with
1) the essential requirements (Annexe I) of Directive 93/42/EEC Medical devices (Leg. Decree 46/97) and subsequent amendments and integrations (**Class IIa medical device**)
2) Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (Rohs 2)
- F** Nous déclarons, sous notre complète responsabilité, que les produits auxquels la présente déclaration fait référence sont conformes
1) aux exigences essentielles (Annexe I) présentes dans la directive 93/42/CEE "Dispositifs médicaux" (Décr.L. 46/97) et modifications successives et intégrations (**dispositif médical de Classe IIa**)
2) à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Rohs 2)
- D** Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, konform sind mit
1) den grundlegenden Anforderungen (Anhang I) der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte (Gesetzesverordnung 46/97) und nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen (**medizinisches Gerät der Klasse IIa**)
2) der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Rohs 2)
- E** Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos a los que esta declaración se refiere, están conformes con
1) los requisitos esenciales (Anexo I) presentes en la directiva 93/42/CEE Dispositivos Médicos (D. Leg. 46/97) y sucesivas modificaciones e integraciones (**dispositivo médico de Clase IIa**)
2) la directiva 2011/65/UE del Parlamento europeo y del Consejo del día 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos (Rohs 2)
- P** Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que os produtos aos quais esta declaração se refere estão em conformidade
1) com os requisitos essenciais (Anexo I) presentes na directiva 93/42/CEE Dispositivos Médicos (em Itália, transposta pelo Decreto Legislativo 46/97) e posteriores alterações e aditamentos (**dispositivo médico de Classe IIa**)
2) com a directiva 2011/65/UE do Parlamento europeu e do Conselho de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Rohs 2)
- GR** Δηλώνουμε με την αποκλειστική ευθύνη μας ότι τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα
1) με τις βασικές απαιτήσεις (Προσάρτημα Ι) της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ν. Διάτ.46/97) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις (**ιατροτεχνολογικό προϊόν Κατηγορίας IIa**)
2) με την οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 8 Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξοπλισμό (Rohs 2)
- PY** Под нашу исключительную ответственность заявляем, что изделия, к которым относится данная декларация, соответствуют
1) основным требованиям (Приложение I) директивы 93/42/ЕЭС Медицинские устройства (Законодательный указ № 46/97) и последующим изменениям и дополнениям (**медицинское устройство Класса IIa**)
2) директиве 2011/65/ЕС Европарламента и Совета Европы от 8 июня 2011 года по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (Rohs 2)
- PL** Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty objęte niniejszym oświadczeniem są zgodne:
1) z zasadniczymi wymaganiami (Załącznik I) przewidzianymi dyrektywą 93/42/EWG WYROBY Medyczne (D. z mocą ustawy 46/97) wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami (**wyrób medyczny Klasa IIa**)
2) z dyrektywą 2011/65/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określonych niebezpiecznych substancji (Rohs 2)
- TR** Bu beyannamede bahsi geçen ürünlerin aşağıda belirtilenlere uygun olduğunu kendi mühasır sorumluluğumuz altında beyan ederiz:
1) (Kanun hükmünde Kararname 46/97) Medikal Aygıtlar 93/42/CEE direktifinde mevcut (Ek 1) ana gereklilikler ve sonraki değişiklikler ve eklemelerde belirtilenler (**IIa sınıf medikal aygıt**)
2) 8 Haziran 2011 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin "Elektrikli ve elektronik cihazlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanılmasına ilişkin kısıtlamalar" 2011/65/UE direktifi (Rohs 2)

Imola, li _____

Bussolari Paolo
Managing Director